

# INFODENT®

www.infodent.it MENSILE D'INFORMAZIONE COMMERCIALE DEL DENTALE

n. 4 • 2006 - anno XVIII - CENTRO-SUD ITALIA

**EMS**  
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS



## IN QUESTO NUMERO A CONFRONTO:

### SOFTWARE CEFALOMETRICI

- *Armonia e anomalia*

Pag 5

### CEMENTI PROVVISORI

- *Uniti sì,  
ma non per sempre*

Pag 29

### SALDATRICI

- *L'unione  
fa la forza*

Pag 37

### APPROFONDIMENTI

SOFTWARE CEFALOMETRICI

- **Un software diverso dagli altri**
- **Versatilità e facilità d'uso**
- **OrisCEPH Rx3®**
- **Imceph**

Pag 11

CEMENTI PROVVISORI

- **Easycem**
- **Plastor**
- **NoMix® Temporary Cement**
- **System link**

Pag 34

SALDATRICI

- **Welder™**



Pag 41

## Vi aspettiamo ad Amici di Brugg

### Rimini 18-20 maggio 2006

Pad. B1 - Sal.1 - Corsia 2 - Stand 55



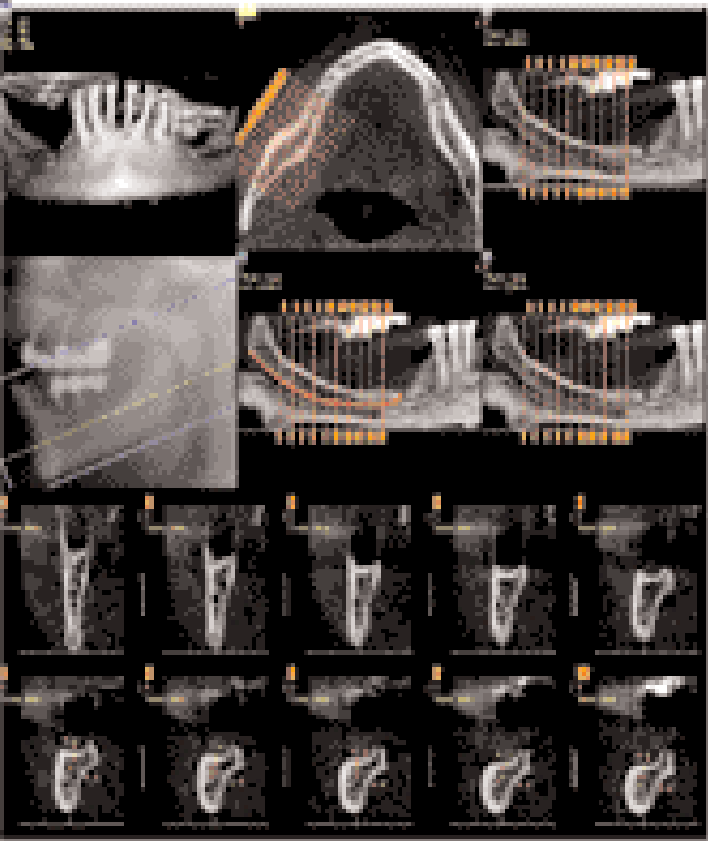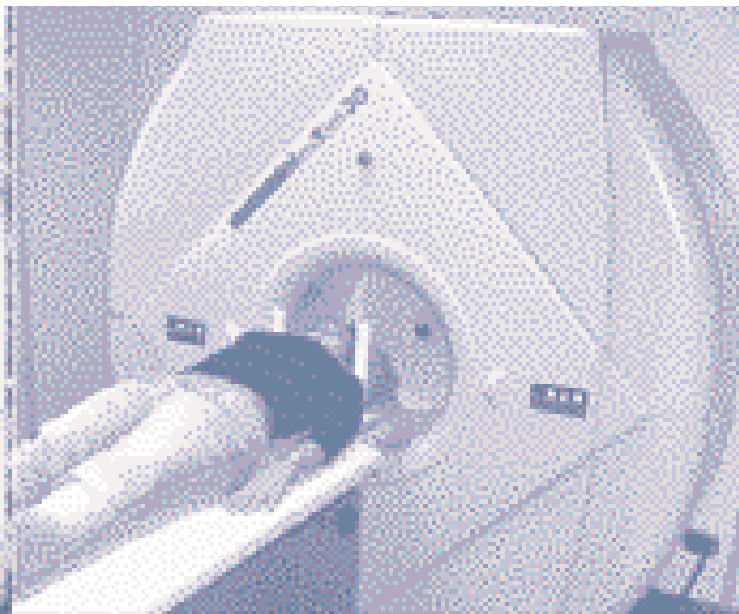

**radmedicaostia**

*radiologia odontoiatrica digitale*

[www.radmedicaostia.it](http://www.radmedicaostia.it)

**NEW TOM 3G...**

l'evoluzione del Maxiscan.

Roma Ostia, Via Isole del Capoverde, 274  
Tel/Fax: 06.56.46.977 - [info@radmedicaostia.it](mailto:info@radmedicaostia.it)

Direttore responsabile  
Riccardo Chiarapini  
Segreteria di redazione

Stefano Toticchi  
Coordinamento  
Diana Carbonetti  
Direzione grafica  
Gisella Benedetti  
Consulenza scientifica e normativa

Alberto Emiliani  
Collaboratore  
Cristina Rodighiero  
Impaginazione e grafica  
B&C s.r.l. - divisione grafica  
Marketing e Pubblicità  
Gianluca Passeri tel. 0761.393306 - 335.1213136  
Baldo Pipitone tel. 06.5817254 - 336.773328

Mensile d'informazione commerciale del dentale  
ANNO XVIII - n. 4 - aprile 2006

Poste Italiane SpA - Spedizione in AP - D.L. 353/2003 (conv. in L.  
26/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB VITERBO -  
Autorizzazione del Tribunale di Viterbo n. 341 del  
7/12/88

Editore B&C s.r.l.  
Strada Teverina Km. 3,600 - 01100 VITERBO  
Telefono 0761.393.1 - Fax 0761.393.222

Stampa - Graffietti Stampati snc  
S.S. Umbro Casentinese Km. 4,500  
Montefiascone (VT)

Testata volontariamente sottoposta a  
certificazione di tiratura e diffusione  
in conformità al Regolamento C.S.S.T.  
Certificazione Stampa Specializzata Tecnica

Per il periodo 1/1/2005 - 31/12/2005  
Tiratura media: 16.222  
Diffusione media: 15.997  
Certificato CSST n. 2005-1108  
Società di Revisione: RSM Ria & Partners Spa  
Tiratura del presente numero: 18.000  
una copia euro 0,77 - contiene I.P.  
La redazione non restituisce il materiale utilizzato

## SOMMARIO

### ► A CONFRONTO:

5 SOFTWARE  
CEFALOMETRICI  
Armonia e anomalia

7 Tabelle di comparazione

### ► APPROFONDIMENTI:

11 • Un software diverso dagli altri  
• Versatilità e facilità d'uso  
• OrisCEPH Rx3®  
• Imceph

### ► AGENDA:

15 Congressi e Fiere in Italia  
e all'estero (Maggio/Giugno)  
17 Calendario dei corsi  
(Maggio/Giugno)

### ► A CONFRONTO:

29 CEMENTI PROVVISORI  
Uniti sì, ma non per sempre

31 Tabelle di comparazione

### ► APPROFONDIMENTI:

34 • Easycem  
• Plaster  
• NoMix® Temporary Cement  
• System link

### ► A CONFRONTO:

37 SALDATRICI  
L'unione fa la forza

39 Tabelle di comparazione

### ► APPROFONDIMENTI:

41 • Welder™

### ► DALLE AZIENDE:

43 • S3 Bond Kuraray:  
chimera chimica  
• Reti di Titanio-TiN  
Tocksystem  
• Odontocard® S.r.l., il Made  
in Italy sbarca all'estero  
• Ipersensibilità dentinale:  
il sistema Sensodyne

### ► IN VETRINA:

47 Ogni mese i prodotti in offerta  
proposti dagli operatori

### ► ANNUNCI ECONOMICI:

49 Annunci gratuiti di offerta e ricerca  
collaborazione, offerta e ricerca  
attrezzature, offerta e ricerca attività

### ► INSERZIONISTI


• A&A General Consulting (Galbiati) pag. 24 •  
Bien Air pag. 22 • Caes Software pag. 11 •  
Dei Italia pag. 34 • Dent Up pag. 23 •  
Dolphin Computer pag. 13 • Elite Computer  
pagg. 12/IV Cop. • EMS Italia pagg. I Cop./26  
• Eurocompress pagg. 45/47 • Fordent pag.  
4 • Fornimplant pag. 20 • Genetica pag. 11  
• Ghimas pag. 34 • Giorgi Forniture Dentali  
pag. 51 • Glaxo SmithKline pagg. I Cop./18 •  
Idem Riuniti pag. 41 • Imtec pag. III Cop. •  
Infomedica pag. 13 • Isasan pag. 43 • Ivoclar  
Vivadent pag. 34 • Life Support Systems pag.  
42 • Linea Tac pag. 35 • Luigi RussoEditore  
pag. 47 • Mariotti pagg. 25/47 • Maxi  
Medical pag. 34 • Mectron pag. 28 • Media  
Lab pag. 47 • Metal Store pag. 14/46 •  
Multysystem pagg. 47/49 • Nuova Gerhò  
pag. 41 • Odontocard pag. 27 • Ognà  
Giovanni & Figli pag. 36 • Orthopost pag. 50  
• Physioline pag. 27 • Promunidi pag. 53 • Rad  
Medica Ostia pag. II Cop. • Reverberi pag. 12  
• Samdent pag. 21 • Sandro Pensa  
Laboratorio Odontotecnico pag. 34 • Scuola  
Andi Latium pag. 21 • Simex Italia pag. 16 •  
Smile Center pag. 54 • Softwork pag. 52 •  
Stiltec pag. 44 • Styl Frigo - Astra Mobili pag.  
3 • TD Service pag. 45 • Tecnomobile pag. 23  
• Tocksystem pag. 15 • Welltrade pagg.  
17/19 • World Line pag. 48

**Informativa ai lettori** - Questa rivista Le è stata inviata  
tramite abbonamento, l'indirizzo in nostro possesso  
verrà utilizzato per l'invio della rivista, per l'invio di altre  
riviste, per l'invio di proposte di abbonamento, per l'in-  
vio di informazioni tecniche e commerciali, nonché per la  
divulgazione di eventi formativi e promozionali e per la  
cessione degli stessi a terze aziende per le medesime  
finalità. In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui  
all'art. 7 del D. Lgs 196/2003, e quindi conoscere, ottene-  
re la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e  
l'integrazione dei Vostri dati, nonché opporVi al loro uti-  
lizzo per le finalità su indicate. Qualora venisse esercita-  
to il diritto alla cancellazione lo stesso comporterebbe il  
mancato invio della presente rivista. Il titolare del tratta-  
mento è B&C srl con sede in Viterbo, Strada Teverina Km  
3,600, nella persona del suo legale rappresentante.

#### ERRATA CORRIGE

Nel numero 3/2006 della rivista, nell'elenco degli "Operatori  
inclusi nel confronto sugli estrattori per osso autologo", pub-  
blicato a pag. 8, il numero telefonico dell'azienda  
Tocksystem di Tock G.R. è stato erroneamente pub-  
blicato incompleto. Il numero corretto è 031.280301.


 **Sterilizzazione**  
Sterilizzazione

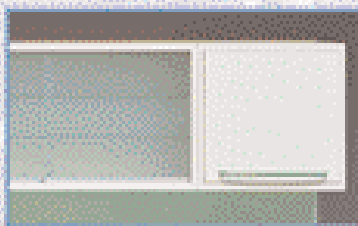

Composizione ALIUS



L280 P600 H130

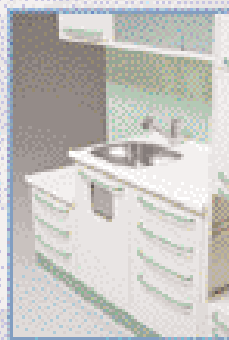


Informazioni presso i nostri rivenditori

# ASTRA

PROGRAMMI D'ARREDO  
PER IL SETTORE DENTALE

Via Redenta, 13 - 33080  
Chions (PN), Italy  
Tel. 0039 0434 635210  
Fax 0039 0434 635258  
<http://www.astrastyl.it>

GRUPPO  
**FORDENT**  
DENTAL SUPPLY

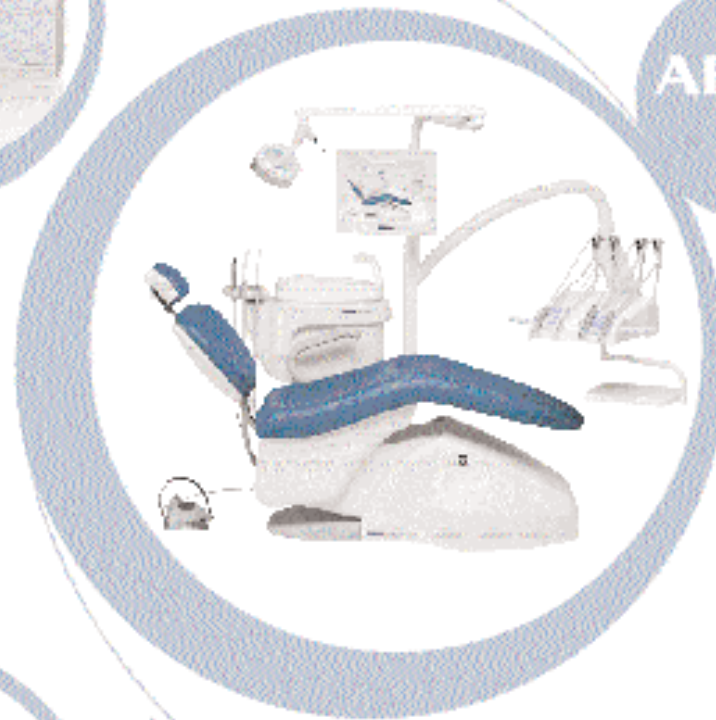

**ARTEX**  
€



**VITALI** IDEE & PROGETTI IN EVOLUZIONE.

**Riunito Artex €**  
**Turbina a fibra ottica**  
**Contrangolo 40.000 giri**  
**Ablatore piezoelettrico**  
**Seggiolino**  
**Serie mobili composti da 4 moduli**  
**Montaggio e trasporto**  
**Euro 12.590,00 + iva**  
**Pagabile in 60 rate da euro 263,00 + iva con zero spese**

## SOFTWARE CEFALOMETRICI A CONFRONTO

# Armonia e anomalia



*La determinazione delle dimensioni craniofacciali è una prerogativa fondamentale per il trattamento ortodontico.*

I primi metodi utilizzati per determinare le proporzioni facciali si basavano su un punto di vista artistico che aveva come principi guida la bellezza e l'armonia.

Questi canoni, però, mutavano col tempo e in base a culture differenti. L'analisi del viso umano eseguita da Dürer portò alla determinazione delle proporzioni ideali, con suddivisione del viso in quadranti.

Diversi anni dopo, il metodo di Dürer venne applicato all'analisi delle radiografie

cefalometriche da Coster e Moorees. La cefalometria, ovvero la misurazione scientifica della dimensione della testa, è stato il primo metodo effettivo e accurato per la determinazione della crescita craniofacciale e della risposta al trattamento ortodontico. Le prime immagini radiografiche del cranio con vista laterale standard vennero eseguite da Pacini e Carrera nel 1922. Negli anni successivi, diversi furono i metodi di realizzazione di tale tipo di radiografia proposti dagli autori, ma mancando una descrizione accurata di tali metodi, si può parlare solo di studi individuali.

Bisognerà, infatti, aspettare il 1931, quando Hofrath e Broadbent svilupparono contemporaneamente, ma in modo indipendente, metodi standardizzati per la produzione di radiografie cefalometriche mediante supporti speciali, definiti cefalostati. La radiografia cefalometrica venne quindi introdotta in ortodonzia negli anni Trenta, ma questo tipo di indagine ha acquisito una maggior accettazione solo negli ultimi decenni. Negli anni, sono state sviluppate e proposte diverse metodologie di analisi, il cui scopo è quello di individuare le malformazioni sulla base dello studio della crescita facciale. La radiografia cefalometrica comunemente usata è in sostanza una radiografia laterale del cranio eseguita in condizioni rigidamente standardizzate.

Le teleradiografie nelle proiezioni laterale e frontale per valutazioni cefalometriche sono radiografie del cranio eseguite con una distanza foco-pellicola maggiore di quella standard. Per la valutazione diagnostica della teleradiografia si utilizzano metodi diversi, a seconda delle scuole ortodontiche. Dall'analisi di una teleradiografia si ricavano dati fondamentali per lo studio della malocclusione e l'esecuzione di un corretto trattamento ortognatodontico.

Da una teleradiografia si ricavano non solo informazioni anatomiche, ma, attraverso l'esecuzione del cosiddetto tracciato, anche elementi fondamentali per impostare il caso. Il tracciato è la premessa di una serie di misurazioni lineari e angolari con cui il clinico, rilevando le differenze con i valori ideali, può orientarsi.

## MANUALE O COMPUTERIZZATO?

Dopo essere stata introdotta da Broadbent nel 1931, l'analisi cefalometrica ha assunto negli anni un ruolo fondamentale per gli ortodontisti per lo studio preciso e standardizzato delle malocclusioni e delle anomalie scheletriche. Grazie alla cefalometria, infatti, l'ortodontista può analizzare le variabili indispensabili per la corretta formulazione della diagnosi e per la pianificazione del trattamento. Tra queste variabili vi sono la tipologia facciale, la direzione e la previsione di crescita. Inoltre, il tracciato cefalometrico permette di valutare i risultati di un trattamento ortodontico nel tempo. L'analisi cefalometrica eseguita in modo tradizionale si avvale di una teleradiografia in proiezione latero-laterale sulla quale viene sovrapposto un fo-



glio di acetato che consente di tracciare una serie di punti, piani e angoli. Come è facilmente intuibile, questo tipo di procedura richiede molto tempo e molta esperienza. Infatti, le misure lineari e angolari si ottengono manualmente con righello e goniometro e quindi questa operazione manuale può portare a errori di misurazione. A questi, poi, che si aggiungono altre possibilità di errore derivanti dall'identificazione dei punti di repere.

Anche in questo ambito, lo sviluppo della tecnologia informatica ha permesso di standardizzare, facilitare e velocizzare l'analisi cefalometrica. Diversi sono i programmi disponibili sul mercato e tutti sono accomunati dalle caratteristiche di rapidità e semplicità. Questi

programmi, infatti, richiedono solamente che l'operatore localizzi i punti di repere e istantaneamente vengono calcolate tutte le misurazioni richieste. I profili anatomici vengono quindi disegnati in modo automatico e con assoluta precisione.

I programmi, inoltre, prevedono la possibilità di applicare i diversi metodi di analisi, in base alla scuola ortodontica prescelta. Solitamente, a questi programmi è abbinato anche uno di videoscrittura che permette di inserire note cliniche e commenti. La digitalizzazione dei dati, inoltre, permette di interagire con essi e di inviarli per e-mail.

I dati dell'analisi possono essere archiviati su computer e, grazie all'integrazione con i software gestiona-

li, utilizzati per la cartella clinica del paziente.

### LA TELERADIOGRAFIA: QUALE PROIEZIONE?

**La teleradiografia frontale** viene utilizzata soprattutto per la realizzazione dell'analisi teleradiografica.

**La teleradiografia laterale** permette una buona localizzazione dei denti inclusi, nel caso siano incuneati nelle parti anteriori del mascellare superiore.

**La teleradiografia postero-anteriore** è utilizzata soprattutto per documentare le asimmetrie del cranio. Può essere utilizzata anche per la rappresentazione dei molari inclusi superiori.

Legenda: Ⓐ Approfondimenti Ⓔ In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

### ► Software Cefalometrici

Denominazione del prodotto		ARCHIMED CEPH	CEPH PRATIC	CRANECAD
Produttore		Digital Imaging srl	Odontoprogram	Quartex Informatica
Requisiti minimi di sistema richiesti per l'installazione	Sistema Operativo	Windows XP	Windows 98-XP	Windows tutti
	Ram	512 Mb	128 Mb	Min 64 Mb
	Spazio libero su Hard Disk	100 Mg	700 Mb	Min 100 Mb
	Scheda Video	1024x768	800x600	SVGA
Tipo di licenza		Illimitata	Illimitata, limitata noleggio	Illimitata con chiave di protezione
Tipo di utilizzo		Singolo utente, multiutente, rete locale	Singolo utente, multiutente, rete locale	Singolo utente
Interazione con sistemi		Sistemi radiografici digitali, scanner	Sistemi radiografici digitali, scanner	Scanner
Stampa cefalometria		Si	Si	Si
Stampa diagnosi		Si	Si	Si
Trasferimento cefalometria su supporti		No	Si magnetici	Si cartaceo di qualsiasi tipo
Esportazione/importazione di cartelle cliniche		Si	Si	Si
Analisi cefalometrica		Tutte le più diffuse	Tutte	Delaire, Standard, Ricketts, Gianni, Cagliari, Tweed, personalizzato extra
Analisi OPT		Si	Si	No
Analisi modelli di studio		Si	Si	No
Analisi fotografica per valutazione profilometrica		Si	Si	Si
Visualizzazione VTO		Si	Si	No
Previsione crescita senza trattamento		Si	Si	No
Calibrazione automatica radiografia		Si	Si	Si
Elaborazione immagini		Si	Si	Si
Calcolo automatico dei punti di repere		Si	No	No
Sovrapposizione tracciati		Si	Si	No
Formato di salvataggio cefalometria		JPG, BMP	JPG, BMP	Tiff
Altre prestazioni		E' possibile collegare ArchiMED Ceph al software di pianificazione impiantare ed alla gestione dello studio. Pianificare gli appuntamenti, i pagamenti del trattamento e fare da service per altri studi. Il profilo cutaneo è evidenziato automaticamente.	Gestione richiami, odontogramma, PdT, esportazione cartella clinica in html	Integrabile al software Gestionale Dentix e Odis e al software di elaborazione di immagini Imagex
Prezzo di listino*		A partire da euro 800,00	A partire da euro 850,00	Euro 350,00 (in CD-ROM) euro 100,00 (download dal sito)

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

### ► Software Cefalometrici

Denominazione del prodotto		DID-CRANE	EASY CEPH TRACE	FAROCEPH
Produttore		Quartex Informatica	Libra Ortodonzia srl	Ellesoft di Lauro Corti
Requisiti minimi di sistema richiesti per l'installazione	Sistema Operativo	Windows tutti	Windows 2000-XP (Home e Pro)	Windows 98 e superiori
	Ram	Min 64 Mb	•	32 Mb
	Spazio libero su Hard Disk	Min 100 Mb	•	•
	Scheda Video	SVGA	•	•
Tipo di licenza		Illimitata con chiave di protezione	Illimitata, limitata variabile	•
Tipo di utilizzo		Singolo utente	Singolo utente, multiutente, rete locale	Singolo utente, rete locale
Interazione con sistemi		Scanner	Sistemi radiografici digitali, scanner	Sistemi radiografici digitali, scanner
Stampa cefalometria		Si	Si	Si
Stampa diagnosi		Si	Si	Si
Trasferimento cefalometria su supporti		Si, cartaceo di qualsiasi tipo	Si, e-mail, cd, dvd, supporti esterni di memorizzazione	Si, file imm. BMP
Esportazione/importazione di cartelle cliniche		Si	Si	•
Analisi cefalometrica		Delaire, Standard, Ricketts, Gianni, Cagliari, Tweed, personalizzato extra	Programmabile dall'utente secondo qualsiasi scuola. Alla consegna il cliente trova downs ricketts, rickettspa, steiner, tweed	23 complessivamente
Analisi OPT		No	Si	Si
Analisi modelli di studio		No	Si	Si
Analisi fotografica per valutazione profilometrica		Si	Si	Si
Visualizzazione VTO		No	No	No
Previsione crescita senza trattamento		No	No	Si
Calibrazione automatica radiografia		Si	No	Si
Elaborazione immagini		Si	Si	Si
Calcolo automatico dei punti di repere		No	No	Si (costruiti)
Sovrapposizione tracciati		No	Si	Si
Formato di salvataggio cefalometria		TIFF	JPG, BMP, proprietario	JPG, BMP, tutti i principali
Altre prestazioni		Integrabile al software Gestionale Did-Dent e Odix e al software di elaborazione di immagini Did-Vedo	Integrazione suite gestione studio, programmabilità delle scuole	Crittografia, VTO dentale, VAS, analisi posturale, Bolton
Prezzo di listino*		Euro 550,00	Euro 870,00 (illimitata)	Euro 1.500,00

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## ► Software Cefalometrici

Denominazione del prodotto	FASTCEPH (A)	IMCEPH (A)	ORISCEPH (A)	
Produttore	Caes Software srl	Infomedica srl	Elite Computer Italia srl	
Requisiti minimi di sistema richiesti per l'installazione	Sistema Operativo	Windows 2000-XP	Windows 2000 e XP	
	Ram	256 Mb	64 Mb	256 Mb
	Spazio libero su Hard Disk	30 Mb	100 Mb	300 Mb
	Scheda Video	VGA 1024x768	1024x768	SuperVGA 1024x768
Tipo di licenza	Illimitata, limitata abbonamento annuale	Illimitata, limitata	Illimitata	
Tipo di utilizzo	Singolo utente, multiutente, rete locale	Singolo utente, multiutente, rete locale	Singolo utente, multiutente, rete locale	
Interazione con sistemi	Sistemi radiografici digitali, scanner	Sistemi radiografici digitali, scanner	Sistemi radiografici digitali, scanner e macchine fotografiche digitali	
Stampa cefalometria	Si	Si (solo tracciato, tracciato su lastra)	Si	
Stampa diagnosi	Si	Si	Si	
Trasferimento cefalometria su supporti	Si, tutti	Si, qualunque supporto fisico e può essere trasformato in immagine (invio mail o masterizzazione)	Si	
Esportazione/importazione di cartelle cliniche	Si	Si	Si	
Analisi cefalometrica	Tutte	Tutte vds. bollino giallo su approfondimento Infomedica	Tutte	
Analisi OPT	Si	Si	Si su richiesta	
Analisi modelli di studio	Si	Si	Si	
Analisi fotografica per valutazione profilometrica	Si	Si	Si	
Visualizzazione VTO	No in lavorazione	No in lavorazione	Si	
Previsione crescita senza trattamento	No in lavorazione	No in lavorazione	Si	
Calibrazione automatica radiografia	Si	Si	Si	
Elaborazione immagini	Si	Si	Si	
Calcolo automatico dei punti di repere	Si	Si	Si	
Sovrapposizione tracciati	Si	Si	Si	
Formato di salvataggio cefalometria	JPG	Settaggio definito in fase di installazione (supporto di diversi formati grafici)	JPG, BMP, TIFF	
Altre prestazioni	Morphing su foto, creazione di slide	Incluso un diario clinico collegato con il programma FACILE ed IMAGES che permette la gestione dell'intero paziente: anamnesi, cartella grafica, schema grafico brackets e bande, gestione immagini fotografiche e radiografiche (status personalizzabili)	Progr visuale per generare nuove metodiche, morphing, aggior. delle misure in tempo reale, normogramma, help contestuale per la creazione del tracciato, nuova norm. privacy, gestione più archivi, gestione di valori medi parametrici e da tabella, cartella ortodontica	
Prezzo di listino*	Euro 300,00 (abb. Annuale) Euro 1.300,00 (acquistato)	Euro 1.860,00	Euro 1.790,00	

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## ► Software Cefalometrici

Denominazione del prodotto		PC CEPH 3.0	SIBILLA (A)
Produttore		Softwork snc	Genetica srl
Requisiti minimi di sistema richiesti per l'installazione	Sistema Operativo	Windows 98	Windows 32, Linux, Mac
	Ram	128 Mb	256 Mb
	Spazio libero su Hard Disk	5 Mb	10 Mb
	Scheda Video	800x600	1024x768
Tipo di licenza		Illimitata	Illimitata, limitata annuale
Tipo di utilizzo		Singolo utente, multiutente	Singolo utente, multiutente, rete locale
Interazione con sistemi		Sistemi radiografici digitali, scanner	Sistemi radiografici digitali, scanner
Stampa cefalometria		Si	Si
Stampa diagnosi		Si	Si
Trasferimento cefalometria su supporti		Si esporta su file wmf	Si tutti
Esportazione/importazione di cartelle cliniche		No	Si
Analisi cefalometrica		Varie e personalizzabili	Tutte
Analisi OPT		No	Si
Analisi modelli di studio		No	Si
Analisi fotografica per valutazione profilometrica		No	Si
Visualizzazione VTO		Si	Si
Previsione crescita senza trattamento		Si	No
Calibrazione automatica radiografia		No	Si
Elaborazione immagini		Si	Si
Calcolo automatico dei punti di repere		No	Si
Sovrapposizione tracciati		Si	Si
Formato di salvataggio cefalometria		JPG, BMP	JPG, BMP, PDF, altri
Altre prestazioni		Personalizzazione dei tracciati per grafica, metodologia clinica e nella diagnosi	Archivi su supporti removibili, certificazione IBO, READER gratuito, invio dossier via internet
Prezzo di listino*		Euro 1.000,00	Euro 1.200,00 (licenza illim. singola)

### AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

I dati pubblicati in questa sezione sono acquisiti dalle schede tecniche dei prodotti, dalle etichette delle confezioni, o da materiale illustrativo "di pubblico dominio" che abbia uguale valenza legale. I prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

### GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SUI SOFTWARE CEFALOMETRICI

#### Caes Software srl

06.94316041 - [www.fastceph.com](http://www.fastceph.com)

#### Digital Imaging srl

011.6056962

[www.digitalimaging.it](http://www.digitalimaging.it)

#### Elite Computer Italia srl -

02.2590652 - [www.orisline.com](http://www.orisline.com)

(Distributore Sweden & Martina

spa - 049.9124300 -

[www.sweden-martina.it](http://www.sweden-martina.it))

#### Ellesoft di Lauro Corti

(Distributore Faro spa -

039.68781 - [www.faro.it](http://www.faro.it))

#### Genetica - 02.45506022

[www.genetica-soft.com/Sibilla](http://www.genetica-soft.com/Sibilla)

#### Infomedica srl

039.481604 - [www.imedica.it](http://www.imedica.it)

#### Libra Ortodonzia srl

0575.351718 - [www.libra-ortho.it](http://www.libra-ortho.it)

#### Odontoprogram - 0541.691345

[www.odontoprogram.com](http://www.odontoprogram.com)

#### Quartex Informatica - 02.4984998

[www.quartex.it](http://www.quartex.it) (Distributore per

Did-Crane: DID Dental Instrument

Design srl - 039.6010631 -

[www.did-dental.it](http://www.did-dental.it))

#### Softwork snc - 045.9251255

[www.soft-work.net](http://www.soft-work.net)

## ► Un software diverso dagli altri

Sibilla è un programma per la cefalometria computerizzata versatile e di facile uso, disponibile oltre che per Windows anche per Linux e Mac (a richiesta).

Il formato dei dossier è conforme agli standard IBO e supporta direttamente il processo di certificazione e Model Display. Prevede inoltre la funzione di client FTP per l'invio diretto via internet dei singoli dossier pazienti e un sistema di diagnosi automatica basata su rete neurale.

L'interfaccia utente è studiata per essere semplice ed intuitiva, è personalizzabile con numerosi stili e si adatta automaticamente alle dimensioni della finestra di visualizzazione.

I dossier pazienti sono logicamente raggruppati in archivi, gli archivi possono essere salvati su qualsiasi supporto di memoria sia fisso che rimovibile (Hard Disk, CD, chiavi USB, ecc). La ricerca dei dossier è effettuata mediante motore di ricerca. La sicurezza dei dati è assicurata

sia dal formato di memorizzazione (codificato) sia dalle funzioni interne al programma che permettono un facile backup degli archivi. Sono disponibili le principali scuole cefalometriche che, grazie ad un esclusivo motore di calcolo, tracciamento e stampa, sono completamente personalizzabili ed integrabili con qualsiasi funzione matematica e di tracciamento. I valori calcolati su immagini diverse possono essere messi in relazione fra loro (per esempio, foto di modelli lato destro e sinistro). Le stampe prodotte sono personalizzabili mediante il logo dello studio.

I confronti fra tracciati di diversi stadi clinici sono agevolati da funzioni di auto-allineamento e scala per un immediato riscontro.

Durante l'analisi, la diagnosi è facilitata dal risalto dato ai valori fuori norma (sia sull'interfaccia sia sulle stampe) e dagli algoritmi d'intelligenza artificiale certificati. Sibilla prevede anche la possibilità di creare illimitate nuove scuole per ogni

tipo d'immagine (rx, modelli, foto del volto ecc.).

Gli aggiornamenti del software vengono installati in modo trasparente per l'utente grazie al sistema di aggiornamento via internet, questo permette a Sibilla di essere sempre in evoluzione senza creare problemi all'utente. Dispone di un versatile sistema di comunicazione con l'eventuale gestionale dello studio già supportato da alcuni dei gestionali presenti sul mercato.

La versione Reader che permette la visualizzazione e stampa dei dossier prodotti mediante la versione Full è completamente gratuita. Sono disponibili sconti in convenzione per i membri di alcune delle principali associazioni degli specialisti in ortodonzia.




*Per informazioni:*

*Genetica srl  
Via San Dionigi, 15  
20139 Milano  
Tel. 02.45506022  
Fax 02.39195271  
e-mail:  
genetica@genetica-soft.com  
www.genetica-soft.com*

## ► Versatilità e facilità d'uso

Il software per cefalometria Fast Ceph è suddiviso in 4 sezioni: analisi, presentazioni, sovrapposizioni e trasformazioni.


L'analisi è il nucleo principale di Fast Ceph. Gli altri moduli, direttamente collegati all'analisi, consentono di eseguire operazioni ausiliarie per lo studio, per la rappresentazione e per seguire l'evoluzione dei casi ortodontici. È possibile effettuare molteplici tipi di analisi: laterali, frontali, degli spazi, sulle foto. I punti cefalometrici vengono condivisi per permettere il passaggio veloce da un'analisi all'altra. Mentre si effettua l'analisi, viene mostrata una sintesi dei risultati con evidenziazione delle deviazioni e colorazione in base alla severità della deviazione. Le immagini possono essere importate tramite scanner, fotocamere digitali e sensori digitali compatibili.

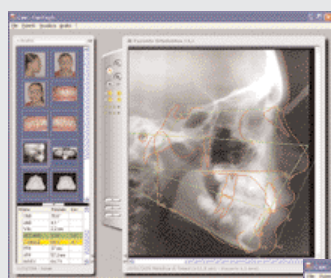

Le analisi e le immagini vengono visualizzate con una qualità particolarmente elevata grazie a sofisticate tecniche di elaborazione dell'immagine e di disegno. I piani principali vengono evidenziati grazie all'adozione di linee ad intensità variabile e all'antialias, rendendo immediatamente leggibile il tracciato. L'introduzione dei dati è veloce, precisa ed avviene in modo guidato. L'ordine d'inserimento ed il nome dei punti possono essere

modificati dalla configurazione: ci si ritrova così immediatamente a proprio agio in un ambiente altamente tecnologico come quello di Fast Ceph.

I profili vengono disegnati in automatico, con estrema precisione e naturalezza, semplicemente introducendo i punti cutanei, dentali ed ossei. L'esposizione e la visualizza-

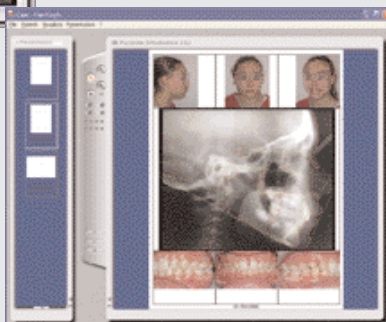

zione dettagliata dei risultati consente di evidenziare immediatamente i punti salienti dell'analisi. Le misurazioni possono essere

raggruppate per tipo e possono essere creati più schemi di visualizzazione della stessa analisi: schemi più compatti o più estesi a seconda dell'utilizzo.

Inoltre, è possibile scrivere note cliniche mediante un programma integrato di videoscrittura.

Facilità d'uso, versatilità, stampe professionali, esportazione dei dati, memorizzazione con database SQL, sono elementi importanti per la fruibilità e sicurezza del software. Fast Ceph può essere integrato con i gestionali tramite chiamate OLE. Con i gestionali Caes condivide anche il file pazienti.

*Per informazioni:*

*Caes Software srl  
Viale G. Dusmet, 3  
00046 Grottaferrata (RM)  
Tel. 06.94316041  
Fax 06.94315741  
e-mail: info@caes.it  
www.caes.it*

## OrisCEPH Rx3®: la cefalometria computerizzata più semplice, rapida e precisa



Con OrisCEPH di Elite Computer Italia è possibile eseguire un'analisi cefalometrica computerizzata con pochi movimenti del mouse, in modo semplice e veloce. OrisCEPH consente di effettuare sovrapposizioni di tracciati (multipla e a 5 aree), valutazione degli stessi con più di 20 metodiche diverse, relazione centrica, VTO chirurgico, analisi dei modelli, VTO di crescita, Morphing, calcolo automatico delle misure e della diagnosi, simulazioni di trattamento grazie alla rototraslazione delle strutture anatomiche. I

dati vengono inseriti a video direttamente sull'immagine radiografica e ad ogni paziente è collegata una cartella di analisi cefalometriche e una di archiviazione immagini per lo studio del caso specifico.

OrisCEPH è dotato inoltre di strumenti di painting, di templates e di modalità di visualizzazione che aiutano l'utente ad individuare con

estrema precisione i punti anatomici fondamentali, ci penserà poi il programma a calcolare in automatico le misurazioni e a fornire la diagnosi.

Orisceph include il Designer, un generatore di metodiche personalizzate, con cui è possibile creare la propria metodica stabilendo le misure, i punti, i piani e gli angoli da considerare, e modificare le metodiche già esistenti. A Maggio, in occasione del Congresso "Amici di Brugg", verrà presentato OrisCEPH Rx3, la nuova versione del programma per le analisi cefalometriche di Elite Computer Italia, comple-

tamente rinnovato nella forma e nei contenuti.

Grazie alla nuova interfaccia grafica, OrisCEPH Rx3 garantisce un tracciato cefalometrico preciso ed accurato: l'aggiornamento delle misure in una straordinaria semplicità di utilizzo. Nuove funzionalità grafiche consentono di effettuare rapidamente in tempo reale, l'inserimento automatico dei punti di repere, lo zoom ancora più potente, la possibilità di personalizzare lo spessore e il colore delle linee del tracciato, la nuova gestione dei valori medi parametrici, la visualizzazione delle deformazioni in tempo reale al variare dei parametri, la sovrapposizione della foto del paziente in trasparenza sul tracciato cefalometrico, il morphing libero, la nuova cartella ortodontica.

Per offrire al paziente un servizio esclusivo e di forte impatto sono state introdotte nuove stampe graficamente curate e la possibilità di stampare tutta la cartella del paziente.

Infine per tutti gli ortodontisti che hanno l'esigenza di personalizzare le metodiche o di inserirne di nuove è stato potenziato il designer che consente di inserire le strutture anatomiche e i valori medi direttamente nella metodica creata.

I vantaggi apportati dall'introduzione di un software per le analisi cefalometriche sono molteplici. L'immagine dello studio odontoiatrico viene valo-

rizzata, in caso di problematiche legali e contenziosi un tracciato cefalometrico, corredato da informazioni dettagliate, può essere un prezioso aiuto. Il paziente viene fidelizzato allo studio poiché comprende in modo tangibile l'importanza della cura a cui si sta sottoponendo e sarà quindi più propenso ad accettare i costi. OrisCEPH Rx3 può interagire con il software gestionale per lo Studio Dentistico OrisDent 9001®: dalla cartella ortodontica di OrisDent 9001® è possibile aprire OrisCEPH® direttamente nella schermata relativa al paziente selezionato per tracciare o consultare l'analisi cefalometrica. La gamma di prodotti di Elite Computer Italia si completa con OrisDent 9001®, software gestionale per lo Studio Dentistico, OrisDent Mobile® per la gestione dello studio su Palmare, il nuovissimo OrisEDUCO 2® per la comunicazione multimediale e l'educazione del paziente e OrisLAB X3® per la gestione del Laboratorio Odontotecnico.

**Per informazioni:**  
*Elite Computer Italia*  
Via Padova, 209  
20127 Milano  
Tel. 02.2590652  
Fax 02.2591752  
e-mail:  
info@orisline.com  
www.orisline.com

## AUTOCLAVI A VAPORE DA 7 LIT. A 20 LIT.



Baby

Autoclave completamente automatica, due cicli 121° e 134°, asciugatura automatica, carico acqua manuale con beaker, ciclo S, 7 lit.



Pratika B16

Autoclave completamente automatica, undici cicli di sterilizzazione, cicli speciali, vacuum test, asciugatura supplementare, ciclo B frazionato, 16 lit.



Full Clave B20

Autoclave completamente automatica tre temperature, 105°, 121° e 134°, cicli speciali, vacuum test, asciugatura supplementare, ciclo B frazionato, stampante incorporata, 20 lit.



Matika

Autoclave completamente automatica, due cicli 121° e 134°, asciugatura automatica, ciclo S, 16 lit.



Sealing Machine

Saldatrice termica per carta e plastica

Agente Gaetano Neri  
Cell. 335.5266695  
E-mail: neriga@tiscalinet.it



## ► Imceph: il tracciato cefalometrico all'avanguardia

Infomedica sviluppa programmi gestionali, di acquisizione immagini per studi odontoiatrici ed ortodontici e la nostra esperienza, maturata in quindici anni di specializzazione consente oggi di soddisfare ogni necessità organizzativa.

Il software cefalometrico Imceph è uno strumento indispensabile ed all'avanguardia nell'esecuzione e nell'analisi dei tracciati cefalometrici. Il Diario Clinico, il Tracciato Cefalometrico multimetodiche, le Sovrapposizione grazie a potenti software di elaborazione delle immagini ed all'alto livello di personalizzazione, unite ad una gradevole interfaccia grafica e alla facilità d'uso, rendono IMCEPH uno strumento consono sia al neofita che al professionista più esigente. La presenza di una apposita area di Zoom, con un fattore di ingrandimento

variabile, a cui è possibile applicare una gamma di filtri per l'ottimizzazione delle radiografie, rende l'individuazione dei punti cefalometrici, ancora più semplice e rapida.

Per semplificare ulteriormente l'esecuzione del Tracciato, indipendentemente dalla metodica selezionata ed alla conoscenza specifica, è stato inserito un Glossario sonoro ed animato. Sono comprese numerose metodiche e mediante la funzione "ANALISI ALTRA METODICA" è possibile effettuare tracciati di scuole diverse recuperando in automatico la medesima lastra, i profili dento-scheletrici, i tessuti molli e tutti i punti comuni alle varie metodiche. Le Sovrapposizioni permettono un facile e veloce confronto grafico tra più tracciati (fino a 5 contemporaneamente) sovrapposti in maniera completamente libera o ancorati per



un punto di repere (sul quale far coincidere i vari tracciati), ed orientati lungo un piano a scelta tra quelli comuni. Anche in fase di sovrapposizione l'aiuto fornito da un ingrandimento settabile a piacimento, permette di evidenziare le sovrapposizioni nelle zone critiche. Il Diario Clinico Ortodontico consente ad ogni seduta di rilevare una valutazione igienica e motivazionale, eventuali mancati appuntamenti (con generazione automatica di richiami per il paziente o il genitore)

note cliniche divise per arcata e di evidenziare velocemente i promemoria per il prossimo incontro.

La compilazione è ulteriormente agevolata dalla possibilità di inserire delle note preimpostate dal singolo utente

(TXT) che consentono di compilare il Diario Clinico con pochi click del mouse. È possibile inoltre indicare il tipo di documentazione rilevata durante l'appuntamento (Tele, Panoramica, Tracciati, Modelli, Foto), mediante l'uso di icone grafiche. Il vanto di INFOMEDICA è di comprendere nel programma la realizzazione della propria metodica, affidata ai nostri tecnici qualificati, sia che si tratti di unione di analisi derivante da scuole diverse, sia che si tratti di un'analisi 'ex novo'.



Per informazioni:  
 Infomedica srl  
 Via Dante Alighieri, 45  
 20035 Lissone (MI)  
 Tel. 039.481604  
 e-mail:  
 infomedica@imedica.it  
 www.imedica.it

### Con Videothron i vostri pazienti vi vedranno con un occhio diverso.

È uno strumento multimediale con schermo LCD ad alta definizione che permette di comunicare in modo innovativo con tutti i vostri pazienti. Visualizza informazioni, immagini, filmati ed animazioni utilizzando la sola alimentazione elettrica, senza collegamenti a personal computer, senza tastiera e senza mouse.

Disponibile in tre modelli: Basic, Medium, Top.

Possiamo fornire anche la "Carta dei Servizi" multimediale personalizzata con le immagini ed i testi relativi al Vostro Studio.

Per maggiori informazioni [www.videothron.it](http://www.videothron.it)

Prodotti da:  
 Dolphin Computer srl - Tel. 02-48955242 (R.A.)


**VIDEOTHRON** La soluzione per la Vostra sala d'attesa.

# Metal Store sas

Via Vecchia Napoli 132 NAPOLI - Zona. NA e provincia

T. 081 5854492 - F. 081 6582587

IMPORTATORE GNATUS [metalstoresas@libero.it](mailto:metalstoresas@libero.it)

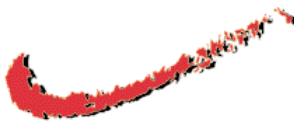

# GNATUS

La Casa brasiliana per eccellenza:  
non è l'unica,  
ma è in assoluto al mondo  
il secondo produttore di Riuniti!

## EMILIA ROMAGNA

TECNODENT FORLI' - Zone: FO, RA, RN e province

T. 0543 782804 - F. 0543788531 - [fabio-righi@libero.it](mailto:fabio-righi@libero.it)

TECNOPADANA s.r.l. PIACENZA - Zone: PC, BO, PR e province

T. 0523 591556

## TOSCANA

PICCININI ENRICO LUCCA - Zone: LU, MS e province

T.F. 0583 316411 - [piccিনিenrico1@virgilio.it](mailto:piccিনিenrico1@virgilio.it)

NUOVE FORNITURE DENTALI snc GROSSETO - Zone: FI, GR, LI, SI,

CIVITAVECCHIA e province T.F. 0564 456715

NUCCI FORNITURE DENTALI PERUGIA - Zona: AR e provincia

T.F. 075 5271113 - [nuccident@libero.it](mailto:nuccident@libero.it)

## MARCHE - ABRUZZI - MOLISE

NIBA BELLANTE (TE) - Zone: ABRUZZO: TE, CH, PE, AQ e province:

MARCHE: AP, MC, AN, PS e province T.F. 0861 611028 - [nibafd@tin.it](mailto:nibafd@tin.it)

## UMBRIA

NUCCI FORNITURE DENTALI PERUGIA - Zone: UMBRIA: PG, TR e prov;

TOSCANA: AR e provincia - LAZIO: RI, VT e provincia

T.F. 075 5271113 - [nuccident@libero.it](mailto:nuccident@libero.it)

## LAZIO

DENTALBIOLINE s.a.s. ROMA - Zone: ROMA - LT e province

T.F. 06 4110176 - [dentine@libero.it](mailto:dentine@libero.it)

NUCCI FORNITURE DENTALI PERUGIA - Zone: LAZIO: RI, VT e province

T.F. 075 5271113 - [nuccident@libero.it](mailto:nuccident@libero.it)

RITTER POINT ROMA ROMA - Zona: ROMA e provincia

T. 06 37517141 - F. 06 37350186

TECNODENTAL SCAURI (LT) - Zona: LT e provincia

T. 347 1286106

L.D.A. DENTAL s.a.s. FROSINONE - Zona: FR e provincia

T.F. 0775 870897 - [librobuono@libero.it](mailto:librobuono@libero.it)

## CAMPANIA

STARDENTAL CASERTA - Zona: CE e provincia

T. 0825 325026 - F. 0825 353656

DENTAL FUTURA GROUP s.r.l. NAPOLI - Zona: NA e provincia

T. 081 5435608

MARANTO DENTAL s.r.l. BENEVENTO - Zone: AV - BN e province

T. 0824 357037

MEDIDENTA BATTIPAGLIA (SA) - Zona: SA e provincia

T. 0828 370268 - F. 0828 370666

## PUGLIA

STELLA LEONARDO BARI - Zona: Puglia

T. 080 5564861 - F. 080 5474973 - [lestell@tin.it](mailto:lestell@tin.it)

## SICILIA

DENTAL GOLD s.r.l. PALERMO - Zone: PA e prov. - Sicilia Occidentale

T.F. 091 6887667

EMMEDENTAL TRAPANI - Zona: TP, AG e province

T. 0923 533884

PATANE' SERGIO S. GIOVANNI LA PUNTA (CT) - Zona: CT e provincia

T. 095 7413337

SCHAMEDICAL ACIREALE (CT) - Zone: CT e provincia - Sicilia Orientale

T. F. 095 7648748

SIGNORELLO SALVATORE POLIZZI GENEROSA (PA) - Zona: PA e prov;

T. F. 0921 688052

## OFFERTA PROMOZIONALE N° 1

Riunito HS, **pneumatico, così composto:**

Poltrona GL, con motore Bosch, comandi a pedale con 5 programmi, senza fissaggio al pavimento, da terra alt. min cm 45 e alt. max cm 90, conformazione anatomica, poggiatesta articolato.

Faretra a 6 piste, sistema SPRIDO, con supporti strumenti in silicone autoclavabili, con siringa a 3 vie, 2 terminali per turbina, 1 micromotore ad aria spray esterno, negatoscopio e sistema di disinfezione Biosystem.

Gruppo idrico con bacinella in ceramica facilmente autoclavabile, siringa a 3 funzioni con regolazione flusso acqua e due alloggiamenti con cannule per aspirazione chirurgica.

Lampada operatoria Persus L 20.000 lux luce fredda.

Garanzia 2 anni estensibili a 5

I.V.A., trasporto e montaggio ESCLUSI

list. Euro 7.800,00

Euro 4.900,00

## OFFERTA PROMOZIONALE N° 3

STUDIO COMPLETO **così composto:**

Riunito GNATUS mod. Syncrus HXL FULL, elettrico con:

Poltrona GLX, con motore Bosch, comandi a pedale con 7 programmi di cui 2 memorie per la programmazione di lavoro, trendelamburg, conformazione anatomica, poggiatesta articolato, senza fissaggio al pavimento, da terra alt. min. cm 45 e alt. max cm.90, con opzione secondo bracciolo e tappezzeria facilmente rimovibile grazie al sistema "easy-fix".

Faretra a 6 piste, sistema SPRIDO, con supporti strumenti in silicone autoclavabili, con siringa a 3 vie, 2 terminali per turbina a F.O., 1 micromotore spray integrato F.O e pedaliera di regolazione, 1 ablatore Satelec e 3 punte, 1 lampada a LED per fotopolimerizzazione, con negatoscopio e con tutti i comandi in un pannello centrale touchscreen per tutte le funzioni.

Sistema di disinfezione Biosystem con valvola antiritorno, per disinfezione a fine operatività, più somministrazione di soluzioni agli strumenti rotanti ed all'ablatore.

Gruppo idrico Alcance 3 T con bacinella in ceramica facilmente igienizzabile, con rotazione fino a 90° - tavoletta Assistente con siringa a tre vie e 2 terminali per aspirazione chirurgica

Garanzia 2 anni estensibili a 5

Scegliamo Gnatius mod. TOP

Radiografico endorale Gnatius TIMEX 70, pantografato, con comandi digitali, su stativo o a muro

Aspirazione chirurgica ad anello liquido Bio Vac II

Compressore a secco 2 cilindri, serbatoio 50 lt.

Autoclave Bio Clave Gnatius 12 lt. ed Imbustatrice

Serie di 4 mobili, con lavello ed elettrovalvola, servomobile, cassettera ed 1 anta

list. Euro 22.200,00

Euro 14.500,00

## OFFERTA PROMOZIONALE N° 2

Riunito HS elettrico, **così composto:**

Poltrona GL, con motore Bosch, comandi a pedale con 5 programmi, senza fissaggio al pavimento, da terra alt. min cm 45 e alt. max cm 90, conformazione anatomica, poggiatesta articolato.

Faretra a 6 piste, sistema SPRIDO, con supporti strumenti in silicone autoclavabili, con siringa a 3 vie, 2 terminali per turbina F.O., micromotore Bien Air MCLK spray integrato, negatoscopio e sistema di disinfezione Biosystem.

Gruppo idrico con bacinella in ceramica facilmente autoclavabile, siringa a 3 funzioni con regolazione flusso acqua e due alloggiamenti con cannule per aspirazione chirurgica.

Lampada operatoria Persus L 20.000 lux luce fredda

Garanzia 2 anni estensibili a 5

I.V.A., trasporto e montaggio ESCLUSI

list. Euro 10.360,00

Euro 6.900,00

## N° 4 JET SONIC PLUS

Gnatius ultrasuoni combinato 29.000 Hz. - manipolo Satelec per detartraggio, rimozione perni e corone etc., e manipolo a flusso di bicarbonato per sbiancamento

list. Euro 1.650,00

Euro 1.099,00

## N° 5 OPTILIGHT CL

Gnatius lampada multifunzionale a LED per sbiancamento (con gel di perossido di H 35%) e per fotopolimerizzazione

list. Euro 1.590,00

Euro 990,00

## N° 6 OPTILIGHT LD III

Gnatius lampada a LED per fotopolimerizzazione

list. Euro 420,00

Euro 290,00

## N° 7 AUTOCLAVE BIOCLAVE 12 L inox

Gnatius - design innovativo - elettronica

Rapida (15') - supersicura - 12 lt

list. Euro Euro 1.400,00

Euro 990,00

## N° 8 RADIOGRAFICO ENDORALE TIMEX

70 kV, 7 mA - 0,08 sec., digitale, a parete pantografato o su stativo

list. Euro 2.740,00

Euro 1.490,00

## N° 9 TURBINA GA 100

Gnatius, attacco Midwest oppure Borden, rotore di produzione U.S.A.

list. Euro 260,00

Euro 159,00

## N° 10 CONTRANGOLO GA 300

Gnatius

list. Euro 260,00

Euro 159,00.

## Congressi e Fiere in Italia

MAGGIO 2006

**04-05 Roma - RM**

**PREDICIBILITÀ DEL CARICO IMMEDIATO: FATTORI CHIAVE PER IL SUCCESSO**  
Segreteria organizzativa AISI,  
Dott.ssa Stefania Farneti  
Tel. 051.4210755 Fax 051.4213987

**04-06 Padova - PD**

**8° CONGRESSO NAZIONALE DI NEURORADIOLOGIA PEDIATRICA**  
congressi@delphiinternational.it

**04-06 Palermo - PA**

**58° CONGRESSO SCIENTIFICO NAZIONALE ANDI**  
**1° CONGRESSO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE ANDI**  
Segreteria organizzativa Andi  
Tel. 06.42011536 int. 5 www.andi.it

**04-06 Verona - VR**

**3° CONGRESSO INTERNAZIONALE ANDI VENETO**  
Andi - Tel. 06.42011536 int. 5  
www.andi.it

**06 Napoli - NA**

**CONVEGNO DELLA SEZIONE CAMPANIA**  
Segretario regionale SIE  
Prof. Massimo Amato Tel 081/642373  
maxamato@tiscalinet.it

**06 Narni - TR**

**MAXILLO ODONTOSTOMATOLOGIA PUBBLICA: FASCE PROTETTE. QUALE FUTURO?**  
Global Business Agency  
Tel. 085/4311977 info@gbacongressi.it

**06 Pisa - PI**

**CONVEGNO SICO-SIDCO: DENTE PARODONTALMENTE COMPROMESSO VS IMPIANTO**  
Segreteria SidCo - Tel. 050.992939  
f.graziani@med.unipi.it

**09 Napoli - NA**

**INFLUENZE MIOFUNZIONALI SULLO SVILUPPO FACCIALE E SULLA DENTIZIONE: UN APPROCCIO COMPLETO AL TRATTAMENTO PRECOCE DELLA MALOCCLUSIONE**  
Isasan Tel. 02.96754179  
Sig.re Mariangela e Raffaella

**10 Padova - PD**

**INFLUENZE MIOFUNZIONALI SULLO SVILUPPO FACCIALE E SULLA DENTIZIONE: UN APPROCCIO COMPLETO AL TRATTAMENTO PRECOCE DELLA MALOCCLUSIONE**  
Isasan Tel. 02.96754179  
Sig.re Mariangela e Raffaella

**11 Bologna - BO**

**INFLUENZE MIOFUNZIONALI SULLO SVI-**

**LUPPO FACCIALE E SULLA DENTIZIONE: UN APPROCCIO COMPLETO AL TRATTAMENTO PRECOCE DELLA MALOCCLUSIONE**  
Isasan Tel. 02.96754179  
Sig.re Mariangela e Raffaella

**11-13 Torino - TO**

**OSTEOLOGY 2006**  
Promo Leader Service  
Tel. 055/241131 Fax 055/2342929  
osteology.torino2006@promoleader.com  
www.osteology-torino.it

**13 Cernobbio - CO**

**1° WORKSHOP DI ECONOMIA IN ODONTOIATRIA**  
Segreteria culturale Andi  
Tel. 06.42011536 int. 5 www.andi.it

**13 Pescara - PE**

**PREVENZIONE MAXILLO ODONTOSTOMATOLOGICA DOMICILIARE**  
Global Business Agency  
Tel. 085/4311977 info@gbacongressi.it

**18-20 Rimini - RN**

**49° CONGRESSO AMICI DI BRUGG**  
Promunidi - Viale Forlanini 23, 20134  
Milano, Tel. 02.7006121,  
Fax 02.70006546

**19 Roma - RM**

**SEMINARIO DI PRIMAVERA SITEBI - TERAPIE ORTODONTICHE INUSUALI**  
AISC & AIM group - Tel. 0680968206,  
fax 0680968229

**26-27 Acqui Terme - AL**

**PATOLOGIE DI CONFINE DEL DISTRETTO CRANIO-CERVICALE**  
Cenacolo Odontostomatologico Italiano - Segreteria Nazionale  
Tel. 02/201488

**26-27 Capri - NA**

**5° CONGRESSO NAZIONALE SILO: ODONTOIATRIA LASER-ASSISTITA E CONVENZIONALE: EVIDENZE A CONFRONTO**  
Quadra Service & Management  
Tel. 0722.329797  
www.quadraservice.com

**26-27 Fuggi - FR**

**2° CONVEGNO ANDI LAZIO**  
Segreteria culturale Andi  
Tel. 06.42011536 int. 5 www.andi.it

**26-27 Fuggi - FR**

**CONGRESSO INTERNAZIONALE COI - AIOG: "LE BIOTECNOLOGIE IN CHIRURGIA ORALE ED IMPLANTARE"**  
Cen. Odont. Laziale Tel. 06/8549724

## Congressi e Fiere in Italia

GIUGNO 2006

**01-04 Napoli - NA**

**3° CONGRESSO NAZIONALE SINET LA TERAPIA PRECOCE**  
Dieffe Group  
Tel. 081.680336 Fax 081.680573

**09-10 Oristano - OR**

**DENTAL SARDINIA ANDI**  
Andi  
Tel. 06.42011536 int. 5  
www.andi.it

**24-25 Villasimius - CA**

**CLOSED MEETING (RISERVATO AI SOCI ATTIVI)**  
SIE - Tel. 02.8376799 e-mail: segreteria.sie@tin.it - www.endodonzia.it

**26 Torino - TO**

**INCONTRO CULTURALE GAO**  
Segreteria Scientifica GAO Tel.  
011.0482671; Fax 011.3855358, cell.  
347.4260402 ast.snc@tin.it

## Congressi e Fiere all'estero

MAGGIO 2006

**06-09 Las Vegas (Usa)**

**106TH AAO - AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS ANNUAL SESSION**  
**AAO - AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS ATTN: AAO SENIOR MEETINGS AND EXHIBITS MANAGER**  
401 North Lindbergh Boulevard St.  
Louis, Missouri USA 63141-7816 Tel:

+1 314 993 1700 Fax: +1 314 997  
1745 // 692 8178 www.aortho.org  
info@aortho.org

**09-12 Sofia (Bulgaria)**

**BULMEDICA - BULDENTAL, 40TH INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION**  
Contact person: Ogniana Dikova  
Tel: +359 2 9655 281

Fax: +359 2 9655 231  
odikova@bulgarreklama.com  
Website: www.bulgarreklama.com

**11-13 Ostrava (Repubblica Ceca)**

**INDENT 2006 - INTERNATIONAL DENTAL TRADE FAIR AND CONFERENCE**  
E-mail: info@indent.cz -  
www.indent.cz/eng/

**11-13 Vienna (Austria)**

**WID 2006 - INTERNATIONAL DENTAL EXHIBITION**  
Osterreichischer Dentalverband  
Eschenbachgasse 11  
A-1010 Vienna, Austria  
Tel. +43 1 587 363322  
Web-site: www.dentalverband.at  
www.wid-dental.at



## TOCKSYSTEM di TOCK G.R.

ISO 9001:2000, ISO 13485:2003


SISTEMA di gestione della QUALITÀ: PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, VENDITA ed ASSISTENZA di dispositivi medici impiantabili e non impiantabili, strumentario ed accessori per implantologia endossea in stomatologia, protesi dentale e chirurgia ossea del cranio, mascellare, maxillofaciale ed ortopedica.

**Workshops:** OSTEOESPANSIONE progressiva mediante Martelletto automatico e Scalpelli; Osteosintesi sopportata da Reti di Titanio impiantabili; Impianti dentali di Profondità e di Estensione.

Padova 15-05-2006 Dr. Piccione GP. & Tock G.R.  
Alessandria 08-06-2006 Dr. Masolini PC. & Tock G.R.

Padova 05-07-2006 Dr. Piccione GP. & Tock G.R.  
Roma 13-07-2006 Dr. Yacoub JC. & Tock G.R.

# Nuova Gamma - odident

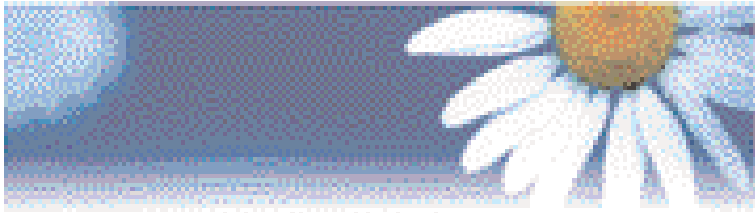

*Abbiamo imparato dalla Natura*

Dopo il lancio sul mercato di una prima gamma di sei modelli posteriori **odident**, unidensa odì presenta al professionista 19 nuovi modelli: 4 nuove forme posteriori e 15 anteriori.

**Odident** facilita la realizzazione di protesi personalizzate. Più naturali e confortevoli. È in grado di assicurare al paziente prestazioni migliori. Con qualunque tecnica o tipo di protesi, **odident** permette di creare su misura, in base al caso specifico e alle necessità di ogni paziente. Con precisione assoluta.



Gli elementi dentali posteriori **odident** sono concepiti per ottenere un'occlusione ottimale in ogni specifico caso.


Le cuspidi **odident**, ora più pronunciate, permettono al professionista di realizzare i punti di contatto necessari, dando a ogni caso una risposta personalizzata e su misura.

L'adattamento naturale delle superfici dentali fra loro, sia occlusali che laterali, riducono notevolmente le conseguenze dell'abrasione e dell'usura. L'aspetto naturale si conserva nel tempo.

La gamma di elementi dentali anteriori **odident** comprende 15 forme diverse, 10 superiori e 5 inferiori, che si armonizzano perfettamente offrendo una risposta a ogni necessità fisiologica. La gamma di elementi posteriori **odident** consta di 3 serie base (I, G e H), ognuna delle quali è disponibile in misure diverse. In totale, 10 forme diverse che permettono al professionista di affrontare qualsiasi tipo di occlusione e tecnica di montaggio.


Gli elementi sono realizzati con varie resine acriliche rinforzate che in seguito, a polimerizzazione dei monomeri che le compongono, raggiungono un elevato grado di compattezza. L'inserimento per iniezione selettiva dei vari strati in una catena automatica di stampaggio assicura l'assenza di porosità interne e una rifinitura superficiale perfetta.

Unidensa - **odì** progetta e realizza i metodi di produzione utilizzati che sono sottoposti costantemente a test e controlli di qualità, come la norma ISO 9001/93, il Certificato di Biocompatibilità (ISO TR 7405) e la Norma CEE Production Quality Assurance.

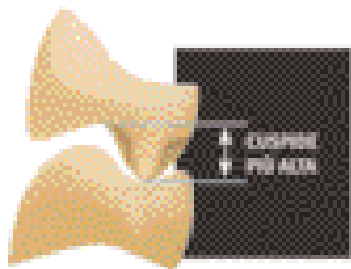

**SIMEX ITALIA**

Via Absate Olivieri, 178 - 00124 Roma - Tel. 06.5098222 Fax 06.5098198  
 account@simexitalia.it www.simexitalia.it

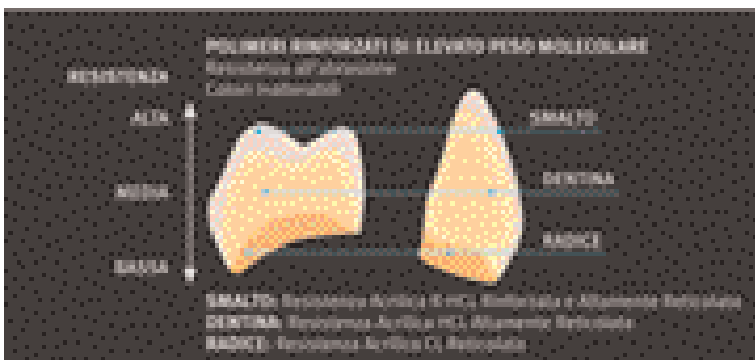

**11-14 San Antonio, Texas (Usa)**  
**136TH ANNUAL SESSION OF THE TEXAS DENTAL ASSOCIATION**  
 Texas Meeting Convention Henry B. Gonzalez Convention Ctr 200 E. Market San Antonio, Texas 78205  
 USA Tel: +1 512 443 3675 Contact: shannan@tda.org Website: www.texasmeeting.com

**12-14 Seoul (Corea)**  
**SIDEX 2006, SEOUL INTERNATIONAL DENTAL EXHIBITION & CONFERENCE 2006**  
 Sidex Organizing Committee: c/o Seoul Dental Association 81-7, Songjung-dong, Sungdong-ku Seoul 133-837, Korea Tel: +82 2 498 9142 / 9146 Fax: +82 2 498 9147  
 www.sidex.or.kr Exhibition Venue: COEX Atlantic Hall, Convention Hall

**18-20 Birmingham (Inghilterra)**  
**BRITISH DENTAL CONFERENCE & EXHIBITION 2006**  
 BDA Events team Tel: +44 20 7563 4590 Fax: +44 20 7563 4591 Elise Cole E-mail: events@bda.org Website: www.bda-events.org

**18-20 Poznan (Polonia)**  
**SALDENT 2006 - INTERNATIONAL DENTISTRY FAIR**  
 Poznan International Fair/

Miedzynarodowe Targi Poznanskie ul.Glogowska 14 60-734 Poznan, Poland Tel. +48 61 869 2552 // 2000 // 2254 Fax +48 61 869 2952 E-mail: saldnt@mtp.pl E-mail: salud@mtp.pl E-mail: mtp@pol.pl E-mail: info@mtp.pl Website: saldnt.mtp.pl/en

**24-27 Zagabria (Croazia)**  
**MEDICINE AND TECHNOLOGY 2006 - 34TH INTERNATIONAL FAIR OF MEDICINE, PHARMACY, LABORATORY AND REHABILITATION EQUIPMENT, OPTICS AND DENTISTRY**  
 Valentina Dulcic Tel: +385 1 6503 284 Tel: +385 1 6503 414 Ivanka Boric Tel: +385 1 6503 433 Fax: +385 1 6503 270 medicina@zv.hr Web site: www.zv.hr/medicina

## AVVERTENZE PER IL LETTORE:

Le informazioni relative agli eventi vengono comunicate direttamente dagli organizzatori oppure reperite attraverso fonti pubbliche. La redazione non risponde di eventuali variazioni dei dati indicati oppure di possibili errori. In caso di interesse agli eventi riportati, si consiglia di consultare l'organizzatore per la conferma dei dati e per ricevere ulteriori informazioni.

## Congressi e Fiere all'estero

### GIUGNO 2006

**07-10 Pechino (Cina)**  
**SINO-DENTAL 2006 - THE 11TH CHINA INTERNATIONAL DENTAL EQUIPMENT & AFFILIATED FACILITIES EXHIBITION**  
 International Health Exchange and Cooperation Center, Ministry of Health P.R. China Contact Person: Ms. Vivian Zhou E-mail: viviansb@hotmail.com Ms. Sunny Yin E-mail: yhsunny@hotmail.com Address: No. 1 Xizhimenwai Nanlu Beijing 100044 - P.R. China Tel +86 10 6226 1587 // 1527 // 1735 // 1802 Fax +86 10 6226 1849 Web-site: www.sinodental.cn

nboland@smithbucklin.com Website: www.scdonline.org

**20-23 San Paolo (Brasile)**  
**ODONTOBRASIL 2006**  
**"2ND INTERNATIONAL FAIR"**  
**CIODONTO 2006**  
**"2ND INTERNATIONAL CONGRESS"**  
 Communication department: Ana Jussara Leite anajussara@odontobrasil.net Daniela Dálio - daniela@odontobrasil.net Tel. +55 11 3897 6199 Fax +55 11 3897 6191 E-mail: odontobrasil@hospitalar.com.br Website: www.hospitalar.com.br Venue: Yellow Hall of Expo Center Norte

**07-10 San Pietroburgo (Russia)**  
**DENTAL SALON ST. PETERSBURG**  
 Dental Expo Ltd. Usievicha 8A 125319 Moscow -Russia Tel/Fax: +7-095 155-7900 // 7903 // 152-1540  
 Contact: Mr. Ilia Brodetski E-mail: info@dental-expo.ru E-mail: int@dental-expo.ru Website: www.dental-expo.ru

**29-01 Madrid (Spagna)**  
**EUROPERIO 2006**  
**5TH CONGRESS & EXHIBITION EUROPEAN PERIODONTOLOGY SEATRA - Executive Secretary C/ del Arte 21 - 1ª Planta 28033 Madrid**  
 Tel +34 91 535 96 17 Fax +34 91 456 08 77 Contact Person: José Gil Isabel Alonso E-mail: europerio5@seatra.org website: www.seatra.es website: www.europerio5.net

**07-11 Chicago (Usa)**  
**THE 18TH ANNUAL MEETING ON SPECIAL CARE DENTISTRY AND EXHIBITION**  
 Special Care Dentistry 2398 Pysphere Circle Chicago, Illinois 60614 USA Tel: +1 312 527 6764 Fax: +1 312 673 6663 E-mail:

## DENTISTI

## MAGGIO 2006

**ADESIVA**

Napoli - NA 05-06  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797 Cerutti Dr. A.  
**Restaurativa adesiva**

**ANESTESIA**

Padova - PD 29-31  
Odop divisione corsi Tel. 049.8751112  
**Anestesia, rianimazione e tra-  
cheostomia**  
23 crediti ECM

**ARGOMENTI VARI**

Pisa - PI 06  
Medicina Viva Tel. 0521/291314  
sico@mvcongressi.it  
**Corso di aggiornamento SICO**

**CHIRURGIA**

Milano - MI 05-06  
Promoden Tel. 0761/251248  
Barone Dr. R., Clauser Dr. R.  
**Endodonzia facile, rapida,  
ripetibile e prevedibile.**  
**È un sogno o ci siamo già?**  
In fase di accreditamento

Roma - RM 06

Cenacolo Odontostomatologico

Lazio Tel. 06/8549724

Baraglia Dr. M.

**Il ruolo del chirurgo maxillo  
facciale nell'ambito ortodonti-  
co. La chirurgia ortognatica**  
6 crediti ECM

Rimini - RN 13

SELENE srl Tel.011-56.83.534 Fax  
011-56.81.010

aikcem@seleneweb.com  
**Incontro di primavera**

Torino - TO 20

Cenacolo Odontostomatologico  
Torinese Tel. 011/734388  
Sentineri R.

**Nuova tecnica di espansione  
controllata della cresta alveola-  
re atrofica: espansori conici  
(ECPI) con osteotomia piezo-  
lettrica**  
6 crediti ECM

Milano - MI 26-27

Promoden Tel. 0761/251248

Gottarelli Prof. P.

**Corso teorico di chirurgia este-  
tica: "Ringiovanimento dei tes-  
suti periorali"**

In fase di accreditamento

**COLORE**

Sutri - VT 27  
Centro sul colore di G. Spina Tel.  
0761.600396

Spina G.

**Corso introduttivo alla teoria  
del colore**

**COMUNICAZIONE**

Milano - MI 02-13  
Cenacolo Odontostomatologico  
Milanese Tel. 02/76021188

Buzzi Dr. G.

**Corso in psicologia e tecniche di  
comunicazione**  
27 crediti ECM

Milano - MI 12-13

Promoden Tel. 0761/251248

Tosolin Prof. F.

**Comunicazione, capacità relazio-  
nali dell'odontoiatra e del perso-  
nale ausiliario**

In fase di accreditamento

**CONSERVATIVA**

Bologna - BO 05-06

Promoden Tel. 0761/251248

Vanini Dr. L.

**Corso teorico di conservativa:  
"Il restauro conservativo dei set-  
tori anteriori"**

In fase di accreditamento

Milano - MI 12

Tel. 010/5960362 Oddera M.

**Lo stato dell'arte in conservativa**  
5 crediti ECM

Milano - MI 13

Promoden Tel. 0761/251248

Cattaruzza Dr. M.

**Corso teorico di conservativa:  
"La ricostruzione preprotetica del  
dente trattato endodonticamente"**

In fase di accreditamento

Milano - MI 19-20

Promoden Tel. 0761/251248

Cattaruzza Dr. M.

**Corso avanzato di conservazione  
estetica con resine composite**  
In fase di accreditamento

Bologna - BO 26-27

Quadra service & Management Tel.

0722.329797 Brenna Dr. F.

**Conservativa**

**SINTO**  
**DENT**

**LA PRIMA E UNICA RESINA  
PER RIBASARE E REALIZZARE  
PONTI E CORONE PROVVISORIE  
CON ATTIVITÀ ANTIMICROBICA**

Potere antimicrobico, Bassa porosità,  
Contrazione e/o espansione infinitesimale,  
Adesione ai manufatti e al policarbonato 18 M.  
Pa., Adesione alle resine acetaliche 9,8 M. PA.,  
Elevata durezza ed elasticità, Temperatura critica  
intrapulpare durante la fase di polimerizzazione  
min. 36° max. 39°.

Colori disponibili: A2, A3, A3,5, B3, B4, C2, D3,  
UNIVERSAL (incisale).



Gentile concessione  
del Dott. G. Albergo

Alone di inibizione  
di crescita microbica  
periferica ad un disco  
di resina Sintodent.



**Welltrade**

SINTODENT ANTIMICROBICO ha superato tutti i test di biocompatibilità previsti dalla  
norma internazionale UNI EN ISO 10993:2004: citotossicità, irritazione e sensibilizzazione.

G. ALBERGO, E. ACCARISI, F. SAMPALMIERI, R. BEDINI, S. ANDREANA.  
Effect of Antimicrobial Ingredients on Mechanical Performance in Acrylic Resin.  
J Dent Res; 76 special ISSUE: # 2128, 1997


G. ALBERGO, R. BEDINI, P. CHISTOLINI  
Caratteristiche Meccaniche di una nuova resina acrilica: risultati preliminari.  
Estratto III° Congresso Nazionale S.I.D.O.C. Capri 05/07 Ottobre '95

G. ALBERGO, F. SAMPALMIERI, P. LILLO ODOARDI  
Osservazioni sul comportamento termico da polimerizzazione  
di alcune resine metacriliche.  
Estratto III° Congresso Nazionale S.I.D.O.C. Capri 05/07 Ottobre '95

G. ALBERGO, E. ACCARISI, F. SAMPALMIERI, R. BEDINI.  
Mechanical Performance of Some Dental Acrylic Resin.  
J Dent Res; 76 (5): # 1103, 1997

M. CAPPELLI, G. ALBERGO, L. CASOLARI, F. SAMPALMIERI, G. FURORE.  
Antibacterial Activity of a Resin: A Qualitative Study.  
J Dent Res; 77 special ISSUE B: 805, # 1389, 1998

Per saperne di più  
o conoscere il  
fornitore più vicino

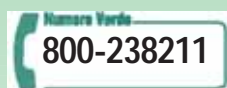

www.welltrade.it - e-mail: info@welltrade.it



Nuove soluzioni per l'odontoiatria

**SINTODENT**  
è protetto da brevetto  
internazionale



Roma - RM 26-27  
Promoden Tel. 0761/251248  
Vanini Dr. L.

**Corso teorico di conservativa: "Il restauro conservativo dei settori anteriori"**

In fase di accreditamento

Viterbo - VT 27  
Classimplant Tel. 06/8744031  
Nicastro Dr. M.

**Giornate Odontoiatriche Viterbesi 2006: "Le faccette dalla preparazione alla cementazione"**

In fase di accreditamento

**EMERGENZE**

Sesto Fiorentino - FI 11  
Cenacolo Odontostomatologico del Giglio Tel. 055/470424

**Gestione dell'emergenza cardio-respiratoria in regime extraospedaliero - procedure e protocolli operativi, carrello d'emergenza, la co 118, l'armadietto dei farmaci: norme vigenti e suggerimenti pratici - Inizio corso**

5 crediti ECM

Curno - BG 27  
Cenacolo Odontostomatologico Milanese Tel. 02/76021188  
Cazzaniga Dr. A. Di Stefano Dr. A.  
**Emergenza medica e trattamento del paziente a rischio in odontostomatologia - sedazione**

**e monitoraggio**  
8 crediti ECM

**ENDODONZIA**

Milano - MI 05-06  
Promoden Tel. 0761/251248  
Marcoli Dr. P.A.

**Endodonzia facile, rapida, ripetibile e prevedibile. È un sogno o ci siamo già?**

11 crediti ECM

Roma - RM 13  
Tel. 010/5960362  
Zerbinati M.

**Endodonzia moderna: tecniche endodontiche semplici e affidabili**

In fase di accreditamento

Milano - MI 19-20  
Quadra service & Management Tel. 0722.329797  
Gorni Dr. F.

**Endodonzia**

Due Carrare - PD 26-27  
Per informazioni:  
corsi@sandromarcoli.it  
Marcoli Dr. P.A.

**Corso base di endodonzia**

50 crediti ECM

Genova - GE 27  
Tel. 010/5960362  
Zerbinati M.

**Endodonzia moderna: tecniche**

**endodontiche semplici e affidabili**  
In fase di accreditamento

**ESTETICA**

Bologna - BO 05  
Segreteria Scientifica S.I.d.P., c/o  
Promo Leader Service  
Tel. 055.241131  
Patroni Dr. S.

**Corso Video Education - Il trattamento dell'elemento dentario gravemente compromesso nei settori estetici**

Torino - TO 11-16  
Cenacolo Odontostomatologico  
Torinese Tel. 011/734388

**Dallo studio al laboratorio: metodiche di connessione e trasferimento delle informaizoni.**

**Estetica integrale**

In fase di accreditamento

Bologna - BO 13  
Cenacolo Odontostomatologico Emiliano Bolognese  
Tel. 051/255440  
Cortesi Ardizzone Dr.ssa V.  
**Sbiancamenti: stato dell'arte. Sbiancamenti domiciliari e professionali a confronto**

7 crediti ECM

Vigevano - PD 23  
E-mail newepget@tin.it  
Spreafico Dr. R.

**Simposio di estetica e funzione con le resine composite**

Zola Predosa - BO 24  
E-mail ortensi.strocchi@tiscali.it  
Conci Dr. T.

**Estetica nella pratica quotidiana**

**FOTOGRAFIA**

Roma - RM 06  
Tel. 010/5960362  
Piacquadio C.A.  
**Corso teorico pratico di fotografia odontoiatrica**  
5 crediti ECM

**GNATOLOGIA**

Milano - MI 06  
Quadra service & Management Tel. 0722.329797  
Bodin Prof. C.  
**Gnatologia**

Bologna - BO 12-13  
Quadra service & Management Tel. 0722.329797  
Perrini Dr. N.  
**Gnatologia**

Torino - TO 23  
Cenacolo Odontostomatologico  
Torinese Tel. 011/734388  
**Disturbi a carico dell'Atm dopo "colpo di frusta" in 2 incontri (altra data: 20/06)**  
In fase di accreditamento

**SINTO DENT**

**SINTODENT ROSA UNIVERSAL  
LA PRIMA E UNICA RESINA  
PER PROTESI MOBILI  
CON ATTIVITÀ ANTIMICROBICA**

NOVITÀ!

**Versatilità di utilizzo:**

- Polimero e monomero a caldo:
  - ✓ tecnica a caldo tradizionale con muffola,
  - ✓ tecnica con forno a microonde
- Polimero e monomero a freddo:
  - ✓ per riparazioni
  - ✓ ribasature
  - ✓ resinatura selle scheletrati
  - ✓ tecnica a freddo per colata

**Individuazione del colore** eseguita su soggetti sani tramite l'uso dello spettrofotometro




SINTODENT ROSA UNIVERSALE ANTIMICROBICO ha superato tutti i test di biocompatibilità previsti dalla norma internazionale UNI EN ISO 10993:2004: citotossicità, irritazione e sensibilizzazione.

- ✓ Potere antimicrobico
- ✓ Bassa porosità
- ✓ Contrazione e/o espansione infinitesimale
- ✓ Elevata durezza ed elasticità

- ✓ Temperatura critica intrapulpare durante la fase di polimerizzazione min. 36° max 39°
- ✓ Colore rosa venata

Per saperne di più  
o conoscere il  
fornitore più vicino

www.welltrade.it - e-mail: info@welltrade.it

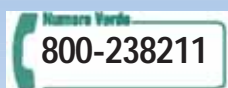

Nuove soluzioni per l'odontoiatria

**SINTODENT**  
è protetto da brevetto  
internazionale

Belluno - BL 26  
info@dalpont.it  
Dal Pont Dr. B., Perroni Dr. R.  
**Terapia delle disfunzioni  
cranio mandibolari**  
31 crediti ECM

**IMPIANTI**  
Firenze - FI 06  
E-mail stefano.corrado@inwind.it  
**Impianti post-estrattivi a carico  
immediato: come soddisfare le  
richieste del paziente senza  
deluderlo**

Genova - GE 27  
Cenacolo Odontostomatologico  
Ligure Tel. 019/811118  
Scaringi Dr. R.  
**Carico immediato e mini impianti**  
5 crediti ECM

**IMPLANTOLOGIA**  
Milano - MI 05  
Cenacolo Odontostomatologico  
Milanese Tel. 02/76021188  
Borioli A., Sigurtà D., Terzitta G.  
**Il paziente implantare: selezione,  
trattamento e gestione delle  
eventuali complicanze**  
In fase di accreditamento

Bologna - BO 05-06  
Quadra service & Management Tel.  
0722.329797

Longoni Dr. S.  
**Implantologia**

Firenze - FI 05-06  
Cen. Odont. del Giglio  
Tel. 055/470424 Frosecchi M.  
**Corso pratico finalizzato allo  
sviluppo continuo professionale  
in 2 incontri (altre date: 26-  
27/05)**  
35 crediti ECM

Buccinasco - MI 06  
Tel. 02/45773274  
Ciribelli Dr. P.R., Nesler Dr. P.  
**Corso base teorico-pratico d'im-  
plantologia**  
7 crediti ECM  
Genova - GE 06  
Tel. 010/5960362  
Laghissa G.C., Macenga F.  
**Implantologia: marketing e  
management per lo studio odon-  
toiatrico**  
In fase di accreditamento

Roma - RM 06  
E-mail luigi.piccolo@libero.it  
Figluzzi Prof. M.  
**Corso di parodontologia in  
implantologia**

Roma - RM 06  
E-mail newepget@tin.it  
Aglardi Dr. E.

**Corso di implantologia avanzata  
e novità implantari**

Milano - MI 20  
Quadra service & Management Tel.  
0722.329797  
Chierico Dr. A.  
**Implantologia**

**IMPLANTOPROTESI**  
Bologna - BO 27  
Cenacolo Odontostomatologico  
Emiliano Bolognese Tel. 051/255440  
**Corso di implantoprotesi**  
In fase di accreditamento

**KINESIOGRAFIA**  
San Benedetto del Tronto - AP 25-27  
Futura, Tel. 0735/781520  
Cattaneo Dr. R.  
**Elettromiografia di superficie,  
kinesiografia computerizzata,  
t.e.n.s. per uso odontoiatrico,  
riequilibratore oclusale  
neuro mio posturale  
(r.o.n.m.p.)**  
30 crediti ECM

**MEDICINA ALTERNATIVA**  
Pordenone - PN 13  
E-mail laurapitt@tiscali.it  
Poletto Dr. D.  
**La medicina tradizionale cine-  
se come supporto nella pratica  
odontoiatrica quotidiana**

**ODONTOSTOMATOLOGIA**

Roma - RM 20  
Global Business Agency  
Tel. 085/4311977  
Palazzo Dr. V., Sileo Dr. A.,  
Stanzione Dr. M.  
**Prevenzione, formazione e  
cura domiciliare per le malat-  
tie della bocca nei pazienti  
appartenenti ai ceti deboli e  
particolarmente vulnerabili  
tramite le odontoambulanze**

Roma - RM 26-27  
Global Business Agency  
Tel. 085/4311977  
Marasc Dr. R., Venezia Dr. A.  
**Tecnologie avanzate in maxillo  
odontostomatologia: laser,  
ultrasuoni, microscopia**

**ORTODONZIA**  
Roma - RM 12-13  
Wilocs Tel. 06/52310442 int. 90  
Guerra Dr. M.  
**Inizio corso base di ortodonzia  
in 3 incontri (altre date: 26-  
27/05 - 9-10/06)**  
40 crediti ECM

Padova - PD 15-17  
Odop divisione corsi Tel.  
049.8751112  
**Ortodonzia livello II**  
24 crediti ECM

# FORNILIMPLANT

POST ESTRATTIVI E A INTEGRAZIONE

**NOVITA' Mini IMPIANTO**  
Ø2,3 e Ø2,8

€ 38

MONOFASICO TI 4  
PER CARICO IMMEDIATO  
CON MONCONE FRESABILE  
MONCONE A PALLINA

ETCHED  
Sand-blasting  
Corundum

€ 75

Titanium  
Plasma-Sprayed

€ 95



**Trousse completa € 680**

L'unico assicurato RC professionale fino a € 500.000,00

AXA assicurazioni 370842-20123 (MI) Italy

**FORNILIMPLANT CE 0426**

SEDE LEGALE P.zza Matteotti, 11 25015 Desenzano del Garda (BS)

Tel. +39 0309914049 Fax +39 0309120225

www.Fornilimplant.com E-mail info@fornilimplant.com

REQUISITI 93/42/CEE N° 0426 Azienda accreditata EN ISO 9001

**VARIE OFFERTE**

**PERSONALIZZABILI**

Pagabili in 12 mesi a tasso 0%

Possibilità comodato d'uso

Potrete inserire i nostri impianti senza

cambiare il vostro kit e le vostre abitudini...

Per INFO: +39 0309914049

Ovigli - AL 26-27  
Cenacolo Odontostomatologico  
Torinese Tel. 011/734388  
**Occlusione e postura: ortodonzia clinica e tecnica nel terzo millennio**  
In fase di accreditamento

**PARODONTOLOGIA**

Bologna - BO 05  
Promo Leader Service  
Tel. 055.241131 *Patroni S.*  
**Il trattamento dell'elemento dentario gravemente compromesso nei settori estetici**

Roma - RM 05  
AIO ROMA Dr. Marino 338/5413770  
*Figliuzzi Prof. M.*  
**Corso di parodontologia in implantologia**  
In fase di accreditamento

Milano - MI 24-25  
Promoden Tel. 0761/251248  
*Cortellini Dr. P.*  
**Corso pratico di parodontologia: "I lembi parodontali e le metodiche di sutura" - 2° gruppo**  
In fase di accreditamento

Bologna - BO 26  
E-mail ortensi.strocchi@tiscali.it  
**Innovazioni in terapia parodontale chirurgica e non chirurgica**

Milano - MI 26-27  
Promoden Tel. 0761/251248  
*Cortellini Dr. P.*  
**Corso pratico di parodontologia: "I lembi parodontali e le metodiche di sutura" - 1° gruppo**  
In fase di accreditamento

**POSTURA**

Padova - PD 19-21  
Segreteria AIROP, Tel. e Fax 06.97749899/900, e-mail  
*Aimone Dr.ssa C.*  
**Rieducazione del distretto cranio-sacrale, fasciale e podalico**  
crediti ECM

Padova - PD 19-21  
Segreteria AIROP, Tel. e Fax 06.97749899/900  
*Zavarella Dr. P.*  
**Posturologia: biotipologia, costituzioni e catene muscolo-aponeurotiche**  
crediti ECM

**PREVENZIONE**

Bologna - BO 06  
Cenacolo Odontostomatologico  
Emiliano Bolognese Tel. 051/255440  
*Baraglia Dr. M.*  
**Corso sulla prevenzione delle malattie dentarie e delle malattie infettive ad esse correlate**

Bologna - BO 13  
Cenacolo Odontostomatologico  
Emiliano Bolognese Tel. 051/255440  
*Checchi L., Montevicchi M., Piana G., Felice P., Castaldo P.*  
**La prevenzione orale a 360°**  
In fase di accreditamento

**PRONTO SOCCORSO**

Sesto Fiorentino - FI 11-15  
Cenacolo Odontostomatologico del Giglio Tel. 055/470424  
*Veneri F.*  
**Incontri di pronto soccorso per odontoiatri, medici e personale ausiliario**  
In fase di accreditamento

**PROTESI**

Milano - MI 05-06  
Promoden Tel. 0761/251248

*Castellani Dr. D.*  
**Corso pratico di protesi fissa in 3 incontri**  
(altre date: 16-17/06 - 07-08/07)  
In fase di accreditamento

Milano - MI 18-19  
Promoden Tel. 0761/251248  
*Ravasini Dr. G., Ravasini Dr. F.*  
**Corso pratico di protesi: "Dall'intarsio alla corona... come risparmiare materiale dentale"**  
In fase di accreditamento

Milano - MI 19-20  
Promoden Tel. 0761/251248  
*Marino Prof. G., Marino Dr. A., Smorto Dr. F.*  
**Corso teorico di Protesi totale e protesi totale su impianti**  
In fase di accreditamento

Milano - MI 26  
Cenacolo Odontostomatologico  
Milanese Tel. 02/76021188  
*Fabris R., Paoli M.*  
**Soluzioni e tecniche nella protesi su impianti**  
In fase di accreditamento

**S.A.M.DENT s.u.r.l.**  
di Stefano Marchetti

Aut. Reg. n° D0617 del 18/02/05

Forniture Dentali

OGNA  
Laboratori FarmaceuticiDEMETRON  
KERR

MAJOR

DENSPLY

mectron  
MEDICAL TECHNOLOGY

3M ESPE

PUNTO VENDITA  
AUTORIZZATO EURODENT

Via I. Versari, 74 - 00128 Roma (Eur - Spinaceto) - Tel./Fax 06.50781064 e-mail: samdent@libero.it - www.samdent.it

**SCUOLA ANDILATIUM**CORSI MASTER per ASSISTENTI  
di studio odontoiatrico

&lt;&lt; MASTER GLOBALE &gt;&gt;

Ortodonzia (*Grippaudo*)Emergenze nello studio=diploma B.L.S.D. (*Trevisan - Grimaldi*)Conservativa ed endodonzia (*Kaitsas - Malentacca*)Prevenzione delle infezioni (*Marcoaldi - Salvati*)Chirurgia Stomatologica e Parodontale  
(*Bellardini - Grimaldi - Verrocchi*)CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER ASSISTENTI  
DI STUDIO ODONTOIATRICOI corsi a numero chiuso di 70 iscritti inizieranno in Roma  
Sabato 27 maggio 2006 presso l'Istituto "Seraphicum"  
ed avranno la durata di una giornata ciascunoPer ogni ulteriore informazione telefonare a  
Scuola Andi Latium - Tel. 0761.324995  
lunedì e mercoledì: 16,30-18,30 martedì e giovedì: 9,30-11,30

Blen Air  
SWITZERLAND

INFODENT 4/2006 - 22

## AGENDA - CORSI

**Arona - NO 27**  
Cen. Odont. Novarese Tel.  
0322/45753  
*Russo A., Levratto F., Casartelli I.*  
**Considerazioni  
multidisciplinari in protesi  
fissa su denti naturali ed  
impianti**  
*In fase di accreditamento*

**PROTESI FISSA**  
*Milano - MI 05-06*  
Promoden Tel. 0761/251248  
*Castellani Dr. D.*

**Inizio corso pratico  
di protesi fissa  
(altre date: 16-17/06 - 07-08/07)**  
*Milano - MI 26-27*  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
*Giannetti Dr. P.*  
**Conservativa e Protesi fissa**

**PSICOLOGIA**  
*Roma - RM 06-07*  
Earth - Tel. 328/6146431  
*Bruno Dr.ssa T., Spicacci*

*Minervini Dr. S.*  
**Programmazione  
neurolinguistica e comunicazio-  
ne. Primo livello: Technician**  
**Primo modulo:  
alla scoperta di sé**  
50 crediti ECM

**RESTAURI**  
*Milano - MI 13*  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
*Favatà Dr. M.*  
**Restaurativa**

## DENTISTI

### GIUGNO 2006

**ANATOMIA**  
*Milano - MI 16*  
Cenacolo Odontostomatologico  
Milanese Tel. 02/76021188  
*Salvatore G.*  
**Corso di Anatomia chirurgica  
dissettiva: tecniche d'incisione,  
rapporti anatomici**  
*In fase di accreditamento*

**ANESTESIA**  
*Bologna - BO 17*  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
*Miegge Dr. C.*  
**Anestesia e rianimazione**

**CHIRURGIA**  
*Palermo - PA 08-10*  
Biba Congressi  
Tel. 091.527416  
*Solazzo Dr.*  
**La chirurgia preprotetica nelle  
atrofie e nei difetti ossei  
mascellari**

*Milano - MI 09*  
Promoden  
Tel. 0761/251248  
*Vercellotti Dr. T.*  
**Chirurgia piezoelettrica**  
*Roma - RM 09-10*  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
*Tonelli Dr. P.*  
**Chirurgia**

*Padova - PD 14-16*  
Odop divisione corsi  
Tel. 049.8751112  
**Chirurgia degli inclusi  
e chirurgia endodontica**  
24 crediti ECM

*Milano - MI 16*  
Promoden  
Tel. 0761/251248  
*Clauser Dr. C.*  
**Asportazione chirurgica  
di terzi molari inferiori**

*Marostica - VI 17*  
Tel. 02.45773274

*Givani A., Bozzi L.*  
**La chirurgia avanzata delle  
creste atrofiche**  
*In fase di accreditamento*

*Milano - MI 17*  
Promoden  
Tel. 0761/251248  
*Barone Dr. R.*  
**Chirurgia orale: tecniche  
operative di base**

**COMPOSITI**  
*Viterbo - VT 24*  
Dentex Italia  
Tel. 0761/223352-53  
D'Arcangelo Prof. C.  
**Giornate Odontoiatriche  
Viterbesi 2006:  
"Attualità nell'utilizzo dei  
compositi"**  
*In fase di accreditamento*

**CONSERVATIVA**  
*Milano - MI 09*  
Promoden  
Tel. 0761/251248  
*Cattaruzza Dr. M.*  
**Corso avanzato di  
stratificazione estetica  
con resine composite**  
*Roma - RM 09-10*  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
*Cosimi Dr. F.*  
**Conservativa**

*Milano - MI 16-17*  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
*Mangani Prof. F.*  
**Conservativa**

*Castenaso - BO 17*  
Coi-Aiog Tel. 02.201488  
*Veneziani M.*  
**La moderna conservativa dei  
settori posteriori: restauri  
adesivi degli elementi vitali**  
*In fase di accreditamento*

*Milano - MI 30-01*  
Promoden  
Tel. 0761/251248

*Vanini Dr. L.*  
**Corso teorico-pratico sui  
restauri diretti in composito  
nei settori anteriori secondo  
la tecnica del Dr. Vanini**

**ENDODONZIA**  
*Milano - MI 02-03*  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
*Perrini Dr. N.*  
**Endodonzia**

*Padova - PD 06-08*  
Odop divisione corsi  
Tel. 049.8751112  
**Endodonzia e radiologia**  
23 crediti ECM

*Due Carrare - PD 09-10*  
P.A. Marcoli  
Tel. 030/47050  
e-mail: corsi@sandromarcoli.it  
www.sandromarcoli.it  
*Marcoli Dr. P.A.*  
**Corso base di endodonzia  
1° incontro.**  
Incontri successivi 15-16/9 -  
20-21/10 - 01-02/12  
50 crediti ECM

*Milano - MI 30*  
Promoden Tel. 0761/251248  
*Marcoli Dr. P.A.*  
**Preparazione canalare  
con la tecnica simultanea  
ed otturazione con l'onda  
continua di condensazione**

**ESTETICA**  
*Padova - PD 10*  
B&C Organizzazione Eventi  
Tel. 0761.393939  
*Trainotti Dr. C.*  
**Correzione estetica del viso con  
l'uso dei filler come semplice  
strumento di completamento  
dell'opera dell'odontoiatra**  
*In fase di accreditamento*

**GESTIONE**  
*Napoli - NA 24*  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797



Maggiore durata grazie ai cuscinetti  
a sfere in ceramica,  
un rendimento superiore che  
consente di aumentare ulteriormente  
la coppia, ottimizzando il grado  
di silenziosità.

Per maggiori informazioni: [www.boral.com](http://www.boral.com)  
Boral Air Italia s.r.l. (Sesto S. Giovanni, Lugano)  
Via Sesto 3 e 100100 Milano  
Tel. (02) 84 02 12 13-14-15-16 - Fax (02) 84 02 12 13  
bo-@boral.com

Bortolini Dr. P.  
Gestione studio

#### GNATOLOGIA

Zola Predosa - BO 07  
E-mail ortensi.strocchi@tiscali.it  
Vari

**La riabilitazione orale  
gnatologica: limiti e valore  
della registrazione  
pantografica oggi**

Bologna - BO 09-10  
info@agnatologia.it  
**Corso di aggiornamento  
gnatologico**

Milano - MI 16-17  
Promoden Tel. 0761/251248  
Pisa Dr. W.

**L'ATM nella pratica quotidiana.  
Anatomia, fisiologia, patologia,  
clinica**

#### IMPLANTOLOGIA

Alessandria - AL 08  
Tocksystem Tel. 031.280301  
Masolini Dr. P.C., Tock G.R.  
**Osteoespansione e osteosintesi,  
scalpellini e reti di titanio**

Sesto Fiorentino - FI 09  
Cenacolo Odontostomatologico  
del Giglio Tel. 055/470424

**Attuali orientamenti in implan-  
tologia osteointegrata: fase  
unica chirurgica, platform swit-  
ching, carico immediato  
In fase di accreditamento**

Milano - MI 09-10  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
Patroni Dr. S.  
**Implantologia**

Milano - MI 17  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
Corrente Dr. G.  
**Implantologia**

Padova - PD 26-28  
Odop divisione corsi  
Tel. 049.8751112  
**Implantologia avanzata e rialzo  
del seno (livello II)  
26 crediti ECM**

#### IMPLANTOPROTESI

Buccinasco - MI 09-10

Cenacolo Odontostomatologico  
Milanese  
Tel. 02/76021188

**Trattamento implantolo-  
protesico ambulatoriale.  
Corso base annuale  
teorico-pratico.  
10 Incontri -  
5° - 6° incontro  
7 crediti ECM**

#### LASER

Milano - MI 16  
Istituto Stomatologico Italiano Doc  
Medica srl  
Rosanna Milia  
Numero verde 800.118822  
Fax verde 800.239131 -  
e-mail: doc.medica@docmedica.it  
Crippa R.  
**Corso pratiche sulle tecniche  
di utilizzo delle apparecchiature  
laser in campo dentale  
4 crediti ECM**

#### KINESIOGRAFIA

Cinisello Balsamo - MI 09-10  
SELENE srl  
Tel. 011-56.83.534  
Fax 011-56.81.010

aicecm@seleneweb.com  
Vari

**Corso pratico di kinesiografia  
In fase di accreditamento**

#### ODONTOIATRIA

Roma - RM 23-24  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
Olivi Dr. R.  
**Odontoiatria infantile**

#### ODONTOSTOMATOLOGIA



Torino - TO 09-10  
Global Business Agency  
Tel. 085/431977  
e-mail info@gbacongressi.it  
Marasc Dr. R.,  
Venezia Dr. A.  
**La maxillo odontostomatologia  
essenziale**

Ponza - LT 21-24  
Global Business Agency  
Tel. 085/431977  
e-mail info@gbacongressi.it  
Orefici Dr. M.,  
Vergnani Dr. M.,  
Mastroianni Dr. L.  
**La stomatologia**

**Dent up**  
nuove tecnologie dentali  
**I nostri servizi**  
Laser  
Elettroerosione  
Metal-Ceramica  
Metal-Free  
Ceramica integrale  
Titanio-Calvanotecnica

Laboratorio odontotecnico - Via Melro Centro Artigianale L'Arco mod. 30 04100 Latina Telefono : 0773 663444 Web : WWW.DENTUP.IT Email : info@dentup.it

### Centro fresaggio CAD-CAM sistemica KaVo Everest\*

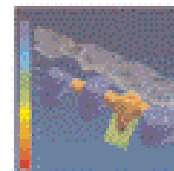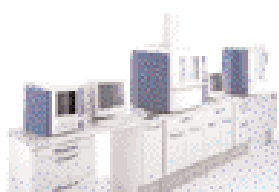

La precisione, la biocompatibilità, l'estetica  
**PENSATE PER VOI**

Contattateci per maggiori dettagli e per ricevere il materiale informativo GRATIS

L'Arco mod. 30 04100 Latina Telefono : 0773 663444 Web : WWW.DENTUP.IT Email : info@dentup.it

**INFOSTUDIO**

Progetto Studio Odontoiatrico



## Infostudio

### PROGETTO STUDIO ODONTOIATRICO

Software innovativo, completo e flessibile di gestione automatica dello studio

"Quando nel 2000 è iniziato lo sviluppo di **INFOSTUDIO** uno degli obiettivi principali del gruppo di lavoro è stato quello di ideare e progettare un sistema informativo che potesse permettere al medico dentista odontoiatra l'utilizzo di strumenti validi per ottimizzare al meglio la gestione del proprio lavoro: uno strumento in grado di ridurre al minimo il peso di tutte quelle attività che comunque, ed in ogni caso, devono essere effettuate in uno studio odontoiatrico: ricerche, calcoli, scritture, annotazioni, attività che possono provocare tempi di attesa lunghi, errori, dimenticanze, ripetitività di azioni, utilizzo di supporti cartacei (e quindi spazio). Insomma annientamento delle inefficienze (e dei costi) per concentrare il più possibile il lavoro intellettuale all'attività principale: quella del dentista. Dal 2001 anno di partenza in produzione, **INFOSTUDIO** è cresciuto in maniera esponenziale tanto che oggi siamo in grado di confermare la sua piena completezza, flessibilità, sicurezza e facilità d'uso. Ma non è tutto. **INFOSTUDIO** è sempre in evoluzione e si arricchisce continuamente di nuove funzionalità e nuove idee perché il nostro compito rimane sempre quello: fare tutto, subito e senza errori ma soprattutto ottimizzare le risorse per lavorare meglio ed essere sempre al passo con i tempi".



Amedeo  
Di Benedetto  
Product Manager

CONSIGLIATO  
E DISTRIBUITO DA:



CONTROLLA  
LE OFFERTE  
SU INTERNET

Infostudio è composto da 130 tabelle di access, 160 maschere video, 80 report di stampa!

**TecnoMobile**

Via Trieste, 15/e  
00040 - Ardea (Rm)


tel. 06-91498233  
www.tecnomobile.net



5.500

pedana stabilometrica  
tomografo

9.800

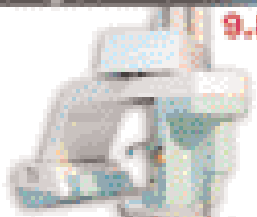

tomografo digitale

20.900




radiologia digitale

6.300

galbiati


70 SUCCESSFUL YEARS  
IN THE WORLD

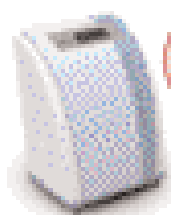

NEW

1.950

dentazione  
Sistema ad ozono  
per la sterilizzazione  
dell'acqua

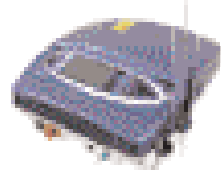

15.800

laser 30w

\*Costo complessivo della sterilizzazione

Valutata\* ultima sterilità  
trasporto e installazione esclusi

Compera oggi  
PAGHI DA SETTEMBRE 2006\*

EXPO DI PRIMAVERA Roma  
5-8 Aprile 2006 Salone A - stand 82


LUX  
easy +  
contangolo  
11.700



FOX  
plus +  
contangolo  
10.400



SMART  
easy +  
contangolo  
8.500

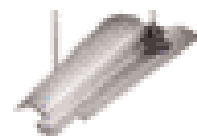


700

lampada fly light



1.500

serie di mobili

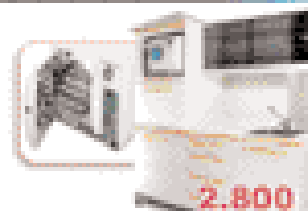


2.800

linea di sterilizzazioni

con autoclave  
e sigillatore

6.650

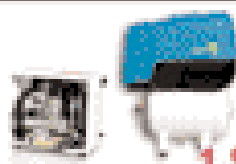

1.950

compressore e aspiratore



2.500

micromotore implantologia



1.800

telecamera



4.500

RA videoradiografia



siggolini

Plus 950

F4 450

Easy 320

**ORTODONZIA**

*Siena - SI 09*  
SIDO - doldo@unisi.it  
www.sido.it

**Deficit trasversale mascellare: basi biologiche e terapia. Uso degli espansori**

*Bari - BA 09-10*  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
Galassini Dr. G.  
**Ortodonzia**

*Torino - TO 09-10*  
Cenacolo Odontostomatologico  
Torinese Tel. 011/734388  
D'Angeli G., Bracco P.  
**La rosa dei venti: classificazione delle malocclusioni**  
*In fase di accreditamento*

*Roma - RM 16-17*  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
Capurso Dr. U.  
**Ortodonzia e ATM**

*Chieti - CH 17*  
SIDO - m.dattilio@unich.it  
www.sido.it  
**Le problematiche sagittali in ortodonzia**

*Milano - MI 17-18*  
Promoden Tel. 0761/251248  
La Luce Dr. M.  
**Inizio corso pratico: "La nuova ortodonzia: le terapie rapide" in 4 incontri - 3° incontro**  
50 crediti ECM

*Padova - PD 19-21*  
Odop divisione corsi  
Tel. 049.8751112  
**Ortodonzia livello IV**  
24 crediti ECM

*Padova - PD 21-23*  
Odop divisione corsi  
Tel. 049.8751112  
**Ortodonzia livello V**  
24 crediti ECM

*Torino - TO 22-25*  
Cenacolo Odontostomatologico  
Torinese  
Tel. 011.734388  
**Gruppo italiano di studio e aggiornamento arco piatto 2ª parte**  
*In fase di accreditamento*

*Bologna - BO 23-24*  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
Cortesi Dr. R.  
**Ortodonzia**

*Cagliari - CA 23-25*  
Segreteria SIOB  
Tel. 095313448  
Fax 095313448  
segreteria@siob.it

*Gugino Dr. C., Piras Prof. V.*  
**Corso di perfezionamento in Ortodonzia Bioprogressiva Zerobase - 1° incontro**

*Cagliari - CA 24*  
SIDO  
umberto.giganti@tiscali.it  
www.sido.it  
**Biomeccanica e novità nei materiali ortodontici ed applicazioni cliniche**

*Padova - PD 8-11*  
Segreteria AIROP,  
Tel. e Fax 06.97749899/900,  
e-mail info@airop.it  
Vari  
**Corso teorico pratico di ortodonzia funzionale di base: Bionator, Frankel, Planas, Bite D.R.O.P.**  
23 crediti ECM

**ORTOGNATODONZIA**

*Padova - PD 23*  
SIDO - lorenzo.favero@unipd.it  
www.sido.it  
**Sviluppo e crescita cranio facciale normale e patologica: principi di terapia funzionale**

**PARODONTOLOGIA**

*Ferrara - FE 09*  
Università degli Studi di Ferrara  
Consorzio Ferrara Ricerche  
Tel. 0532.762404 - Fax 0532.767347  
**Corso di aggiornamento: valutazione e gestione del rischio parodontale**  
crediti ECM

*Milano - MI 16-17*  
Promoden  
Tel. 0761/251248  
De Sanctis Prof. M.,  
Zucchelli Prof. G.  
**La gestione dei tessuti molli in chirurgia parodontale**

**POSTURA**

*Roma - RM 09-11*  
Segreteria AIROP,  
Tel. e Fax 06.97749899/900,  
e-mail info@airop.it  
Aimone Dr.ssa C.  
**Valutazione Metabolica ed Intolleranze da Alimenti e Tossici**  
crediti ECM

*Roma - RM 09-11*  
Segreteria AIROP,  
Tel. e Fax 06.97749899/900,  
e-mail info@airop.it  
Militello Dr.ssa F.  
**Introduzione alla dinamica Somato-Emozionale in posturologia**  
crediti ECM

*Roma - RM 09-11*  
Segreteria AIROP,  
Tel. e Fax 06.97749899/900,  
e-mail info@airop.it

*Zavarella Dr. P. e Vari*  
**Revisione ed integrazione sistemica in posturologia**  
crediti ECM

*Taranto - TA 10-12*  
Segreteria AIROP,  
Tel. e Fax 06.97749899/900,  
e-mail info@airop.it  
Zavarella Dr. P.  
**Posturologia clinica integrata di base: analisi e valutazione**  
17 crediti ECM

*Padova - PD 17*  
Segreteria AIROP,  
Tel. e Fax 06.97749899/900,  
e-mail info@airop.it  
Vari  
**I disturbi dell'ATM: bite come e quando**  
2 crediti ECM

*Taranto - TA 23-25*  
Segreteria AIROP,  
Tel. e Fax 06.97749899/900,  
e-mail info@airop.it  
Asmone Dr.ssa C.  
**Valutazione Metabolica ed Intolleranze da Alimenti e Tossici**  
18 crediti ECM

*Taranto - TA 23-25*  
Segreteria AIROP,  
Tel. e Fax 06.97749899/900,  
e-mail info@airop.it  
Militello Dr.ssa F.  
**Introduzione alla dinamica Somato-Emozionale in posturologia**  
crediti ECM

*Taranto - TA 23-25*  
Segreteria AIROP, Tel. e Fax 06.97749899/900, info@airop.it  
Zavarella Dr. P. e Vari  
**Revisione e integrazione sistemica in posturologia**  
crediti ECM

**PROTESI**  
*Milano - MI 09-10*  
Promoden  
Tel. 0761/251248  
Gracis Dr. S.  
**Protesi fissa. Dalla preparazione dei denti alla presa dell'impronta**

*Milano - MI 09-10*  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
Pradella Dr. S.  
**Protesi metal free**

**PROTESI FISSA**  
*Milano - MI 29-30*  
Quadra service & Management  
Tel. 0722.329797  
Gracis Dr. S.  
**Protesi fissa**

**PSICOLOGIA**  
*Roma - RM 10-11*



**Micromotori e Fresatori**



V5



V8g



CC3



**Innovazioni per una qualità superiore**



MARIOTTI & C  
via Seganti 73 - 47100 Forlì ITALY  
tel. +39 0543 474105 - fax +39 0543 781811  
info@mariotti-italy.com - www.mariotti-italy.com

NOVITÀ



# APEX MASTER

- ➔ LOCALIZZATORE APICALE
- ➔ COMPLETAMENTE AUTOMATICO
- ➔ COMPATTO, PRECISO, SEMPLICE

- ➔ Visualizzatore a led lamini indicano la progressione della linea all'interno del canale.
- ➔ Riduzione reale della misura tra 1-0 mm all'apice.
- ➔ L'apparecchio non necessita di alcuna regolazione o calibratura.
- ➔ Unico tasto per accensione e spegnimento.
- ➔ Durante la progressione all'interno del canale il segnale acustico è interattivo in posizioni dell'ultimo mm all'apice: al superamento del quale il segnale diventa fisso. (Possibilità di arresto in presenza di vuoto di irriganti o di ricostruzione del dente in amalgama).
- ➔ Funzionamento a batteria (circa 4 mesi di autonomia).
- ➔ Piccolo, veloce, di facile utilizzo - 160 gr. di peso.

**EMS**  
ELECTRO-MEDICAL SYSTEMS

EMS Italia S.p.A.  
Via Paravelli, 3/B - I-20149 Milano  
Tel. +39 02 34 53 40 11 - Fax +39 02 34 53 27 78  
E-mail: dental@ems-italia.it - www.ems-italia.com

**EARTH**  
European Agency for Relationship and Training Holistic  
Tel. 328.6146431  
Fax 06 3319342  
e-mail: paola.mei@libero.it  
*Bruno Dr.ssa T.,  
Spicacci Minervini Dr. S.*  
**Programmazione  
Neurolinguistica  
& comunicazione  
Primo livello:  
Technician - Secondo Modulo:  
Il mondo e le sue sfaccettature  
50 crediti ECM**

**RESTAURI**  
*Scafati - SA 16*  
B&C Organizzazione Eventi  
Tel. 0761.393939

*Cosimi Dr. F.,  
Vichi Dr. A.*  
**Corso teorico-pratico:  
I restauri estetici nella  
pratica quotidiana**  
*In fase di accreditamento*

**RIABILITAZIONE**  
*S. Caterina dello Jonio - CZ 16*  
B&C Organizzazione Eventi  
Tel. 0761.393939  
*Cosimi Dr. F.,  
Vichi Dr. A.*  
**1° Memorial  
Dr. Saverio De Filippo  
La riabilitazione  
parodontale, protesica  
ed implantare del paziente  
odontoiatrico**  
*In fase di accreditamento*

## ODONTOTECNICI

### MAGGIO 2006

**COLORE**  
*Sutri - VT 19-20*  
Centro sul colore di G. Spina  
Tel. 0761/600396  
*Spina G.*  
**Corso master sul colore  
(pratico)**

*Sutri - VT 27*  
Centro sul colore di G. Spina  
Tel. 0761.600396  
*Spina G.*  
**Corso introduttivo alla teoria  
del colore**

**ESTETICA**  
*Torino - TO 11-16*  
Cenacolo Odontostomatologico  
Torinese Tel. 011/734388  
**Dallo studio al laboratorio:  
metodiche di connessione e tra-  
sferimento delle informazioni.  
Estetica integrale**  
*In fase di accreditamento*

*Torino - TO 25-30*  
Cenacolo Odontostomatologico  
Torinese Tel. 011/734388

**Soluzioni estetiche su impianti**  
*In fase di accreditamento*

**KINESIOGRAFIA**  
*San Benedetto del Tronto - AP  
25-27*  
Futura, Tel. 0735/781520  
fax 0735/781521 - www.iapnor.org  
e-mail: iapnor@iapnor.org  
*Fiara Sig. R.*  
**Elettromiografia di superficie,  
kinesiografia computerizzata,  
t.e.n.s. per uso odontoiatrico,  
riequilibratore occlusale neuro  
mio posturale (r.o.n.m.p.)**  
*30 crediti ECM*

**PROTESI**  
*Firenze - FI 13*  
Cenacolo Odontostomatologico del  
Giglio  
Tel. 055/470424  
*Mariotti S.*  
**Dall'anatomia coronale al  
protocollo operativo per il  
successo nelle ricostruzioni  
protesiche**  
*2 crediti ECM*

## IGIENISTI, ASSISTENTI E PERSONALE AUSILIARIO

### MAGGIO 2006

**PARODONTOLOGIA**  
*Roma - RM 26-27*  
Unid  
Dr.ssa Daniela Olivieri  
Tel. 339.3042987  
**La moderna terapia della  
parodontite**  
*In fase di accreditamento*

**PRONTO SOCCORSO**  
*Sesto Fiorentino - FI 11-15*  
Cenacolo Odontostomatologico  
del Giglio  
Tel. 055/470424 *Venerri F.*

**Incontri di pronto soccorso per  
odontoiatri, medici e personale  
ausiliario**  
*In fase di accreditamento*

**STERILIZZAZIONE**  
*Milano - MI 13*  
Promoden Tel. 0761/251248  
*Genovesi Sig.ra A.*  
**Corso per personale ausiliario:  
"Sterilizzazione e disinfezione  
di alto livello nello studio odon-  
toiatrico secondo le più recenti  
normative europee"**

## ODONTOTECNICI

## GIUGNO 2006

**COLORE**

Sutri - VT 17

Centro sul colore di G. Spina  
Tel. 0761/600396

Spina G.

**Corso sul colore e forma in  
protesi totale (teorico-pratico)**

Sutri - VT 24

Centro sul colore di G. Spina  
Tel. 0761/600396

Spina G.

**Corso tessitura superficiale  
(teorico-pratico)****COMPOSITI**

Brindisi - BR 03

Tel. 328/8255315

Frigione F.

**La stratificazione in zirconia**

10 crediti ECM

Bologna - BO 10

Tel. 328/8255315

Frigione F.

**La stratificazione in zirconia**

10 crediti ECM

Roma - RM 10

Tel. 328/8255315

Frigione F.

**La struttura in composito  
per la zirconia**

11 crediti ECM

**ESTETICA**

Roma - RM 17

Coi-Aiog Tel. 02.201488

Rondoni G.D.

**Corso teorico-pratico di tecnica  
indiretta in ricostruzione estetica**

8 crediti ECM

**IMPIANTI**

Bari - BA 16-18

Tel. 328/8255315

Frigione F.

**Master overdenture su impianti  
In fase di accreditamento**

Roma - RM 23-24

Tel. 06.2300709

Boccanera M.

**Corso pratico sull'utilizzo del  
titanio su impianti**

18 crediti ECM

**ORTODONZIA**

Roma - RM 23-24

Tel. 0861.917421

Fantozzi F.

**Corso teorico-pratico di  
ortodonzia linguale**

In fase di accreditamento

**PROTESI**

Buccinasco - MI 16

Tel. 02.45773274

Molinelli F.

**Inizio corso pratico di  
protesi fissa su impianti  
in 8 incontri**

In fase di accreditamento

**PROTESI FISSA**

Colleferro - RM 16-17

Segreteria organizzativa

Tel. 06.9700323

Villani A., Paglia P.

**Corso master di protesi  
fissa in 2 incontri: "Dal modello  
alla modellazione, dagli artico-  
latori al compasso"**

(secondo incontro 23-24/06)

42 crediti ECM

IGIENISTI, ASSISTENTI E  
PERSONALE AUSILIARIO

## GIUGNO 2006

**COMUNICAZIONE**

Roma - RM 10

Unid - Dr. Leonardo De Marzo

Tel. 338.8405807,

Dr. Luciano Pingaro

Tel. 333.4050777

**L'igienista dentale ed il paziente:  
strategie per una comunicazione  
corretta ed efficace**

In fase di accreditamento

**ODONTOCARD**  
il franchising**"Solo chi guarda  
lontano può  
andare oltre  
il proprio  
confine"**sito: [www.odontocard.it](http://www.odontocard.it)  
mail: [info@odontocard.it](mailto:info@odontocard.it)  
Tel-1: 02/26305051  
Tel-2: 02/27205242Stiamo selezionando  
Laboratori Odontotecnici  
per la nostra rete  
in Franchising  
\*esperienza minima 10 anni**Soddisfatti o rimborsati!**  
Siamo presenti ormai in  
10 capoluoghi di provincia con  
oltre 40 laboratori affiliati.**Essere clienti  
PHYSIOLINE  
ha i suoi privilegi**Scopri come visitando il sito  
[www.physioline.it](http://www.physioline.it)**PHYSIOLINE**  
BIOMEDICAL TECHNOLOGY

mectron

med. cal. technology


unità di profilassi per fuso quotidiano

La forma e l'ergonomia di easyjet pro consentono una piacevole pulizia nella mano del operatore ad un adattamento del getto di polvere controllato.

La sicurezza è inoltre un'ottima protezione di polveri intercambiabili, protegger i denti ed impedire il trauma. Il design ad essere parte integrante che il movimento interamente distribuito.

# easyjet pro

nuovo, ergonomico,  
efficace, facile connessione  
al cavo della turbina

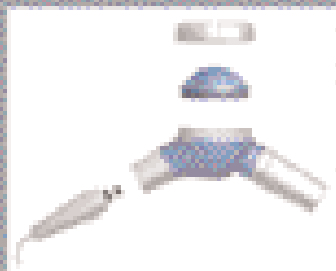


polvere per profilassi mectron  
nuovo packaging, nuova qualità

La polichloro powder viene fornita in pratica bottiglie  
E. 250g da 1,50 €.

La sostituzione regolare richiede il bottiglie di polichloro  
in powder.

Il proprio rete nuova profilassi powder sia che  
trovare sempre del nuovo il dare qualità nella polvere.

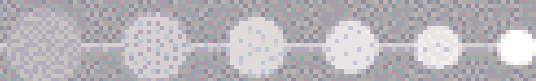

Mectron spa

Via Galvani, 17/A

00195 Caserta (CE)

Italia

tel. +39 0793 58100

fax +39 0793 251214

www.mectron.com

mectron@mectron.com

smile. we like it!

## CEMENTI PROVVISORI A CONFRONTO

# Uniti sì, ma non per sempre

*Nel corso degli anni, in odontoiatria, è stata utilizzata una gran varietà di cementi. In genere i cementi vengono impiegati per due scopi principali: come materiale da otturazione, sia da soli che con altri materiali, e per cementare in modo provvisorio o definitivo i restauri o i dispositivi all'interno della cavità orale.*

Nonostante la loro scarsa resistenza, i cementi dentali sono ampiamente utilizzati in odontoiatria quando questa caratteristica non è di primaria importanza. Di solito, non sono realmente adesivi allo smalto e alla dentina e ad eccezione dei cementi resinosi, si dissolvono e si consumano nei fluidi orali. Comunque, al di là di questi "difetti", essi possiedono tali e tante caratteristiche positive da essere usati nella maggior parte delle ricostruzioni. Sono impiegati come agenti di cementazione per restauri protesici fissi o bande ortodontiche, come isolanti termici sotto restauri metallici, per restauri provvisori o permanenti, come sigillanti di canali radicolari e per incappucciamento della polpa.

I cementi dentali sono generalmente classificati a seconda della loro composizione. Ad eccezione dell'idrossido di calcio e dei materiali in resina, le reazioni di attivazione sono quelle di un acido con una base. I liquidi agiscono come acidi e le polveri come basi. Le specificazioni ADA sui vari cementi, li classificano ulteriormente come Tipo I e Tipo II, sulla base delle loro



proprietà e delle loro indicazioni di utilizzo. Per esempio, un cemento al fosfato di zinco del Tipo I è un cemento a grana fine, con particelle di piccola grandezza, usa-

to per la cementazione di manufatti protesici di alta precisione. Il cemento al fosfato di zinco del Tipo II è un cemento a grana media ed è raccomandato invece per

ogni tipo di impiego, ossia basi isolanti termiche e cementazione di bande ortodontiche. Ovviamente, alcuni requisiti, come per esempio lo spessore del film, so-

no più precisi per il cemento di Tipo I che per quello di Tipo II. I cementi al silicofosfato di zinco sono disponibili nei Tipi I e II. Essi sono traslucidi; quindi, per questa propria caratteristica sono stati particolarmente utilizzati per la cementazione dei restauri in ceramica, come le corone a giacca. Talvolta, ai cementi si aggiungono sali di rame, argento e mercurio per renderli batteriostatici o battericidi.

Quando la cavità preparata si avvicina alla polpa, una base di cemento serve a proteggere quest'ultima dai traumi meccanici e termici. Qualsiasi cemento può essere utilizzato a tale scopo, eccetto i silicati, le resine e i cementi con aggiunta di rame, ognuno dei quali viene considerato troppo irritante. Il cemento al fosfato di zinco, così come tutti i materiali comunemente usati come sottofondi di cavità, è un eccellente isolante termico.

I cementi all'ossido di zinco-eugenolo (ZOE) sono utiliz-

zati come materiali di sottofondo e alcuni sono formulati per cementazioni permanenti di restauri in oro. Hanno un'azione antidolorifica sulla polpa e sono buoni isolanti termici. I cementi polycarbossilati sono usati soprattutto come agenti di cementazione per le ricostruzioni protesiche. Per le loro proprietà adesive, sono usati anche per l'adesione diretta di attacchi ortodontici. Per le caratteristiche biologiche paragonabili a quelle dei cementi ZOE, sono utilizzati anche come materiali di sottofondo. I cementi-resina hanno come prima indicazione la cementazione di restauri estetici, a cui segue quella di attacco diretto di bracket ortodontici.

### UN'AZIONE PROVVISORIA

La cementazione prevede il posizionamento e il fissaggio – provvisorio o definitivo – del restauro. È una fase molto importante che deve essere eseguita con cura e at-

tenzione, al fine di ottenere un margine di chiusura in grado di resistere all'infiltrazione batterica.

I cementi ZOE non modificati vengono utilizzati come materiali da cementazione per corone provvisorie e per cementazione provvisoria di restauri in oro quali corone e ponti protesici. Studi di laboratorio hanno dimostrato che la ritenzione dei restauri metallici con cementi non modificati è proporzionale alla resistenza alla compressione dei cementi stessi.

Il contenuto di eugenolo di questi cementi richiede, però, una particolare attenzione nell'applicazione. L'eugenolo, infatti, inibisce la polimerizzazione delle resine composite e può ammorbidire le corone provvisorie in acrilico. Sono quindi disponibili anche cementi all'ossido di zinco senza eugenolo che, però, non aderiscono alle corone metalliche preformate così bene come i cementi contenenti eugenolo. Inoltre, presentano una reazione di presa più lenta.

È recente la presentazione sul mercato di cementi provvisori all'ossido di zinco a base di materiale siliconico reticolante per addizione, contenenti un agente legante silano per una migliore adesione e un'integrità marginale ideale. La particolarità di questa formulazione consente di applicare in modo semplice il cemento e di asportarlo come una pellicola dai tessuti e dal restauro finale.

### CLASSIFICAZIONE DEI CEMENTI ODONTOIATRICI IN BASE AI LORO COMPONENTI CHIMICI PRINCIPALI E ALLA LORO APPLICAZIONE:

#### Fosfato di zinco

Ritenzione di restauri  
Ritenzione di bande ortodontiche  
Base ad alta resistenza  
Restauro provvisorio

#### Ossido di zinco-eugenolo

Basi a bassa e ad alta resistenza  
Restauri provvisori  
Ritenzione provvisoria e definitiva di restauri

#### Ossido di zinco senza eugenolo

Ritenzione provvisoria di restauri  
Sigillante di canali radicolari  
Impacco gengivale  
Medicazione chirurgica

#### Poliacrilato di zinco


Ritenzione di restauri  
Ritenzione di bande ortodontiche  
Base ad alta resistenza

#### Cementi vetroionomerici

Restauri di V classe  
Ritenzione di restauri  
Ritenzione di bande ortodontiche  
Base ad alta resistenza  
Restauro provvisorio

#### Cementi resinosi, composti ed adesivi

Ritenzione di corone e ponti convenzionali  
Ritenzione di inlay e onlay in ceramica e composito  
Ritenzione di restauri provvisori  
Ritenzione di attacchi ortodontici  
Ritenzione di perni  
Ritenzione di ponti adesivi  
Base ad alta resistenza

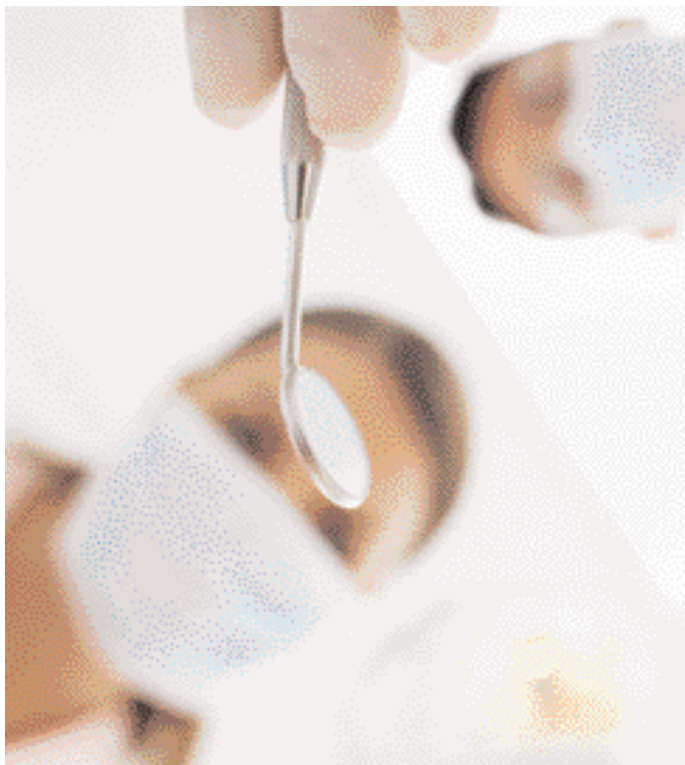

**AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE** - I dati pubblicati in questa sezione sono acquisiti dalle schede tecniche dei prodotti, dalle etichette delle confezioni, o da materiale illustrativo "di pubblico dominio" che abbia uguale valenza legale. I prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: Ⓐ Approfondimenti Ⓔ In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## ► Cementi provvisori

Denominazione del prodotto	AXIA CEM	EASY CEM HARD <sup>Ⓐ</sup>	HARVARD TEMP	HARVARD TEMP EUGENOL	HOFFMANN'S PROVISIONAL CEMENT	HY BOND TEMPORARY CEMENT SOFT	LC-PLASTOR
Produttore	Dentalica spa	Dei Italia srl	Harvard Dental International GmbH	Harvard Dental International GmbH	Hoffmann Dental Manufaktur GmbH	Shofu Inc.	Ghimas spa
Categoria	Fissaggio	Fissaggio	Fissaggio	Fissaggio	Otturazione provvisorio	Fissaggio, incappucciamenti pulpari indiretti, otturazioni provvisorie	Fissaggio
Spessore massimo film (µm)	<= 10	< 20	< 25	< 25	•	41	•
Specialità	Protesi	Protesi	Conservativa	Conservativa	Conservativa	Conservativa, protesi, endodonzia	Conservativa
Indicazioni specifiche	Ponti, corone, inlays, outlays	Cementazioni provvisorie	Corone e ponti provvisori e definitivi	Corone e ponti provvisori e definitivi	Otturazione provvisorio	Fissaggio ponti e corone provvisori, incappucciamenti pulpari indiretti, otturazioni temporanee successiv. alla prep. cavitaria, cement. provv. di cavità nei denti decidui, trattam. dell'ipe-restesia	Otturazioni provvisorie
Composizione %	•	Ossido di zinco paraffina-resine acidi grassi	Ossido di zinco acidi organici	Ossido di zinco acidi organici eugenolo	Ossido di zinco 87 idrossido di alluminio triidrato 13	Polvere: Ossido di zinco 85-ossido di magnesio 8-ossido di bismuto 2-agente HY 5 Liquido: copolimeri dell'acido acrilico e dell'acido tricarbossilico 99	Resine fotopolimerizzabili
Tipo	Ossido di zinco con eugenolo	Acidi organici, ossido di zinco senza eugenolo	Ossido di zinco senza eugenolo	Cemento a base di Ossido di zinco senza eugenolo	A base di ossido di zinco senza eugenolo	Cemento polycarbosilato con fluoruro tannico	Light-curing
Descrizione prodotto	Doppia cartuccia automiscelante da 118 g applicabile con pistola D550 1:1/2:1	Cartuccia automiscelante da 50 ml	Cemento bi-componente in siringa doppia per applicazione diretta con puntale miscelatore	Cemento bi-componente in siringa doppia per applicazione diretta con puntale miscelatore	•	Indurisce rapidamente, non contiene eugenolo. Ha odore e gusto appena percettibili. Viene facilmente rimosso. Facilmente miscelabile	Gel viscoso in siringa
Forma	Base + catalizzatore	Base + catalizzatore	Pasta - pasta	Pasta - pasta	50 g polvere + 40 ml liquido	Polvere + liquido	Monocomponente
Se a base di resina	•	Autopolimerizzabile	Autopolimerizzabile	Autopolimerizzabile	•	•	Fotopolimerizzabile
Radiopaco	Si	•	No	No	Si	Si	No
Tempo di presa a 37°C (min)	4	3	2-3	2-3	2-3	5	30 sec
Resistenza alla compressione (MPa)	> = 8	5	< 35	< 35	Min 25	7,2 a 24h	•
Solubilità in acqua (% in 24 ore)	Ridotta	•	•	•	•	•	•
Erosione acida massima (mm/h)	•	•	•	•	•	•	•
Prezzo di listino *	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 34,00 ca (50 g polvere+ 40 ml liquido per ca. 35 appl.)	Non fornito	Euro 14,40 iva inclusa

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## ► Cementi provvisori

Denominazione del prodotto	MULTIPLÉN	NO-MIX TEMPORARY CEMENT (A)	PLASTICEM	PLASTOR (A)	STONE-P	STONE-P FREE	SYSTEM LINK (A)
Produttore	Dorident	Centrix Inc	Dei Italia srl	Ghimas spa	Sweden&Martina spa	Sweden&Martina spa	Ivoclar Vivadent
Categoria	Fissaggio, otturazioni	Fissaggio	Otturazioni	Fissaggio	Fissaggio provvisorio con eugenolo	Fissaggio provvisorio senza eugenolo	Fissaggio provvisorio
Spessore massimo film (µm)	•	25	•	•	< 10	< 10	•
Specialità	Protesi, conservativa	Protesi	Conservativa	Conservativa	Conservativa	Conservativa	Cementazione provvisoria
Indicazioni specifiche	Corone	Fissaggio provvisorio di ponti e corone	Otturazioni provvisorie	Otturazioni provvisorie	Corone, ponti, inlay e onlay	Corone, ponti, inlay e onlay	Cementazione di ponti, corone, inlay, onlay, faccette
Composizione %	•	Ossido di zinco < 26 solfato di calcio < 31 solfato di potassio < 21	Resine su base bisgma e riempitivi vetrosi	Sali di alluminio e massa grassa	Acidi organici-ossido di zinco-eugenolo-vetro di stronzio-metacrilati	Acidi organici-ossido di zinco-vetro di stronzio-metacrilati	Dimetacrilati 56-riempitivi 43-catalizzatori, stabilizzatori e pigmenti 1 (in peso)
Tipo	Zinco fosfatico	Senza eugenolo	Materiale composito	Solfato di calcio, Ossido di zinco e tracce di eugenolo	A base di ossido di zinco ed eugenolo	A base di ossido di zinco senza eugenolo	Senza eugenolo
Descrizione prodotto	Polvere 60 g + liquido 30 ml	Per la cementazione di ponti e corone a componente singolo che viene attivato a contatto con l'umidità della bocca; non contiene eugenolo, colore bianco	2 siringhe da 4 g cad	Pasta molto viscosa modellabile manualmente	Prodotto biocompatibile, posizionamento semplice del provvisorio. Resistente all'acidità della saliva e ai carichi masticatori	Prodotto biocompatibile, posizionamento semplice del provvisorio. Resistente all'acidità della saliva e ai carichi masticatori	Estetico a polimerizzazione duale disponibile nel colore a3/ universale e trasparente
Forma	•	Pronto all'uso, nessuna miscelazione	Pasta	Monocomponente	Pasta base + pasta catalizzatrice in cartucce 1:1	Pasta base + pasta catalizzatrice in cartucce 1:1	Siringa doppia pasta e catalizzatore
Se a base di resina	•	•	Fotopolimerizzabile	•	•	•	Autopolimerizzabile
Radiopaco	No	Si	•	No	No	No	Si
Tempo di presa a 37°C (min)	•	5	•	60	2,30	2,30	4
Resistenza alla compressione (MPa)	•	•	•	•	2,5	2,5	28-36
Solubilità in acqua (% in 24 ore)	•	•	•	•	•	•	•
Erosione acida massima (mm/h)	•	•	•	•	•	•	•
Prezzo di listino *	Euro 13,95	Non fornito	Non fornito	Euro 14,52 Iva inclusa (6 barrette o vasetto da 50 g)	Non fornito	Non fornito	Non fornito

Legenda: Ⓐ Approfondimenti Ⓔ In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## ► Cementi provvisori

Denominazione del prodotto	TEMPCEMENT	TEMPORARY CEMENT	TEMPOSIL	ULTRA-TEMP	ZONALIN
Produttore	Periodent	Temrex	Coltène	Ultradent	Associated Dental Products (Kemdent)
Categoria	Cemento resinoso per fissaggio provvisorio	Fissaggio	Fissaggio	Fissaggio, otturazioni provvisorie	Otturazioni
Spessore massimo film (µm)	< 20	20	20	Minimo 10-15	•
Specialità	Protesi fissa	Protesi	Protesi su impianti	Protesi fissa, conservativa	Conservativa
Indicazioni specifiche	Corone e ponti	Corone provvisorie o definitive	Corone provvisorie o definitive	Intarsi, ponti, corone, inlay e otturazioni provvisorie	Sottofondi e otturazioni provvisorie
Composizione %	•	•	Polivinilsilossano 60-ossido di zinco 40	Acido poliacrilico 20-ossido di zinco 20	Ossido di zinco BP 99,8-zinco acetato 0,2-eugenol BP 100
Tipo	Resinoso (polimerico) senza eugenolo	Ossido di zinco-eugenolo	Ossido di zinco senza eugenolo	Polibossilato senza eugenolo	Ossido di zinco-eugenolo
Descrizione prodotto	Meccanismo di polimerizzazione unico a 2 stadi. Compatibile con tutti i cementi definitivi	A base di puro ossido di zinco-eugenolo per corone e otturazioni provvisorie	A base silionica per la cementazione di corone provvisorie o definitive	Miscelazione/ applicazione in un passaggio, delicato sulla polpa, idrosolubile, sigillante	Possono fungere da incappucciamento pulpale per proteggere le polpe dagli sbalzi termici
Forma	Siringa binata pronta all'uso	Polvere + liquido	Pasta base + catalizzatore	Pasta-pasta, siringa doppia	Polvere + liquido
Se a base di resina	Autopolimerizzabile	•	•	•	•
Radiopaco	Si	Si	Si	Si	•
Tempo di presa a 37°C (min)	2-3	6	2	4-5	•
Resistenza alla compressione (MPa)	69	4,1	•	55-60	•
Solubilità in acqua (% in 24 ore)	Trascurabile	•	•	•	•
Erosione acida massima (mm/h)	•	•	•	•	•
Prezzo di listino *	Non fornito	Euro 42,62	Euro 28,00	Euro 63,90	Euro 11,50 (polvere) Euro 7,80 (liquido)

## GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SUI CEMENTI PROVVISORI

**Associated Dental Products (Kemdent)** (Importatore Imadent snc - 011.7492333)

**Centrix Inc** (Importatore e distributore Maxi Medical - 02.89124838 - [www.maximedical.it](http://www.maximedical.it))

**Coltène** (Importatore Novaxa spa - 02.6186111 - [www.novaxa.it](http://www.novaxa.it))

**Dei Italia srl** - 0331.969270 - [www.deiitalia.it](http://www.deiitalia.it)

**Dentalica spa** - 02.895981 - [www.dentalica.com](http://www.dentalica.com)

**Dorident** (Importatore Uber Ros srl - 06.95596013)

**Ghimas spa** - 051.575353 - [www.ghimas.it](http://www.ghimas.it)

**Harvard Dental International GmbH** +49.3342.4202-10 - [www.harvard-dental-international.de](http://www.harvard-dental-international.de) (Distributore esclusivo Simit Dental - 0376.267811 - [www.simitdental.it](http://www.simitdental.it))

**Hoffmann Dental Manufaktur GmbH** - 0049 (0)30 8510273 - [www.hoffmann-dental.com](http://www.hoffmann-dental.com)

**Ivoclar Vivadent srl** - 051.591384 - [www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it)

**Periodent** (Importatore e distributore Illic Dr. Riccardo spa - 02.55016500 - [www.illic.it](http://www.illic.it))

**Shofu Inc.** (Importatore e distributore Illic Dr. Riccardo spa - 02.55016500 - [www.illic.it](http://www.illic.it))


**Sweden & Martina spa** - 049.9124300 - [www.sweden-martina.it](http://www.sweden-martina.it)

**Temrex** (Importatore Novaxa spa - 02.6186111 - [www.novaxa.it](http://www.novaxa.it))

**Ultradent** - 02.45864461 - [www.ultradent.it](http://www.ultradent.it)

## Easycem

Easycem è un cemento provvisorio con buone doti di adesione. Il prodotto è confezionato in cartuccia automiscelante per rendere più facile e veloce la sua applicazione. Easycem non contiene eugenolo ed è quindi più indicato per l'uso in abbinamento alle resine. Easycem consente risparmio di tempo (miscelazione automatica), il vantaggio della pulizia in quanto si applica direttamente, un minimo spreco di materiale. Easycem presenta, inoltre, ottime consistenza e adesioni, è facile da rimuovere ed economico, basta pensare che

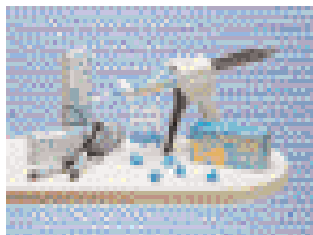

una cartuccia può essere utilizzata per più di 200 cementazioni.

*Per informazioni:*  
**Dei Italia srl**  
 Via Torino, 765  
 21020 Mercallo (VA)  
 Tel. 0331.969270  
 Fax 0331.969271  
 e-mail: [info@deiitalia.it](mailto:info@deiitalia.it)  
[www.deiitalia.it](http://www.deiitalia.it)

## Plastor




Il Plastor è neutro e non si altera con le abituali medicazioni. Tutti i componenti sono ben tollerati dalla polpa e dalle mucose. Plastor chiude ermeticamente la cavità, aderisce perfettamente alle pareti, impedendo infiltrazioni. Plastor permette di applicare ogni tipo di medicazioni senza che queste fuoriescano. Plastor si applica, senza che occorra asciugare la cavità del dente, come otturazione

provvisoria di una cavità, otturazione temporanea sopra a medicazioni (terapia della pulpite - devitalizzazione pulpale) e durante i trattamenti endodontici che richiedono più sedute. Plastor indurisce rapidamente a contatto con la saliva, non si disgrega, resiste alla masticazione, si applica e si toglie con molta facilità, non è conduttore di calore, impedendo così stimoli termici sulla polpa.

*Per informazioni:*  
**Ghimas spa**  
 Via Renato Fucini, 2  
 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. 051.575353  
 Fax 051.575568  
[www.ghimas.it](http://www.ghimas.it)

## NoMix® Temporary Cement

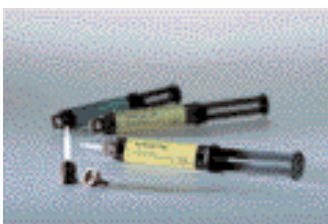

NoMix® Temporary Cement è un cemento provvisorio per la cementazione breve di ponti e corone, a componente unico, che viene attivato a contatto con l'umidità della bocca, non contiene eugenolo ed è di colore bianco. Si caratterizza per il basso spessore (25 micron circa) e la lieve espansione da polimerizzazione consentendo così un'ottima sigillatura. Può essere utilizzato con corone provvisorie o definitive ed è facile da usare, applicare e pulire.

NoMix® Temporary Cement è fornito o in siringa da 1 ml o in monodose da 0,5 g, anche per uso domiciliare. Con la siringa il materiale può essere applicato direttamente nel provvisorio senza necessità di utilizzare blocchetti per l'impasto, mentre la monodose può anche essere utilizzata per una singola applicazione in studio o a casa da parte del paziente. NoMix® Temporary Cement contiene ossido di zinco che è un antibatterico e previene l'insorgenza di funghi e la conseguente alitosi.

*Per informazioni:*  
**Maxi Medical srl**  
 Via B. Zumbini, 38  
 20143 Milano  
 Tel. 02.89124838  
 Fax 02.89124970  
[www.maximedical.it](http://www.maximedical.it)

## System link

Adesione invisibile grazie alla elevata traslucenza

System link è un cemento composito provvisorio duale per la cementazione estetica temporanea di corone, ponti, inlays, onlays e faccette particolarmente indicato per i settori anteriori. Entrambi i colori, A3, sono traslucenti, e nessuno noterà che si tratta di un restauro provvisorio. L'elevata forza di compressione e la durezza D shore di System link sono responsabili dell'ottimo comportamento ritentivo e della buona stabilità del prodotto in situ. Grazie alla siringa automiscelante, il prodotto viene dispensato nel giusto quantitativo ed è già omogeneamente miscelato. Una quantità giusta di prodotto consente un buon risparmio.

System link è privo di eugenolo e perciò adatto ad una conseguente cementazione adesiva definitiva, è di semplice utilizzo e di facile lavorabilità, grazie alla siringa automiscelante. System link è compatibile con i materiali temporanei convenzionali, particolarmente con System c&b.



*Per informazioni:*  
**Ivoclar Vivadent srl**  
 Via dell'Industria, 16  
 39025 Naturno (BZ)  
 Tel. 0473.670111  
 Fax 0473.667780  
[www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it)



- CEREC LAB
- SALDATURA LASER
- PROTESI COMBINATA
- GNATOLOGIA
- PROTESI SU IMPIANTI

Via Latina, 501 00179 ROMA  
 Tel. 06.78 06 013 r.a. Cell. 333.25 80 598 E-mail [sandropensa@libero.it](mailto:sandropensa@libero.it)




Amalgamatore  
TAC 200 S

€ 162,00



Amalgamatore  
TAC 400 M

€ 200,00

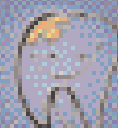


Ablatore TOPselector  
+ KIT ENDO

€ 574,00

Termosigillatrice  
con trascinamento  
automatico  
TAC 515 1150

€ 615,00

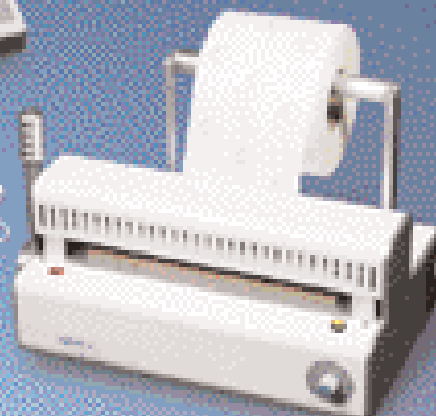

Telecamera  
TOPcam

€ 590,00




Ablatore Selector-SA

€ 670,00



Lampada  
sbiancante  
BT-Cool

€ 2.400,00

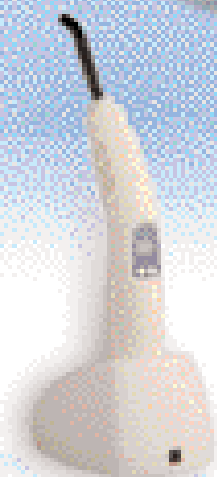

Lampada LED  
cordless  
Linea TOP 1000

€ 590,00



Lavatrice  
3,5 lt  
con cestello  
inox ad  
ultrasuoni FS

€ 687,00

**LINEA TAC S.p.A.**

Per ulteriori informazioni:

Via della Guardia, 7 - 14043 Montegrosso d'Asola (AT) (ITALY) Tel. +39 0141 952295 - Fax +39 0141 952145

e-mail: [lineatag@lineatag.it](mailto:lineatag@lineatag.it) - [www.lineatag.it](http://www.lineatag.it)

VALIDITA' 30/09/06

PROMOZIONE PROMOZIONE PROMOZIONE

# Stop all'ipersensibilità dentinale

Programma di desensibilizzazione a due fasi



Desen Liner



Desen Colutorio

## Desen

desensibilizzante dentinale

**OGNA**  
Laboratori Farmaceutici

## SALDATRICI A CONFRONTO

# L'unione fa la forza

*La saldatura è un procedimento che permette l'unione permanente di pezzi metallici, in modo da realizzare la continuità fisica tra i pezzi stessi. In ambito dentale, permette di unire in modo permanente le diverse parti che costituiscono alcuni tipi di protesi ed altri dispositivi. Inoltre, può essere utilizzata per la riparazione o modifica di protesi già esistenti.*

Molto diffusa in diversi settori, la saldatura viene eseguita quando non è possibile o non è consigliabile costruire una struttura metallica direttamente in un pezzo unico. Le diverse parti, quindi, vengono costruite separatamente e unite tra loro per mezzo della saldatura. Questa unione può essere realizzata direttamente tra i componenti da unire, oppure tramite apporto nella zona di collegamento di un altro materiale metallico. I numerosi procedimenti di saldatura vengono solitamente raggruppati nei due gruppi: le saldature autogene e quelle eterogenee. Nel primo caso, il collegamento tra i componenti viene eseguito direttamente oppure con l'impiego di un metallo d'apporto della stessa natura del metallo base. Nel secondo caso, invece, la saldatura avviene portando solamente a fusione un metallo d'apporto di natura diversa rispetto a quella del metallo base. A seconda del procedimento utilizzato, le saldature si suddividono in brasatura, saldatura per resistenza, saldatura per pressione e saldatura per fusione. Per quanto riguarda l'applicazione in cam-



**IL LASER**

Il termine laser è l'acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ovvero amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione.

Un fascio di luce laser è un fascio di luce coerente costituito da fotoni con la medesima direzione e dotati di lunghezza d'onda e fase uguali, nel campo di frequenze ottiche. Questa luce viene prodotta da un apposito generatore laser, nel quale un materiale attivo opportunamente stimolato emette la radiazione.

A seconda della natura del materiale attivo, i laser si possono classificare in laser a stato solido, laser a gas e laser a stato liquido.

I laser a stato solido sono in grado di fornire fasci di luce coerente che concentrano potenze molto elevate in zone ristrette e in grado di fondere localmente materiali metallici che presentano temperature di fusione molto elevate. I laser a stato solido sono quelli solitamente utilizzati nell'industria per operazioni di saldatura.

po dentale, le saldature più comunemente utilizzate sono la brasatura, la saldatura per resistenza e quelle per fusione. La brasatura è una saldatura eterogenea, utilizzata per unire tra loro parti di protesi, per riparazioni, per collegamento di fili e altri dispositivi ortodontici. Le saldature per resistenza sono di tipo autogeno e sono solitamente utilizzate per il collegamento di fili ed altri dispositivi ortodontici. Inoltre, possono essere utilizzate per il collegamento provvisorio di elementi di protesi parziali rimovibili, prima del collegamento definitivo tramite brasatura. Anche le saldature per fusione sono di tipo autogeno e sono utilizzate per collegamenti di componenti di protesi e per riparazioni. In base al metodo di riscaldamento impiegato, le saldature dentali per fusione si suddividono in saldatura TIG, saldatura al plasma e saldatura al laser.

**LA FORZA DEL LASER**

La saldatura mediante laser permette di ottenere una fusione localizzata dei lembi da unire tramite un fascio di luce

**LE SALDATURE DENTALI**

In base a come vengono sostenuti i componenti da saldare, le saldature dentali possono essere suddivise in:

**Saldatura in rivestimento:** durante la saldatura i componenti da saldare tra loro sono parzialmente inglobati in un blocco di materiale refrattario, ovvero il rivestimento per saldatura.


**Saldatura sul modello:** durante la saldatura i componenti sono collocati su un modello riprodotto l'arcata dentaria del paziente o una parte di essa.

**Saldatura libera:** durante il procedimento i componenti sono tenuti con le mani o con appositi morsetti.

**Saldatura endorale:** i componenti da saldare sono sostenuti dalle strutture anatomiche della cavità orale del paziente.

laser. L'intensità e la durata del fascio di luce, ovviamente, devono essere regolate in modo opportuno. L'esecuzione della saldatura viene eseguita mediante appositi apparecchi denominati saldatrici laser. La saldatrice laser dentale è un'attrezzatura per saldature di precisione ed è costituita da diversi componenti. Prima di tutto, vi è un generatore laser in cui il materiale attivo viene stimolato tramite un sistema di ecci-

tazione, in grado di fornire al materiale attivo stesso l'energia richiesta per l'emissione della luce laser. Il sistema di focalizzazione rappresenta, invece, il sistema ottico che permette di ottenere un'area di piccole dimensioni in uscita dal generatore, nella quale si concentra tutta la potenza del fascio laser. Vi è poi un sistema di alimentazione del gas protettivo e uno stereomicroscopio che permette di collo-

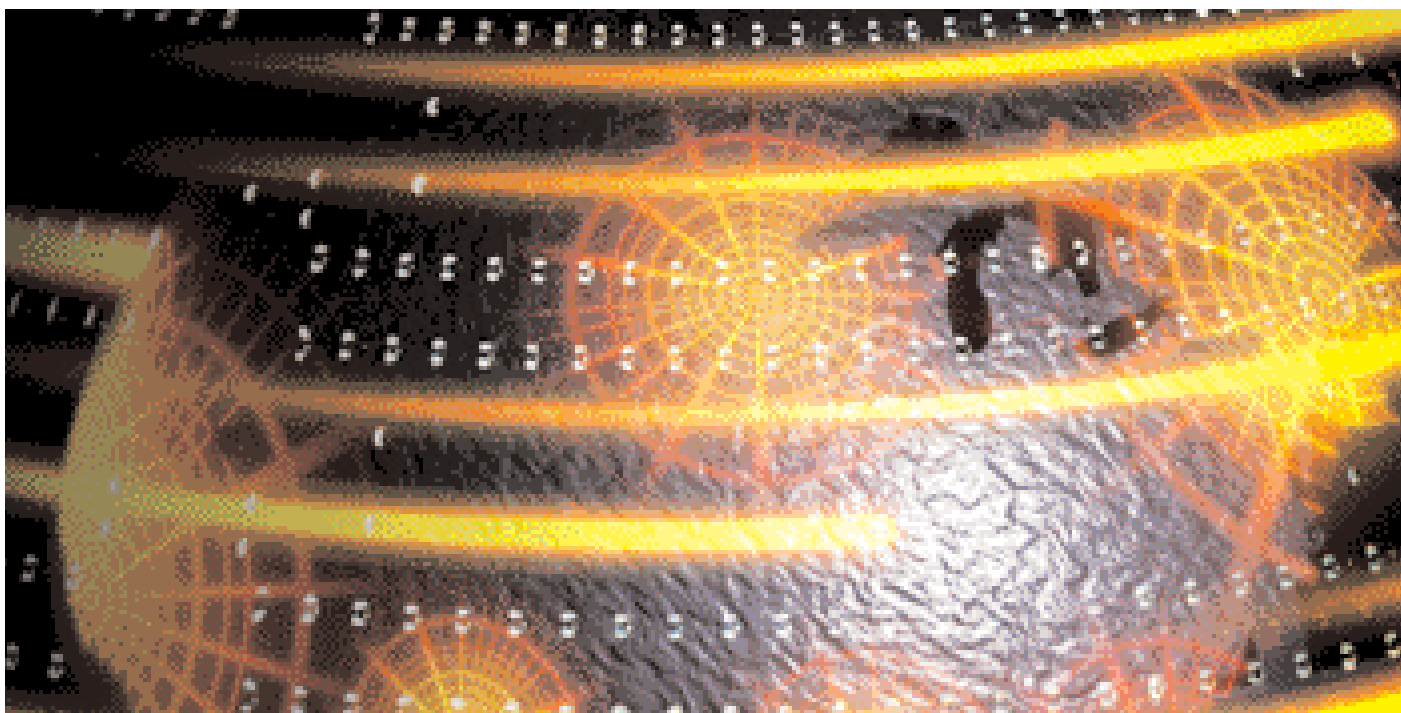

Legenda: Ⓐ Approfondimenti Ⓔ In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## ► Saldatrici Laser

Denominazione del prodotto	ALDT 30	DAKO 100-280	DAKO 100-320	DESKTOP POWER 05	LASER LW1	MARK - UNO	MASTER KUBO	XXS
Produttore	Alphalaser	Saratoga spa	Saratoga spa	Carl Baasel Lasertechnik GmbH	Schütz Dental Group	Orotig srl	Laservall spa	Orotig srl
Tipologia di laser	ND:YAG	ND:YAG	ND:YAG	ND:YAG	ND:YAG	ND:YAG	ND:YAG	ND:YAG
Potenza nominale erogata (W)	35	40	50	40	60	50-75	Max 40	30
Potenza di picco max (KW)	5	40 W	50 W	4	60 W	3,3-5	4	3
Durata dell'impulso (ms)	0,5-15	0,5÷15	0,5÷15	0,5-20	1-25	0,5-15	0,5-10	8
Energia degli impulsi (Joule)	50	50	50	50	80	0,5-100	Max 40	25
Diametro spot di saldatura (mm)	0,2-2,0	0,3÷2	0,3÷2	0,5-2,5	0,25-2,5	0,3-2,0	0,3-1,5	0,3-1,8
Settaggio spot di saldatura (n. posizioni ed altre caratteristiche)	•	Settaggio intensità di corrente (100÷280A), tempo emissione e diametro	Settaggio intensità di corrente (100÷320A), tempo emissione e diametro	Elettronico da 0,5 a 2,5	Regolazione completamente individualizzabile	Motorizzato a 10-20 posizioni	Motorizzato	Manuale a 8 posizioni
Dispositivo di ingrandimento (tipologia e n° ingrandimenti)	Stereomicroscopio Laica 16x, campo visivo 16 mm	Stereomicroscopio Nikon 5,6-35x	Stereomicroscopio Zeiss stemi 2000-c 4-25x	Laica 20x	Stereomicroscopio 10x	Fisso 12,5x	Microscopio Leica 10x	Fisso 12,5x
Accesso ai comandi	Video, cuneo, cobra	Joystick	Membrana comandi, joystick	Pulsantiera e joystick	Joystick, display, pedale	Pulsantiera, joystick, display	Joystick e pulsantiera	Joystick e display
N. di programmi di saldatura (predefiniti e programmabili)	16 parametri	20	20	100	15	100	20	1
Illuminazione della camera di lavoro	Si	Lampada al neon	Lampada alogena, fibre ottiche	2 faretto alogeni	Alogena regolabile	Lampade dicroiche regolabili in intensità	3 faretto alogeni	Lampade dicroiche regolabili in intensità
Aspirazione dei fumi di saldatura	Si	Si	Si	Si	Predisposizione	Si	Si	Si
Tipologia raffreddamento	Acqua/aria	Ad acqua bidistillata	Ad acqua bidistillata	Ad acqua con circolo forzato e radiatore	Circuito chiuso ad acqua	Gruppo frigo integrato	Acqua/aria	Ad aria forzata
Requisiti elettrici (V e Hz)	220 V-50 Hz-10 A	230 V/50-60 Hz	230 V/50-60 Hz	230 V - ~50 Hz 10 A monofase	220 V/50-60 Hz	230 VAC 50/60 Hz-10 A	220 V	230 VAC 50/60 Hz-10 A
Peso e dimensioni (Kg e cm)	70/51x55x80	150/48x82x104	185/50x100x115	85/64x46,5x82,2	97/70x90x122	50/82x51x60	100/62x72	28/28x40x50
Accessori disponibili su richiesta	Videocamera, cuneo ergo, ottica cobra	Collegamento a pc, reg. forma impulso, puntamento con raggio guida	Collegamento a pc, reg. forma impulso, telecamera x microscopio, seggiolino	Ottiche cobra e banco regolabile	Stereomicroscopio Laica	Telecamera, staffa fissa di ancoraggio a muro, staffa mobile elettronica di ancoraggio a muro sistema "Easy Lifting"	Telecamera, monitor, software pc	Telecamera
Prezzo di listino*	Euro 19.000,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 24.275,00	Non fornito	Euro 23.000,00	Euro 10.999,00

care correttamente il punto in cui si deve eseguire la saldatura. L'apparecchio è completato da dispositivi ausiliari per l'alimentazione elettrica, il raffreddamento, le regolazioni.

Per eseguire la saldatura, la saldatrice deve essere regolata e i pezzi devono essere accostati tra loro e posizionati sotto lo stereomicroscopio. In questa fase, lo stereomicroscopio per-

mette di collocare i componenti con precisione e in corrispondenza della traiettoria del fascio laser. A questo punto, il comando a pedale permette di attivare prima il getto di gas

protettivo e successivamente l'impulso laser.

La durata dell'impulso laser è molto breve, ma sufficiente a fondere i lembi accostati che, dilatandosi, si uniscono e con

Legenda: Ⓐ Approfondimenti Ⓔ In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## ► Saldatrici a Microimpulsi

Denominazione del prodotto	NOBIL WELDER	SMART PLASMA WELDER Ⓐ
Produttore	Nobil Metal spa	Schütz Dental Group
Indicazioni d'uso	Unione e riparazione di tutte le leghe e monomateriali in titanio e galvano	Saldatrice per tutti i metalli e titanio
Dimensioni (LxHxP) (mm) e peso (Kg)	390x450x460/23	38x45x46
Assorbimento di potenza (W)	1.000	1.000
Tensione di rete (V)	230	220/240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60
Saldatura continua	Si	Si
Prese per elettrodi a mano	Si	Si
Accessori in dotazione e opzionali	2 Elettrodi in tungsteno Ø 0,5 mm e Ø 1,0 mm - 2 Portalettrodi Ø 0,5 mm e Ø 1,0 mm - Guaina in ceramica - Spazzolino per pulizia sede portaelettrodo	2 porta elettrodi con 10 elettrodi in dotazione; stativo per microscopio optional
Camera di lavoro con illuminazione	Si	Si
Pistola per l'aria compressa	Si	Si
Comando a pedale per saldare	Si	Si
Presa di alimentazione del sistema di aspirazione	Si	Si
Condotto uscita fumi collegabile a sistema di aspirazione	Si	•
Funzionamento con gas argon	Si	Si
Display	Si alfanumerico	Si LCD multi funzionale
Presa per stampante	No	No
N. di programmi di saldatura (predefiniti e programmabili)	4 predefiniti 2 programmabili	5 tutti individualizzabili
Sistemi di sicurezza installati	Interruttore principale che interrompe l'afflusso di corrente	Salva vita, protezione corti circuiti
Sistema di protezione degli occhi durante le fasi di lavorazione	Otturatore elettromeccanico del gruppo ottico	Otturatore elettromeccanico
Prezzo di listino*	Euro 7.500,00	Euro 6.950,00

il successivo raffreddamento rimangono collegati. Con questo procedimento si forma quindi un punto di saldatura. La saldatura, poi, prosegue con lo stesso procedimento, ma spostando in modo graduale i pezzi da unire ed inviando una serie di impulsi laser ciascuno in prossimità del precedente, fino al completamento del collegamento dei pezzi stessi. Un vantaggio di questa metodica di saldatura è che, dato che la potenza del fascio laser è molto concentrata e l'impulso dura un periodo di tempo brevissimo, a breve distanza dal punto di saldatura i pezzi non subiscono riscaldamenti apprezzabili. La saldatura laser, quindi, può essere eseguita con le parti di una protesi posizionate direttamente sul relativo modello o tenute con le mani. Inoltre, la saldatura può essere eseguita anche in prossimità di ricoperture estetiche in resina o ceramica. Dato che la profondità di penetrazione della saldatura laser è in genere di circa 2 mm, durante la saldatura può essere necessario ruotare gradualmente i pezzi in modo che il collegamento sia eseguito lungo tutto il perimetro.

Occorre ricordare che le caratteristiche dei materiali metallici possono influire sulla effettiva possibilità di unirli tra loro mediante questo sistema. Prima di eseguire una saldatura laser, quindi, bisogna valutare in modo opportuno la composizione dei metalli, la loro conduttività termica, la tendenza a

### GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SULLE SALDATRICI LASER E A MICROIMPULSI

#### Alphalaser (Importatore)

Dentag Italia srl -

0471.256233 -

www.dentag-italia.com)

#### Carl Baasel Lasertechnik GmbH & Co. Kg (Importatore)

Dentaurum Italia spa -

051.862580 -

www.dentaurum.it)

#### Laservall spa (Distributore)

Auro Tre - 030.3544806)

Orotig srl - 045.6400865 -

www.orotig.com

#### Nobil Metal spa -

0141.933811 -

www.nobilmetal.it

Saratoga spa - 0434 572600 -

www.saratogadental.it

#### Schütz Dental Group

(Dati forniti da Nuova Gerhò -

0471.935550 - www.gerho.it)

riflettere la luce e tutti quei fattori che potrebbero in qualche modo influenzare il risultato della saldatura. Da sottolineare, poi, che le saldature dentali sono operazioni molto delicate che richiedono un'adeguata preparazione e abilità da parte dell'operatore.

**AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE** - I dati pubblicati in questa sezione sono acquisiti dalle schede tecniche dei prodotti, dalle etichette delle confezioni, o da materiale illustrativo "di pubblico dominio" che abbia uguale valenza legale. I prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

## ① WELDER™ Saldatrice a micro-impulsi

Appositamente studiata per l'uso Odontotecnico; permette di effettuare saldature, anziché brasature, mediante energia elettrica a micro-impulsi (TIG).

### Principali vantaggi

- ◆ Localizzazione della temperatura solo nel punto di saldatura, nessuna propagazione sulla struttura.



- ◆ Utilizzazione della medesima lega utilizzata per la fusione, nessun apporto di saldami.
- ◆ Mantenimento di un alto modulo di elasticità e stabilità senza contaminazioni.
- ◆ Conservazione della biocompatibilità delle leghe utilizzate.
- ◆ Saldature effettuabili sul modello in gesso.
- ◆ Eccellente precisione.
- ◆ Per tutte le leghe: nobili, non nobile e per Titanio.

### Particolarità

- ◆ Stereo microscopio di elevata qualità.
- ◆ Protezione elettro meccanica degli occhi.
- ◆ Doccia di Argon, pre e post saldatura, in camera chiusa.


- ◆ Nessun contatto degli elettrodi con l'oggetto da saldare.
- ◆ Raffreddamento con getto d'aria e possibilità di aspirazione.

### Funzionalità assoluta

- ◆ Due diversi diametri di elettrodi con angolazione regolabile.
- ◆ Impulso singolo e a ripetizione con comando a pedale.



- ◆ Illuminazione integrata e diffusa dell'intera camera di lavoro.

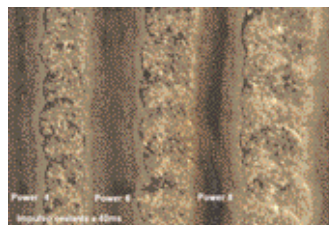

**Per informazioni:**  
**Nuova Gerhò**  
**Dental Division srl**  
**Via Giotto, 7**  
**39100 Bolzano**  
**Tel. 0471.935550**  
**Fax 0471.933061**  
**www.gerho.it**

Alcune serie ALFA, PENTA, GEO-MAYI

in OFFERTA LIMITATA con:


- Lampada scalatica
- Poltrona anal. Prima
- Pedaliera multifunzionale
- Serviga a 3 funzioni LUZZANI
- Microiniettore NSK
- Cardene con attacco per turbina
- Supporto trag
- Canola di Aspirazione Chirurgica
- Canola Aspirativa
- Alimentazione con Steryl Water

INSTALLAZIONE INCLUSA

3 ANNI DI GARANZIA

IVA E TRASPORTO NON INCLUSI

Via Bergamo, 2  
 20090 DE SEATE  
 MILANO - ITALIA  
 Tel. 02 86421700  
 Fax 02 86421706  
 id@nuova-gerho.it

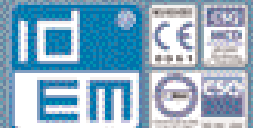


produttori dal 1959

**NE MAVI**  
*Evolution of Style*  
**€ 11800**

**PENTA**  
*Evolution of Art*  
**€ 9350**

**ALFA Young**  
*Evolution of Logic*  
**€ 7900**

**ALFA**  
*Al. Non Em*  
**€ 8700**

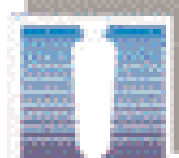

Implant  
Division

## Un sorriso per tutti

La L.S.S. Life Support Systems spa, con questa straordinaria offerta si pone l'obiettivo di consentire una maggiore diffusione dell'implantologia orale attraverso professionisti sensibili a ciò.


**Comodato d'uso** del Surgical Tray e strumentario chirurgico base  
(val. comm. da listino € 1.250,00)

✓ **N° 20 impianti PLA 93** autoflettante (o altri del tipo riportati in figura)  
(Due diametri e lunghezze diverse)

+ (N° 92 Parti protesiche e da laboratorio)

**TOTALE OFFERTA (iva esclusa) € 3.981,00**

VALORE COMMERCIALE DI LISTINO (iva esclusa) € 5.688,00

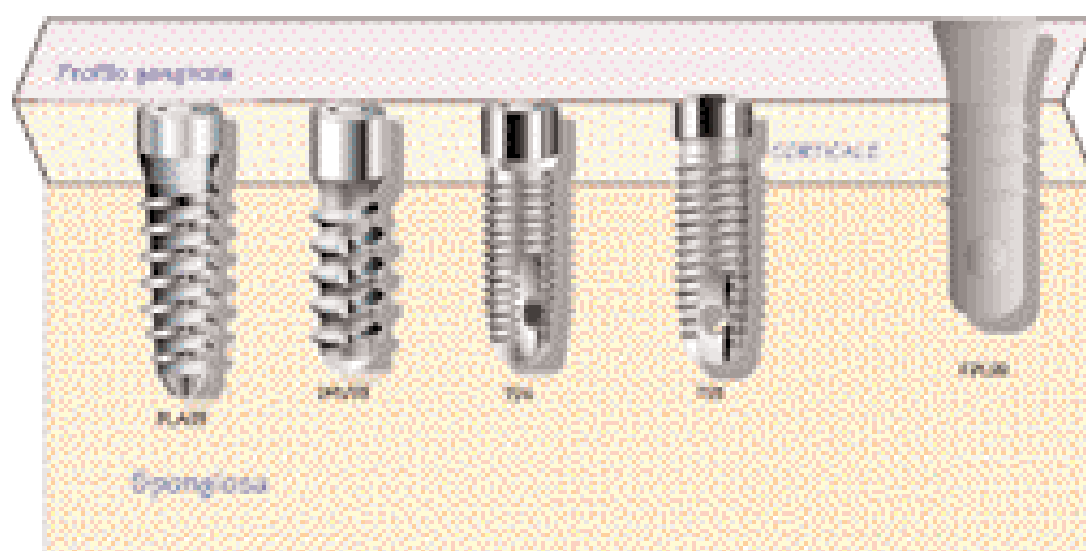

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci

Aziende certificate UNI EN ISO 13485:2002 e UNI EN ISO 9001:2000

07026 OLBIA SS - Zona Industriale - Settore 4 ☎ C.P. 263 - Cala Saccala

☎ +39 0789 59 60 14 / 0789 58 502 📠 +39 0789 57 9 79

Cap. Soc. Int. Vers. € 1.875.056,00 C.C.I.A.A. SS 57846 P.IVA/C.F. 00645600908

## ► S3 Bond Kuraray: chimera chimica

Provate ad immaginare un gatto che ami nuotare: è forse l'esempio che meglio sintetizza le proprietà dell'ultima innovazione di Kuraray, Clearfil S3 Bond.

S3 Bond è il nuovo adesivo mono-componente fotoattivabile che offre le medesime prestazioni dei migliori sistemi bi-componente. Fino a ieri, questo poteva apparire impossibile da realizzare. La tecnologia chimica, infatti, ha sempre dovuto mediare fra semplicità operativa o garanzie di adesione. In altri termini, i comodi adesivi

ta omogeneità spaziale della distribuzione molecolare dei monomeri idrofilici (HEMA), idrofobici (Bis-GMA) e acido-adesivi (MDP). L'aspetto stupefacente di S3 Bond è che la distribuzione di fase molecolare si mantiene perfettamente omogenea anche dopo aver fatto evaporare solventi e fluidi dentali residui (meglio se con



all-in-one si sono dimostrati poco resistenti al passaggio di liquidi (fenomeno dei *water trees* e *blistering*), con conseguente progressivo abbassamento dei valori di adesione. Oggi la tecnologia chimica Kuraray ha reso disponibile anche in Italia l'unico bonding - ovviamente automordenzante - che coniuga la semplicità dei sistemi mono-componente con l'affidabilità dei sistemi bi-componente. La padronanza dell'ingegneria molecolare e la profonda conoscenza dei processi adesivi hanno guidato i ricercatori Kuraray nello sviluppo di una tecnologia rivoluzionaria, M.D. - Molecular Dispersion. Questo nuovo brevetto racchiude l'"alchimia" alla base delle proprietà di S3 Bond: la perfet-

ta omogeneità spaziale della distribuzione molecolare dei monomeri idrofilici (HEMA), idrofobici (Bis-GMA) e acido-adesivi (MDP). L'aspetto stupefacente di S3 Bond è che la distribuzione di fase molecolare si mantiene perfettamente omogenea anche dopo aver fatto evaporare solventi e fluidi dentali residui (meglio se con

*Per anticipazioni rispetto all'informazione scientifica Isasan Kuraray, è possibile visitare [www.s3-bond.com](http://www.s3-bond.com), o contattare per una presentazione diretta:*

**Isasan srl**  
Via Bellini, 17  
22070 Rovello Porro (CO)  
Tel. 02.96754179  
Fax 02.96754190  
e-mail: [info@isasan.com](mailto:info@isasan.com)  
[www.isasan.com](http://www.isasan.com)

• L'unico adesivo monofase con le prestazioni dei migliori sistemi a 3 passaggi.

• S3 BOND con tecnologia a Dispersione Molecolare - MD (brevetto KURARAY)

ISASAN

Via Bellini 13, 22070 Rovello Porro (CO)  
Tel. 02 96754179 - Fax 02 96754190  
[www.isasan.com](http://www.isasan.com) - [info@isasan.com](mailto:info@isasan.com)



ARREDAMENTO  
TECNICO  
PROFESSIONALE

Series  
JOINT FEET



Series  
JOINT FLY



JOINTSTERIL 10



JOINTSTERIL 15



Via dell'Artigianato, 23  
35026 Conselve (PD) - Italy  
Tel. 049 5385441 - [www.stiltec.it](http://www.stiltec.it)


## Reti di Titanio-TiN TOCKSYSTEM

Creatività e versatilità nell'osteosintesi



1. Grave situazione iniziale  
mancanza della parete vestibolare

Tante sono le occasioni durante la cura della cavità orale, nelle quali si desidera intervenire per il ripristino del volume osseo: implantologia, parodontologia, difetti ossei congeniti, trauma ecc. Le reti Tocksystem sono create proprio per rispondere a questa esigenza. Sono ottime per agevolare l'espansione e la ricostruzione ossea; utilissime per favorire la crescita ossea attorno agli impianti formando una barriera ad effetto tenda di sostegno rigido sotto periostale, evitando il collasso dei tessuti molli, permettendo l'irrorazione sanguigna. Le reti fornite sono sterili e pronte per l'uso ma lasciano spazio all'ingegnosità del medico operante. Esse possono essere tagliate, modellate, orientate dall'operatore secondo le proprie esigenze, sono prodotti senza memoria elastica e sono duttili e modellabili sulle creste d'applicazione. I risultati ottenibili sono eccellenti sotto l'aspetto funzionale ed estetico. Nel settore implantostomatologico le reti di Titanio-TiN sono commercializzate in misure di: 20x20mm o 45x45mm, in spessori di: 0.1 mm o 0.05 mm ed in superficie standard - fine o liscia - lucida. ■

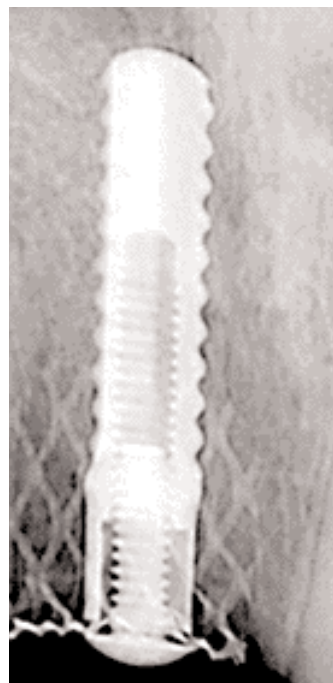

2. Rx: applicazione impianto  
con rete di sostegno



3. Si nota la notevole crescita ossea  
avvenuta anche sopra la rete

**Tocksystem**  
Via Poggio Belvedere, 2  
22030 Lipomo (CO)  
Tel. e fax: +39.031.280301  
e-mail: [tocksystem@tin.it](mailto:tocksystem@tin.it)

## Odontocard® S.r.l., il Made in Italy sbarca all'estero

Odontocard®, azienda leader nel franchising odontotecnico in Italia, offre ai suoi affiliati servizi di marketing, corsi di aggiornamento, sconti su attrezzature e materiali con contratti di fornitura con le migliori aziende del settore. La sezione Technodent Franchising Network® trova ai laboratori affiliati gli

studi odontoiatrici che daranno loro i lavori protesici. Odontocard®, inoltre, segue attentamente le nuove tecnologie e l'evoluzione dei materiali e macchinari, vedi Cad-Cam, articolatori e leghe. Il franchising Odontocard® è la nuova risposta all'esigenza di unire le sinergie in un settore molto "pol-

verizzato" e di promuovere in Italia e all'estero il Made in Italy. La formula in Franchising è, ormai, il livello più alto di collaborazione tra due aziende indipendenti, ma che formano una squadra che possa dare all'utente finale (il dentista) il meglio di quanto possa trovare nel settore. Nel mese di maggio, oltre ai 40 punti italiani, verrà inaugurato il punto pilota in Lettonia.

Odontocard® in franchising, in quest'anno ha portato innovazione e Made in Italy nelle regioni

baltiche, in collaborazione con l'ICE - Istituto per il commercio estero (la Lettonia, la Lituania e l'Estonia sono entrate a far parte dell'EU nel 2004). Odontocard® porterà tutti i prodotti realizzati e fabbricati in Italia dando lustro alla nostra produzione. I lavori odontotecnici verranno realizzati in Italia ed esportati nei paesi in questione (in controtendenza con quanto attualmente avviene, vedi Turchia, Cina, Romania che sono entrati prepotentemente nel nostro paese). Nel nostro paese Odontocard® ha

creato "The Smile Factory®", centri di sbiancamento dentale specializzati, in franchising, rivolti a quanti vogliono diventare titolari di un vero e proprio centro odontoiatrico estetico. L'italianità e il Made in Italy sono una risorsa che non va abbandonata, ma incentivata, e solo unendo le forze si riuscirà a contrastare la concorrenza estera mantenendo altissimo il livello di qualità. Preferite una buona trattoria d.o.c italiana o un Fast-Food?

L. Citriniti

**Info franchising:**  
**Odontocard srl**  
**Numero verde 800.135.438**  
**www.odontocard.it**  
**Via G.B. de la Salle, 17**  
**Tel. 02.27205242**  
**02.26305051**  
**Milano - Italia**

**Elizabettes Jela, 9**  
**Riga - Lettonia**



**LEGHE E SALDAMI**  **PER ODONTOLOGIA**

**QUALITÀ, GARANZIA E SICUREZZA**

Leghe e Saldami prodotti negli Stati Uniti e certificati in Italia dall'Istituto Superiore di Sanità

**BIOLOGIC C**

Leghe Cromo-Cobalto per Ceramica

**BIOLOGIC P**

Leghe Cromo-Cobalto per Schelonica

**BIOLOGIC U**

Leghe Cromo-Cobalto per Ceramica

**BIOLOGIC NA**

Leghe Nichel-Cromo per Ceramica

**CSN V**

Leghe Nichel-Cromo per Ceramica

**NP ROUND V**

Leghe Nichel-Cromo per Ceramica

**NPR III**

Leghe Nichel-Cromo per Ceramica

**NP ROUND**

Leghe Nichel-Cromo per Ceramica

**CSN**

Leghe Nichel-Cromo per Ceramica

**CNPS (Laser)**


Saldame per Leghe Cromo-Cobalto

**NNPS**

Saldame per Leghe Nichel-Cromo

**NPC III**

Leghe Cromo-Cobalto per Schelonica

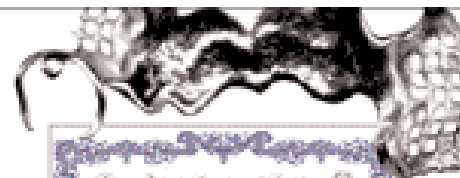

Informazioni tecniche e commerciali: Conero Dental • via Grandi 9 • 60131 Ancona • Tel e Fax 071 2861660 • [servicete@libero.it](mailto:servicete@libero.it)

**TOP QUALITY PRODUCTS**  
**DENTAMERICA®**

**CAMREX 191**



**Garanzia 2 anni**

TELECAMERA INTRAORALE  
focus automatico  
pedale per fermo immagine con memoria  
su 4 canali - CCD alta definizione  
sensore protetto antigraffio

Camrex è un prodotto venduto solo dai nostri distributori, diffidare da altri non autorizzati

**SCALEX 880**



ABLATORE PIEZOELETTRICO  
Frequenza 32000 HZ

**LITEX 695 LED**

LAMPADA POLIMERIZZATRICE A LED  
2 fasi di polimerizzazione,  
intensità 1200 mW/cm<sup>2</sup>

Inseri compatibili  
con manipoli EMS



Manipolo compatibile EMS

IMPORTATORE ESCLUSIVO

**EUROCOMPRESS®**

DENTAL DIVISION

EUROCOMPRESS - Via Burellaschi, 116/20 - 20090 Trezzano S/PN (MI)  
Tel. +39 02 4434654 - Fax +39 02 4430037  
[www.eurocompress.it](http://www.eurocompress.it) - E-mail: [eurocompress@eurocompress.it](mailto:eurocompress@eurocompress.it)

## ► Ipersensibilità dentinale: il sistema Sensodyne

Un'azione a 360° contro l'ipersensibilità dentinale.



I dentifrici Sensodyne possono vantare due meccanismi d'azione diversi, ma entrambi efficaci per contrastare le diverse fasi dell'ipersensibilità dentinale e prevenirne il ritorno. Infatti i dentifrici del sistema Sensodyne contengono differenti ingredienti attivi, utili per delle azioni diversificate, una di trattamento ed una di prevenzione.

**Sensodyne Classico** basa la sua azione desensibilizzante sullo

Stronzio Cloruro. Lo stronzio è un minerale, oligoelemento, che si ritiene abbia un ruolo importante nei processi di calcificazione e si fissa nei tessuti calcificati in sostituzione del calcio stesso, cui è chimicamente affine. L'azione desensibilizzante è dovuta al fatto che lo stronzio cloruro crea una barriera protettiva intorno alla dentina rimasta esposta agli agenti esterni. In questo modo viene limitato il contatto tra la parte sensibile del dente e gli stimoli esterni che sono all'origine del fastidio e del do-

lore avvertiti da chi soffre di ipersensibilità. Per mantenere l'effetto desensibilizzante è necessario garantire un apporto regolare di stronzio: per questo Sensodyne Classico deve essere utilizzato come parte del normale programma quotidiano di igiene orale personale, per un periodo prolungato nel tempo, anche dopo che la fase acuta del fastidio è sparita. L'efficacia dell'azione desensibilizzante di Sensodyne Classico è provata dal fatto che è da circa trent'anni sul mercato e rimane ancora oggi il più noto in assoluto tra i dentisti / odontoiatri. Venduto esclusivamente in farmacia, Sensodyne Classico è disponibile in confezione da 75 e 100 ml.

**Sensodyne F-Previon** invece contiene il Potassio Cloruro che, a contatto con i fluidi presenti nella bocca, libera lo Ione attivo potassio (K+). Lo Ione potassio agisce diversamente dallo stronzio, in quanto si ritiene abbia un'azione più attiva nei confronti dell'ipersensibilità. I sali di potassio infatti

agiscono sulla dentina e svolgono un'azione desensibilizzante, riducendone l'eccitabilità. In questo modo la percezione della sensazione dolorosa viene significativamente diminuita, anche dopo poco tempo di utilizzo del dentifricio. Sensodyne F-Previon è perfetto per l'impiego quotidiano soprattutto come prevenzione dell'ipersensibilità, perché aiuta ad evitarne il ricorrere. Inoltre è un presidio dentale a 360°, in quanto la sua formulazione comprende anche il Sodio Fluoruro, indicato per la prevenzione della carie e la protezione delle gengive, e lo Zinco Citrato, un agente antibatterico dalla provata azione antiplacca che contribuisce a combattere i problemi gengivali. Venduto esclusivamente in farmacia, Sensodyne F Previon è disponibile in confezione da 75 e 100 ml. ■

**GlaxoSmithKline**  
**Consumer Healthcare**  
**Numero Verde 800.547766**

Da aprile sarà attivo un nuovo portale di e-commerce  
Un mega-store virtuale  
dove trovare tutte le forniture dentali a prezzi mai visti!  
Occasioni imperdibili e offerte promozionali Vi aspettano!  
E per tutti  
un omaggio sul primo acquisto!



[www.dentalshop.it](http://www.dentalshop.it)

Infoline: 081.585.44.92 mail: [info@dentalshop.it](mailto:info@dentalshop.it)

# OFFERTE DALLE AZIENDE

Le promozioni degli operatori commerciali

Un rubrica utile che evidenzia gli "affari" periodicamente proposti dagli operatori.



## CAMREX 191A

Telecamera intraorale

PREZZO TAGLIATO  $\approx$  **EURO 1.080,00 +iva**

EUROCOMPRESS

Via Brunelleschi, 16-20 - 20090 Trezzano S/N  
Tel. 02.4454656 - Fax 02.4450027  
e-mail: eurocompress@eurocompress.it -  
www.eurocompress.it



## KIT CHIRURGICO MULTYSYSTEM®

Ref. 7105100 per il rialzo del seno  
mascellare a minima invasività

PREZZO TAGLIATO  $\approx$  **EURO 549,00 +iva**

MULTYSYSTEM srl

Via Solferino, 4 - 20052 Monza (MI)  
Tel. 039.2302681 - Fax 039.2302686  
e-mail: multysystem@multysystem.com - www.multysystem.com



## MICROMOTORE PER IMPIANTI

MiniUNIKO-B motore brushless per  
implantologia/chirurgia; alte prestazioni  
e grande affidabilità.

PREZZO TAGLIATO  $\approx$  **EURO 1.955,70**

MARIOTTI & C

Via Seganti, 73 - 47100 Forlì  
Tel 0543.474105 - Fax 0543.781811  
info@mariotti-italy.com - www.mariotti-italy.com

## PRAXIS ODONTOIATRICA IN 11 DVD

5 tematiche edite in 11 Dvd sempre aggiornati da Autori di alto livello  
universitario internazionale. ENDODONZIA - PROTESI - IMPLANTOLOGIA  
PARODONTOLOGIA CHIRURGIA ORALE AMBULATORIALE

PER FAR CONOSCERE L'OPERA OFFRIAMO GRATUITAMENTE

**1 DVD DELLA NUOVA TEMATICA DI CHIRURGIA ORALE**

Unitamente al prospetto dell'opera (solo rimborso spese postali)

RUSSO EDITORE

Via fax al n. 06.90024916  
Per posta a: RussoEditore - C.P. 100 - 00010 Fonte Nuova - RM

Legenda: = APPROFONDIMENTI  
 = SCHEDA INFORMATIVA

I beni offerti in questa sezione si intendono destinati all'utilizzatore professionale. Le apparecchiature soggette alla regolamentazione di cui alla Legge 175/92 possono essere cedute solamente agli iscritti all'Albo dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri. Per ogni informazione sulle offerte qui elencate il lettore interessato è invitato a rivolgersi direttamente all'inserzionista.




## Implant3D

Simulazione Implantare Tridimensionale

DIAGNOSI SU TAC - SIMULAZIONE IMPLANTARE  
INTERVENTO IMPLANTOPROTESICO

Implant3D è un software che consente di eseguire la simulazione implantare tridimensionale direttamente sul Personal Computer. Consente di simulare la posizione degli impianti su modelli bidimensionali e tridimensionali, identificare il canale mandibolare, tracciare panoramici e sezioni del modello osseo, visualizzare il modello osseo tridimensionale con possibilità di calcolare la densità ossea. Usando Implant3D il Dentista può pianificare l'intervento implantoprotesico in modo più sicuro, efficiente e rapido e produrre i modelli ossei in resina per la creazione della guida chirurgica.

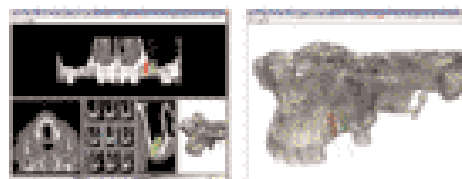

## Kavomago


Servizio Studio Dentistico

GESTIONE CLINICA - GESTIONE INDEBITI E RADIOGRAFIE  
GESTIONE STUDIO - GESTIONE APPUNTAMENTI

Kavomago è un software di gestione integrato dello Studio Dentistico. Semplifica ma potentia e completa, consente di gestire tutte le informazioni sia cliniche che economiche e di diagnosi per immagini presenti nello Studio Dentistico. Con un semplice click del mouse è possibile pianificare tutti i fatti dello Studio: inserire la scheda clinica, un preventivo, un appuntamento in agenda o ordinare le radiografie di un paziente. Kavomago è composto da diversi moduli che consentono un approccio graduale all'apprendimento e utilizzo del programma, eliminando così la necessità di lunghi corsi di istruzione. Kavomago, un unico aiuto, flessibile e creativo, di attività dello Studio.



# Diagnosi Controllo Risultato Missione Possibile

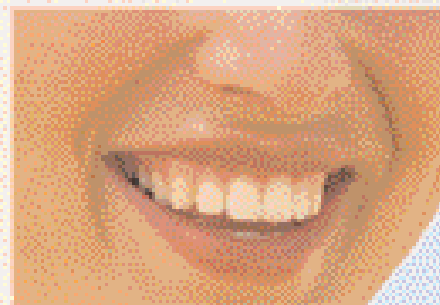

I nostri software  
lavorano per te



Soluzioni software  
per il dentale



Media Lab Software Via Fontivegge 21/AI 39125 La Spezia  
Phone 0187 517775 - Fax 0187 514655  
info@mls.com - www.mls.com - www.implant3d.com

Per saperne di più o chiedere il vostro preventivo GRATUITO,  
visitate il sito [www.mls.com](http://www.mls.com) o telefonate al numero 0187 517775.

# WORLD LINE

## INNOVAZIONE E TECNOLOGIA



STERN S300  
STERN S250  
STERN S200  
STERN S190



## SICUREZZA E QUALITÀ WORLD LINE

DA SEMPRE CON STERN WEBER



CASE rappresentate:

ROMA:

Via Antonio Panizzi, 67/69 00123 Roma - Tel. 06.30816031 - Fax 06.30816030

FONDI: Esposizione ed assistenza tecnica

Via Edificio Scolastico, 6 - 04022 Fondi (Lt) - Tel./Fax 0771.513221

[WWW.WORLDLINE-SRL.IT](http://WWW.WORLDLINE-SRL.IT) [INFO@WORLDLINE-SRL.IT](mailto:INFO@WORLDLINE-SRL.IT)



ENT L

Kodak | Dental Systems



DENTAL CENTRA  
DENTAL CENTRA S.R.L. - ATTREZZATURE DENTISTICHE  
[WWW.DENTALCENTRA.IT](http://WWW.DENTALCENTRA.IT)



re.ia. & dental farm



ANNUNCI ECONOMICI

OFFRO COLLABORAZIONE

- A centri dentali e poliambulatori ortodontista - gnatologo università Padova domicilio Roma offre consulenza 1-2 giorni al mese full time, attrezzatura/materiali propri in tutto il centro-sud. Telefonare al 328.1696300.
- A studi dentistici, odontoiatra offre collaborazione in tutte le discipline odontoiatriche. Telefonare al 339.2313983.
- Assistente alla poltrona, 15 anni di esperienza, cerca lavoro in studio dentistico. Possibilmente martedì, mercoledì e venerdì. Esperta in conservativa, endodonzia, chirurgia e impianti. Zona Napoli e provincia. Telefonare al 320.1957637.
- Assistente alla poltrona, 37 anni, esperta, bella presenza, conoscenza computer Windows, diploma Andi, cerca impiego part-time 30 ore o full-time. Zona: Torvaianica, Pomezia, Ostia, Ardea, Aprilia, Acilia, Casal Palocco, Eur (RM). Telefonare al 347.9162103.
- Assistente alla poltrona, con esperienza biennale, bella presenza, seria, volenterosa, cerca serio impiego presso studio odontoiatrico, per orario full-time. Telefonare al 338.3715916.

- Assistente alla poltrona, con esperienza decennale e con attestato di riqualificazione Andi, cerca lavoro presso studio dentistico di massima serietà, part-time o full-time. Telefonare al 339.4668375 o allo 06.50796645 o.p.
- Assistente alla poltrona, con esperienza ventennale, praticissima in ortodonzia e segreteria, cerca serio impiego presso studio dentistico o medico. Telefonare al 389.9722074.
- Assistente alla poltrona, diplomata, esperienza 4 anni in conservativa, endodonzia, ortodonzia e pedodonzia, cerca serio lavoro. Telefonare al 347.1457007.
- Assistente alla poltrona - segretaria, esperienza 4 anni, offre collaborazione presso studio dentistico, zone Roma e provincia. Telefonare al 338/1989061.
- Assistente-segretaria, ventennale esperienza nella conduzione di studi medici e dentistici, diploma di scuola media superiore, diploma di assistente dentale rilasciato dall'Andi, referenze. Capacità relazionale, disponibilità part-time. Telefonare al 338.6090702.
- Cercasi lavoro come igienista dentale presso studio dentistico. Con partita Iva. Telefonare al 347.4548815.
- Chirurgia estrattiva degli inclusi, odontoiatra offre collaborazione per Roma e provincia. Telefonare al 349.6618142.
- Chirurgo, implantologo, parodontologo, relatore a corsi e conferenze, con esperienza ventennale documentata, offre collaborazione con propria attrezzatura presso altrui studio, anche chirurgia avanzata e piezoelettrica. Telefonare allo 06.4505517.
- Collaborazione per laboratori in Ivocap (anche solo zeppatura), ganci estetici parziali o totali, aggiunte e riparazioni in giornata, prezzi interessanti, zona sud-est Roma. Telefonare al 338.5475848.
- Dottore odontoiatra con esperienza offre collaborazione in studi odontoiatrici di Roma e provincia. Esegue protesi, conservativa, endodonzia, chirurgia, parodontologia, odontoiatria infantile ed implantologia. Telefonare al 328.7225073.
- Dottore odontoiatra con esperienza offre collaborazione in studi odontoiatrici di Roma e provincia. Esegue protesi, conservativa, endodonzia, chirurgia, parodontologia, odontoiatria infantile ed implantologia. Telefonare al 328.7225073.

COLLEGATI ALL'INDIRIZZO INTERNET WWW.INFODENT.IT ED INSERISCI ANCHE ON-LINE IL TESTO DEL TUO ANNUNCIO.

I testi degli annunci di interesse odontoiatrico sono visionati preventivamente dall'A.N.D.I. - Dipartimento Regionale Lazio

- ANNUNCI GRATUITI
- VARIAZIONE DATI

indirizzo: Strada Teverina km. 3,600 • 01100 VITERBO • Tel. 0761.393.204 - Fax 0761.393.222

Nome ..... Cognome .....

Tipologia di attività ..... Specializzazione .....

Via ..... Numero ..... CAP .....

Città ..... Prov. .... Tel. ....

E-mail ..... P.IVA ..... Cell. ....

(Per annunci a pagamento è obbligatoria la partita Iva o codice fiscale)

- OFFRO O CERCO
- COLLABORAZIONE
- ATTREZZATURE
- ATTIVITÀ

Spazio per l'annuncio (scrivere a macchina o stampatello) MAX 30 PAROLE • Sarà pubblicato solo il testo sottostante\*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

\*IMPORTANTE

Gli annunci riguardanti la ricerca di collaborazioni (ricerca personale, collaboratori ecc.) devono essere pubblicati corredati dalle generalità del richiedente, in ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, attuazione della legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro (legge 14 febbraio 2003 n. 30, cosiddetta "legge Biagi"). In relazione a quanto sopra, al fine di consentire la pubblicazione delle suddette generalità in base a quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/03 che regola il trattamento dei dati personali, si autorizza la pubblicazione delle generalità suindicate.

DATA .....

NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO) .....

FIRMA .....

Per la comunicazione telefonica degli annunci economici è attiva negli orari di ufficio una segreteria telefonica al numero 0761.393.204 dal lunedì al venerdì. ATTENZIONE: SARANNO PUBBLICATI SOLO GLI ANNUNCI COMPLETI DI TUTTI I DATI RICHIESTI: NOME, COGNOME, INDIRIZZO, CAP, CITTÀ, TELEFONO, PREFISSO E PROFESSIONE. Gli annunci si ricevono fino al 5 di ogni mese precedente l'uscita e saranno pubblicati una sola volta. Per vedere pubblicato nuovamente il proprio annuncio, occorre spedire il coupon per una nuova richiesta oppure comunicare telefonicamente la riconferma. Se si desidera pubblicare in evidenza o per quelli che pervengono dalle regioni dove non è spedita INFODENT è necessario effettuare un versamento di Euro 15,50 IVA compresa su c.c.p. n° 16818015, intestato a: B.&C. srl - Strada Provinciale Teverina Km. 3,600 - 01100 Viterbo. Servizio Annunci (spedire fotocopia versamento). Per gli annunci in evidenza il versamento da effettuare è di Euro 31 e dà diritto a due uscite. INFODENT offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti sulle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile della veridicità delle inserzioni. Si procederà a norma di legge contro chiunque si servirà di questa rivista per scopi illeciti e di disturbo. Le inserzioni gratuite sono riservate ai privati. Gli operatori commerciali, per le inserzioni che riguardano l'attività svol-

ta, devono servirsi degli annunci a pagamento o degli spazi pubblicitari. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, il trattamento dei dati avverrà mediante supporti sia telematici che cartacei, entrambi eventualmente organizzati anche come banche dati o archivi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la pubblicazione dell'annuncio o per il ricevimento della rivista. La mancata comunicazione, ovvero l'accertata erroneità dei dati richiesti legittimeranno la nostra società a rifiutare l'esecuzione del rapporto, ovvero ad interrompere l'esecuzione stessa. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo della nostra Società, nonché a tutti gli Organi societari ed ai soci: i medesimi dati potranno essere inoltre comunicati agli omologhi soggetti di società da noi controllate o collegate, ovvero di società che controllano l'attività della nostra Società. I dati relativi all'indirizzo saranno utilizzati per l'invio di riviste e attività commerciali. In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del D.lgs. 196/03 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica e l'integrazione dei vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità su indicate. Il titolare del trattamento è B&C srl con sede in Viterbo Strada Teverina km 3,600 nella persona del suo legale rappresentante. Qualsiasi comunicazione o atto ufficiale potrà essere inviato dall'ispezionista presso la redazione di infodent con sede in Viterbo Strada Teverina km 3,600.



**METODICA  
IMPLANTOPROTESICA  
MULTYSYSTEM:  
VERSATILITÀ,  
AFFIDABILITÀ  
E RISPARMIO!**

IMPLANTI A VITE (MM) PER OVERDENTURE A CARICO IMMEDIATO

Mini dritto Ø 2,5 - 3,0 mm

Stretto Ø 3,8 mm

IMPLANTI A VITE (MM) A CARICO IMMEDIATO

Maxi dritto Ø 3,5 mm

Dritto Ø 3,5 - 4,0 - 5,0 mm

**€ 37,00**

IMPLANTI A VITE (MM) CON ISOLAZIONE INTERNA

Conico Ø 3,2 - 3,7 - 4,2 mm

Post-estratto Ø 4,0 - 5,0 - 6,0 mm

**€ 81,00**

IMPLANTI A VITE (MM) CON ISOLAZIONE INTERNA

Conico Ø 4,7 mm

Post-estratto Ø 4,5 - 5,5 - 6,5 mm

**€ 81,00**

**MULTYSYSTEM s.r.l.**  
20042 Monza (MI) - Via Sallustiana, 4  
Tel. 039.2300983 - Fax 039.2300988  
www.multysystem.com  
E-mail: multysystem@multysystem.com




CE

**NOVITA'**

**finition® XT**

**Termoplastica medicale**

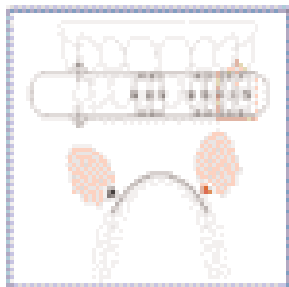

- Trasparente
- Elastico
- Biocompatibile
- Sterilizzabile in autoclave
- Può essere disinfettato nell'acqua bollente
- Ottima resistenza alla lacerazione
- Uso a lungo termine e come stabilizzazione

Dimensioni (mm)		
Spessore	1° curvatura	2° curvatura
0,75	10	10
0,85	10	10
0,95	10	10
1,05	10	10
1,15	10	10
1,25	10	10
1,35	10	10
1,45	10	10
1,55	10	10
1,65	10	10
1,75	10	10
1,85	10	10
1,95	10	10
2,05	10	10
2,15	10	10
2,25	10	10
2,35	10	10
2,45	10	10
2,55	10	10
2,65	10	10
2,75	10	10
2,85	10	10
2,95	10	10
3,05	10	10
3,15	10	10
3,25	10	10
3,35	10	10
3,45	10	10
3,55	10	10
3,65	10	10
3,75	10	10
3,85	10	10
3,95	10	10
4,05	10	10
4,15	10	10
4,25	10	10
4,35	10	10
4,45	10	10
4,55	10	10
4,65	10	10
4,75	10	10
4,85	10	10
4,95	10	10
5,05	10	10
5,15	10	10
5,25	10	10
5,35	10	10
5,45	10	10
5,55	10	10
5,65	10	10
5,75	10	10
5,85	10	10
5,95	10	10
6,05	10	10
6,15	10	10
6,25	10	10
6,35	10	10
6,45	10	10
6,55	10	10
6,65	10	10
6,75	10	10
6,85	10	10
6,95	10	10
7,05	10	10
7,15	10	10
7,25	10	10
7,35	10	10
7,45	10	10
7,55	10	10
7,65	10	10
7,75	10	10
7,85	10	10
7,95	10	10
8,05	10	10
8,15	10	10
8,25	10	10
8,35	10	10
8,45	10	10
8,55	10	10
8,65	10	10
8,75	10	10
8,85	10	10
8,95	10	10
9,05	10	10
9,15	10	10
9,25	10	10
9,35	10	10
9,45	10	10
9,55	10	10
9,65	10	10
9,75	10	10
9,85	10	10
9,95	10	10
10,05	10	10
10,15	10	10
10,25	10	10
10,35	10	10
10,45	10	10
10,55	10	10
10,65	10	10
10,75	10	10
10,85	10	10
10,95	10	10
11,05	10	10
11,15	10	10
11,25	10	10
11,35	10	10
11,45	10	10
11,55	10	10
11,65	10	10
11,75	10	10
11,85	10	10
11,95	10	10
12,05	10	10
12,15	10	10
12,25	10	10
12,35	10	10
12,45	10	10
12,55	10	10
12,65	10	10
12,75	10	10
12,85	10	10
12,95	10	10
13,05	10	10
13,15	10	10
13,25	10	10
13,35	10	10
13,45	10	10
13,55	10	10
13,65	10	10
13,75	10	10
13,85	10	10
13,95	10	10
14,05	10	10
14,15	10	10
14,25	10	10
14,35	10	10
14,45	10	10
14,55	10	10
14,65	10	10
14,75	10	10
14,85	10	10
14,95	10	10
15,05	10	10
15,15	10	10
15,25	10	10
15,35	10	10
15,45	10	10
15,55	10	10
15,65	10	10
15,75	10	10
15,85	10	10
15,95	10	10
16,05	10	10
16,15	10	10
16,25	10	10
16,35	10	10
16,45	10	10
16,55	10	10
16,65	10	10
16,75	10	10
16,85	10	10
16,95	10	10
17,05	10	10
17,15	10	10
17,25	10	10
17,35	10	10
17,45	10	10
17,55	10	10
17,65	10	10
17,75	10	10
17,85	10	10
17,95	10	10
18,05	10	10
18,15	10	10
18,25	10	10
18,35	10	10
18,45	10	10
18,55	10	10
18,65	10	10
18,75	10	10
18,85	10	10
18,95	10	10
19,05	10	10
19,15	10	10
19,25	10	10
19,35	10	10
19,45	10	10
19,55	10	10
19,65	10	10
19,75	10	10
19,85	10	10
19,95	10	10
20,05	10	10
20,15	10	10
20,25	10	10
20,35	10	10
20,45	10	10
20,55	10	10
20,65	10	10
20,75	10	10
20,85	10	10
20,95	10	10
21,05	10	10
21,15	10	10
21,25	10	10
21,35	10	10
21,45	10	10
21,55	10	10
21,65	10	10
21,75	10	10
21,85	10	10
21,95	10	10
22,05	10	10
22,15	10	10
22,25	10	10
22,35	10	10
22,45	10	10
22,55	10	10
22,65	10	10
22,75	10	10
22,85	10	10
22,95	10	10
23,05	10	10
23,15	10	10
23,25	10	10
23,35	10	10
23,45	10	10
23,55	10	10
23,65	10	10
23,75	10	10
23,85	10	10
23,95	10	10
24,05	10	10
24,15	10	10
24,25	10	10
24,35	10	10
24,45	10	10
24,55	10	10
24,65	10	10
24,75	10	10
24,85	10	10
24,95	10	10
25,05	10	10
25,15	10	10
25,25	10	10
25,35	10	10
25,45	10	10
25,55	10	10
25,65	10	10
25,75	10	10
25,85	10	10
25,95	10	10
26,05	10	10
26,15	10	10
26,25	10	10
26,35	10	10
26,45	10	10
26,55	10	10
26,65	10	10
26,75	10	10
26,85	10	10
26,95	10	10
27,05	10	10
27,15	10	10
27,25	10	10
27,35	10	10
27,45	10	10
27,55	10	10
27,65	10	10
27,75	10	10
27,85	10	10
27,95	10	10
28,05	10	10
28,15	10	10
28,25	10	10
28,35	10	10
28,45	10	10
28,55	10	10
28,65	10	10
28,75	10	10
28,85	10	10
28,95	10	10
29,05	10	10
29,15	10	10
29,25	10	10
29,35	10	10
29,45	10	10
29,55	10	10
29,65	10	10
29,75	10	10
29,85	10	10
29,95	10	10
30,05	10	10
30,15	10	10
30,25	10	10
30,35	10	10
30,45	10	10
30,55	10	10
30,65	10	10
30,75	10	10
30,85	10	10
30,95	10	10
31,05	10	10
31,15	10	10
31,25	10	10
31,35	10	10
31,45	10	10
31,55	10	10
31,65	10	10
31,75	10	10
31,85	10	10
31,95	10	10
32,05	10	10
32,15	10	10
32,25	10	10
32,35	10	10
32,45	10	10
32,55	10	10
32,65	10	10
32,75	10	10
32,85	10	10
32,95	10	10
33,05	10	10
33,15	10	10
33,25	10	10
33,35	10	10
33,45	10	10
33,55	10	10
33,65	10	10
33,75	10	10
33,85	10	10
33,95	10	10
34,05	10	10
34,15	10	10
34,25	10	10
34,35	10	10
34,45	10	10
34,55	10	10
34,65	10	10
34,75	10	10
34,85	10	10
34,95	10	10
35,05	10	10
35,15	10	10
35,25	10	10
35,35	10	10
35,45	10	10
35,55	10	10
35,65	10	10
35,75	10	

dentistici di Roma e Lazio, oppure degli interventi nel proprio studio o altrui. Telefonare al 340.3749265.

- Odontoiatra, laureata con lode, esperienza in endodonzia e conservativa, offre collaborazione a studi dentistici in Roma e dintorni. Telefonare al 333.4885550.
- Odontoiatra, laureata con lode nel 2000, offre collaborazione presso studi dentistici in Roma e nel Lazio, in conservativa, endodonzia e protesi. Massima serietà. Telefonare al 338.4679412.
- Odontoiatra laureato all'Università La Sapienza, abilitato con il massimo dei voti, esperienza nelle varie discipline, offre collaborazione in studio dentistico a Roma e provincia. Telefonare al 334.3413357.
- Odontoiatra, laureato con lode nel 2005, offre collaborazione a Roma e provincia. Telefonare al 335.8410226.
- Odontoiatra perfezionato in endodonzia con nichel-titanio e sistemi di obturazione con guttaperca termoplastica, ampia casistica documentabile, offre collaborazione a studi odontoiatrici in Roma e provincia. Telefonare al 348.3105252.
- Odontoiatra specialista in chirurgia odontostomatologica offre collaborazione in chirurgia orale, implantare, parodontale. Telefonare al 338.3556030.

- Odontotecnico ceramista con propria partita Iva offre collaborazione a laboratori odontotecnici per lavorazioni di protesi, con pagamenti a percentuale 40 euro a elemento o eventualmente 40 euro ora lavorativa. Disponibilità centro Italia. Possibilità di spedizioni in un giorno in tutta Italia. Telefonare allo 0774/324147.
- Odontotecnico con esperienza decennale, partita Iva propria, offre collaborazione a laboratori odontotecnici, con pagamenti a percentuale. Telefonare al 338.5444300.
- Offresi consulenza endodonzia e conservativa, zona Grosseto e provincia. Telefonare al 338.4920812.
- Ortodontista, esperta in terapia mobile, funzionale e fissa, offre collaborazione in studi dentistici a Roma e provincia. Telefonare al 339.3022704.
- Ortodontista specialista, con esperienza decennale e casistica documentata, offre collaborazione presso studi avviati del Lazio. Telefonare al 339.3541255.
- Ortodontista, con esperienza decennale in ortodonzia mobile, fissa, funzionale, disfunzionale e preprotetica, offre collaborazione presso studi avviati a Roma. Telefonare al 338.6547306.
- Ortodontista specialista in ortodonzia

- mobile, funzionale, fissa, prechirurgica, Invisalign, esperienza quinquennale, offre collaborazione presso studi dentistici di tutto il Lazio, Umbria, bassa Toscana, Abruzzo e Campania. Telefonare al 329.5478180.
- Parodontologia: esperta in parodontologia, titolare di studio, sarebbe disponibile per collaborazione 2 o 3 mattine a settimana. Telefonare allo 06.5913003 o al 335.435658.
- Ragazza 27enne, ottima presenza, cerca impiego come assistente alla poltrona o/e segretaria. Full-time, massima serietà, zona Roma est. Tel. 339.8959740.
- Segretaria cerca serio impiego, part-time pomeriggio, in uno studio dentistico. Telefonare al 347.4130733 pomeriggio.
- Specializzanda in ortodonzia offre collaborazione in ortodonzia mobile, funzionale e fissa presso studi dentistici in Roma e nel Lazio. Massima serietà. Telefonare al 338.4679412.
- Terapia miofunzionale della deglutizione atipica - logopedista offre collaborazione presso i vostri studi, zona Eur, San Giovanni, Tuscolana (RM). Telefonare al 340.5338262.
- Vendo pressofusione CL-G Combilabor, ottime condizioni, accessoriata, pronta per lavorare, euro 1.800,00 trattabili. Telefonare al

338.4789051.

### CERCO COLLABORAZIONE

- Linea Tac srl ricerca per zone libere agenti (ambosessi) mono/plurimandatari. Si offre contratto Enasarco, provvigioni, più bonus per gli obiettivi raggiunti. Inviare curriculum a: Linea Tac srl - via della Guardia, 7 - 14048 Montegrosso d'Asti (AT) (autorizzando il trattamento dei dati personali D.lgs. 196/03).
- Odontotecnico specializzato protesi fissa, ceramica, Odontotecnica Berardi in Roma cerca. Offresi buona prospettiva economica, adeguata alle capacità individuali. Telefonare al 320.7586233.
- Omnia srl, leader nel settore dentale, cerca per il potenziamento della propria rete di vendita sulla regione Lazio, agenti di vendita mono/plurimandatari. Si offre contratto Enasarco, provvigioni, premi ed un fisso mensile. La persona che cerchiamo deve essere ambiziosa e con forte orientamento a lavorare per obiettivi. La provenienza dal settore odontoiatrico costituirà titolo preferenziale. Inviare il C.V. a: Omnia srl, via Cardano 44, 43036 Fidenza (PR) o telefonare allo 0524/527453 (Sig.na Ilenia) Fax 0524/525230. Gli interessati (ambosessi - L. 903/77) dovranno inviare il C.V. autorizzando il




# Giorgi Forniture dentali s.r.l.

concessionario monomarca  dal 1997


K.V. - nt. I.Esc. II n.c.

## Con KaVo: UNA PRIMAVERA DI RISPARMIO

Leasing KaVo   
Kredit agevolati  
e personalizzati




KaVo Globus 1078 S

 Assistenza tecnica  
Organizzazione  
Palombi



KaVo Primus 1058

Info line 06.24418084 - Via F. Ferraironi, 86/F - 00177 Roma  
e mail: [comm@giorgifornituredentali.191.it](mailto:comm@giorgifornituredentali.191.it)

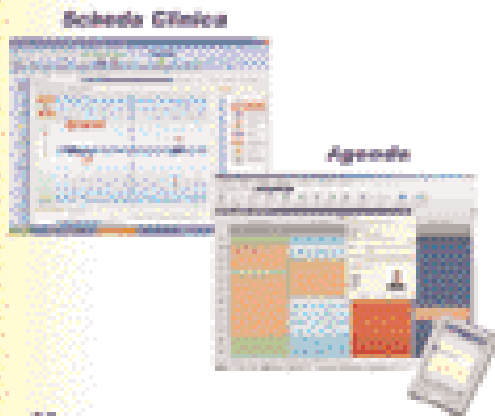


**Facile** intuitivo come Windows!

**Sicuro** usa le ultime tecnologie Microsoft!

**Flessibile** si adatta all'operatore che lo usa

**Modulare** si acquista solo ciò che serve

**Completo** in modo Collaborativo

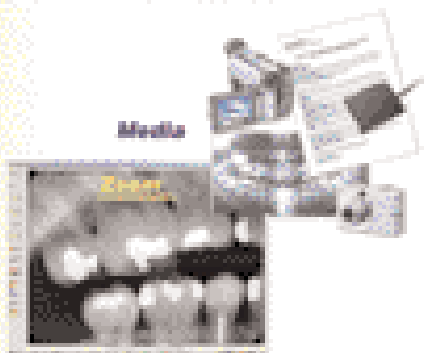

**dallo STUDIO alla CLINICA  
a PARTIRE da 480€ IVA esclusa**

**Chiedi come  
riceverlo GRATIS**

**SW Dental Software**

Via G. Bassoletti, 27 - 37139 Verona - VR  
Tel. 045 82 51 298 - Fax 045 82 50 152  
www.swdental.com - email: info@swdental.com

**Cerchiamo Rivenditori per zone libere**

trattamento dei dati personali (L. 196/03).

- Wilocs di Roma, reparto cad-cam, ricerca odontotecnico con esperienza nella realizzazione di manufatti ad altissima precisione, dimestichezza con i più comuni sistemi di ingrandimento e nell'utilizzo di tecnologie informatiche. Telefonare allo 06.52171843.
- Wilocs di Roma ricerca giovani ceramisti con un talento naturale per la ceramica, età max 28, almeno 6 anni di esperienza e capacità di lavorare ad alti livelli di precisione. Telefonare allo 06.52171843.

**OFFRO ATTREZZATURA**

- Autoclave Classe B con stampante, euro 3.200,00 + iva, nuova. Telefonare allo 06.7962180.
- Carrello Clip 6 Vitali con turbina f. ott., micromotore, siringa, euro 4.000,00 + iva nuovo. Telefonare allo 06.7962180.
- Deposito dentale, causa cessazione attività, vende riuniti nuovi/usati, compressori a secco, radiografici endorali, lampade per compositi, ablatori Souprasson, autoclavi, imbustatrici, mobili per studio etc. Telefonare allo 06.3050111 o al 333.7975728.
- Laboratorio odontotecnico di Roma vende fonditrice ASM 20, come nuova (12 ore di lavoro), completa di pompa vuoto, stampante, kit argon, mobile e accessori a corredo. Telefonare allo 06.77076201.
- Laboratorio odontotecnico vende 2 banchi di lavoro seminuovi a 2 posti, 1 banco nuovo con lavabo incorporato, 5 banchi per appoggio macchinari, articolatori (seminuovi) Asa Dental, Magnete de Luxe, Keystone, Quick, Shofu ProArch 1, Artek, Whip Mix 100. Telefonare allo 06.8104750 o al 335.446223 fax 06.88328692.
- Manipoli Piezo Ems + 1 punta S1 nuovi, euro 390,00 + iva. Telefonare allo 06.7962180.
- Medico odontoiatra, causa cessata attività, vende materiale vario da studio: ablatori, lampade fotopolimerizzatrici, pinze estrazione, valigetta rianimazione, squadramodelli, lucidatrice, pentola a pressione più materiale vario di consumo. Telefonare al 338.5902098.
- Micromotori chirurgici Atr 5000 + c.angolo 1:20, euro 3.300,00 + iva. Telefonare allo 06.7962180.
- N. 2 riuniti Stern Weber, usati, 4 anni di vita, full optional, euro 6.500,00 cad. Telefonare allo 06.3222147.
- Odontotecnico, per chiusura laboratorio in Roma, vende attrezzatura in blocco o parti singole. No perditempo. Telefonare allo 349.6954084.
- Offro attrezzatura: mobili per studi

- odontoiatrici, 12 elementi, marca Kavo Puzzle, in buone condizioni, vendo. Telefonare al 337.721078.
- Offro compressore a secco monocilindri Larfon CS 1500, corredato di essiccatore, il tutto revisionato a febbraio 2006. Vendo euro 600,00. Telefonare allo 06.39721001 ore studio.
- Prezzo speciale per micromotori Silfradent 27.000 giri, euro 380,00 + iva. Telefonare allo 06.7962180.
- Riuniti e poltrone nuovi, mai usati, privato vende, prezzo molto conveniente. Telefonare allo 06.44245364 o al 335.8075125 (eventuale messaggio segreteria).
- Riunito Vitali, sala mostra, modello Artex con ablatore, euro 8.900,00. Telefonare allo 06.7962180.
- Stereomicroscopi professionali da banco da 4x a 100x, con illuminatore per luce trasmessa e riflessa ed ampio corredo di accessori euro 400,00. Sistemi completi con illuminatore con lampada alogena e fibra ottica anulare per luce fredda. Eventuale disponibilità di supporti a pantografo, di sistemi per fotomicrografia e di fibre ottiche bifilari. Telefonare allo 06.4072172 (casa) o allo 06.30484685 (ufficio) o al 338.3408288 e-mail: massimo.dapice@casaccia.enea.it.
- Vasche ultrasuoni con accessori euro 690,00 + iva. Telefonare allo 06.7962180.
- Vendesi baropodometro elettronico, marca Image System, completo di Pc e software gestionale. 2 anni di vita e in ottime condizioni. Prezzo interessante. Telefonare allo 06.633957.
- Vendesi privatamente banchi da laboratorio nuovi, mai usati, prezzo molto vantaggioso. Telefonare allo 06.44241021 o al 328.3361913 (eventuale messaggio segreteria).
- Vendesi riunito Anthon Proteo, anni '90, ben conservato, con lampada Faro, compressore Durr, apparecchio per radiografie endorali Explor 70. Telefonare allo 06.8417061 o al 06.8549347.
- Vendesi riunito Kavo, ottime condizioni. Affare. Telefonare al 338.1804209.
- Vendesi RX CIA5 stativo Kw 65 cono lungo, lampada U.V. Novaxa, ultrasuoni, sterilizzatrice quarzo, elettrobisturi, manipolo micromotore TDK, turbina TDK f.o. 4 vie, turbina Mignon TDK f.o. 4 vie a chiavetta. Telefonare al 347.0684005.
- Vendo banchi da lavoro mod. Saratoga (L 1m - P 50 - H 83), in metallo rosso, piano bianco, 2 cassetti con sportello vetro con attacchi micromotore, turbina e siringa mod. Faro, euro 1.000,00 cadauno trattabili. Telefonare allo 06.5910679 ore pomeridiane dal lunedì al venerdì.

**CERCO ATTREZZATURA**

- Cerco sviluppatrice Durr XR 04. Telefonare al 333.2464560.



Associazione  
Amici di Brugg

**UNIDI**

Unione Nazionale Industrie  
Dentarie Italiane

**CORSI GRATUITI  
RISERVATI AGLI ISCRITTI**

eventi in fase di  
accreditamento



[www.amiciidibrugg.it](http://www.amiciidibrugg.it)

# 49° Congresso Amici di Brugg

*Esposizione Merceologica  
di Attrezzature e Materiali  
per Odontoiatria  
e Odontotecnica*

**GIOVEDÌ 18  
VENERDÌ 19 SABATO 20  
MAGGIO 2006  
FIERA di RIMINI  
ingresso SUD**

**OFFRO ATTIVITÀ**

- Ad odontoiatri e igienisti con pazienti propri, affittasi unità odontoiatrica completa di radiografico endorale e ortopantomografo, in elegante studio zona Porta Pia, via dei Villini 10, 00161 Roma. Telefonare al 349.4688201 o allo 06.4402050.
- Affittasi in Camerino (MC), palazzo centro storico, costituito da 2 sale operative completamente attrezzate, saletta sterilizzazione, 2 bagni, ufficio-segreteria, sala d'aspetto; autorizzazione regionale definitiva concessa. Telefonare al 335.1200382.
- Affittasi studio dentistico, completamente attrezzato, zona viale Somalia (RM), a odontoiatra per 3 volte settimanale, prezzo interessante. Telefonare allo 06.86328898. Affitto unità operativa completa, in studio odontoiatrico zona Salaria-Parioli (RM). Telefonare allo 06/8415680 ore 9,00-12,30 dal lun al ven.
- Cedesi studio medico odontoiatrico, avviato da circa 40 anni dal medesimo specialista, in zona centrale di Velletri con parcheggio privato, 1° piano, ascensore, composto da: 2 stanze completamente attrezzate, con 2 riuniti, sterilizzatrice ed autoclave: ingresso, sala d'attesa, bagno,

corridoio, ripostiglio, 2 balconi. Telefonare al 349.5572321.

- Cedo studio dentistico con 1 unità operativa, zona piazza della Radio (RM), completamente ristrutturato, climatizzato, impianti a norma, autorizzazione Asl. Affitto modico, No perditempo. Telefonare allo 06.5577701.
- Cercasi collega medico-odontoiatra, con propria clientela, cui affittare unità operative, in studi prestigiosi siti in Roma in viale Parioli ed in via Boncompagni. Gli studi sono compensivi del servizio di segreteria e di ogni attrezzatura necessaria anche all'implantologia. Telefonare al 339.2313983.
- Laboratorio odontotecnico affitta posti di lavoro, a norma, attrezzato, climatizzato, sito in Roma sud. Telefonare al 393.6056373.
- Laboratorio odontotecnico, attrezzato anche per scheletrati ed ortodonzia, sito in provincia di Viterbo a 60 km da Roma, affitta posti di lavoro ad odontotecnici con propria partita Iva. Possibilità per eventuale collaborazione. Telefonare al 333.9394087 o al 335.6556376.
- Laboratorio odontotecnico vendo, completo di attrezzature, materiali, clienti e mura. Sito in viale Tirreno a Roma, zona Montesacro. Telefonare allo 06.87182319.
- Locali già laboratorio odontotecnico, a norma di impianto elettrico e aspirazione. Telefonare allo 06.3232502.
- Locali per laboratorio odontotecnico, a norma di impianto elettrico e aspirazione. Telefonare allo 06.3232502.
- Roma, zona Trieste, affitto ampia stanza odontoiatrica, completamente attrezzata ed a norma, a colleghi con pazienti propri. Telefonare al 340.3684749.
- Studio dei vostri sogni, irripetibile, vendo in toto mura ed elegantissimo arredamento in Roma Parioli piazza Ungheria: attico 180 mq, tutto intorno terrazzato 50 mq, 2 ascensori, 2 ingressi, aria condizionata, segreteria, ampia sala attesa con caminetto, 3 bagni, cucina laboratorio, centrale sterilizzazione, 4 riuniti Stern Weber con 7 moduli cadauno, 4 radiografici, grandissime vetrate esterne panoramiche, studio privato con grande acquario. Telefonare al 339/5070330.
- Studio dentistico sito in Roma Sud, recentemente ristrutturato, a norma anche per l'accoglienza di pazienti portatori di handicap, affitta stanze attrezzate ad odontoiatri, medici e paramedici. Telefonare al 333.7695322.
- Studio dentistico, zona Eur centro - viale Europa (RM), tutto a norma, affitta ampia stanza attrezzata a

- collega con clientela propria, 1 o 2 giorni a settimana. Telefonare allo 06.5925932 o al 347.6136710 o.p.
- Studio dentistico, zona S. Giovanni (RM), cede stanza arredata con uso di sala d'attesa, a medici di altra specialità, anche a fisioterapisti e psicologi. Euro 700,00 mensili. Telefonare al 393.9143649.
- Studio medico odontoiatrico affitta stanza attrezzata a collega odontoiatra, anche part-time, zona Trieste (RM). Telefonare al 338.6118943 o allo 06.86216866.
- Studio medico Torrino nord (RM) affitta studio dentistico attrezzato più giorni a settimana. Telefonare al 340.7200182.
- Studio odontoiatrico, avviamento ventennale, prestigiosamente arredato, in Roma, metro S. Giovanni, svendo per cessazione attività. Telefonare al 335.6787147.

**CERCO ATTIVITÀ**

- Medico odontoiatra cerca stanza in affitto per 1-2 giorni alla settimana, presso studio di collega in Roma, zona piazza di Villa Castegna e via Gregorio VII. Telefonare al 338.7540165.
- Odontoiatra, prevalentemente ortodonzista, cerca stanza in affitto presso studio dentistico, zona Cassia (RM). Eventuale collaborazione. Telefonare al 339.1260349.

# CENTRO CORSI SMILE CENTER S.R.L.

## CORSI AVANZATI DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA ANNO 2006

- CORSO TEORICO-PRATICO SU "LE RECESSIONI GENGIVALI"  
Relatore: Dr. Marco Cernicchi
- CORSO TEORICO-PRATICO DI "IMPLANTOLOGIA"  
Relatore: Dr. Marco Cernicchi  
Il corso si svolgerà in 4 incontri di 1 giorno ognuno  
Inizio corso 12 maggio 2006
- CORSO TEORICO-PRATICO SUL "CARICO IMMEDIATO" PER MEDICI ED ODONTOTECNICI  
Relatori: Dr. Marco Cernicchi - Sig. Andrea Pedetta
- CORSO TEORICO-PRATICO SUL "GRANDE RIALZO DI SENO"  
Relatore: Dr. Marco Cernicchi
- CORSO ANNUALE DI PARODONTOLOGIA ANNO 2006-2007  
Relatori: Dr. Carlo Tinti e Dr. Stefano Parma Benfenati  
Il corso si svolgerà in 6 incontri di tre giorni ognuno.  
Inizio corso 23/24/25 febbraio 2006
- CORSO DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA AVANZATA  
Relatori: Dr. Carlo Tinti e Dr. Stefano Parma Benfenati  
Il corso si svolgerà in 2 incontri di 1 giorno
- CORSO TEORICO-PRATICO PER IGIENISTI ANNO 2006  
Relatore: Dr.ssa Marisa Roncati Parma Benfenati  
Il corso si svolgerà in 6 incontri di 1 giorno ognuno
- CORSO DI PARODONTOLOGIA NON CHIRURGICA  
Relatore: Dr.ssa Marisa Roncati Parma Benfenati  
Sabato 27 maggio 2006

PER INFORMAZIONI E PROGRAMMI RIVOLGERSI A:  
SMILE CENTER SRL

VIA COLLEDORO, 37/41 - 00030 - COLLEFERRO (RM)  
RESPONSABILE SIG.RA MELISSA - TEL 069770581/2 FAX  
E-MAIL: SMILECENTER@MCLINK.IT SITO INTERNET: WWW.SMILECENTER.IT




I M T E C

**MDI**

S E N D A X

## Mini Dental Implant System

Un 'Ora  
Una Fase  
Carico  
Immediato!

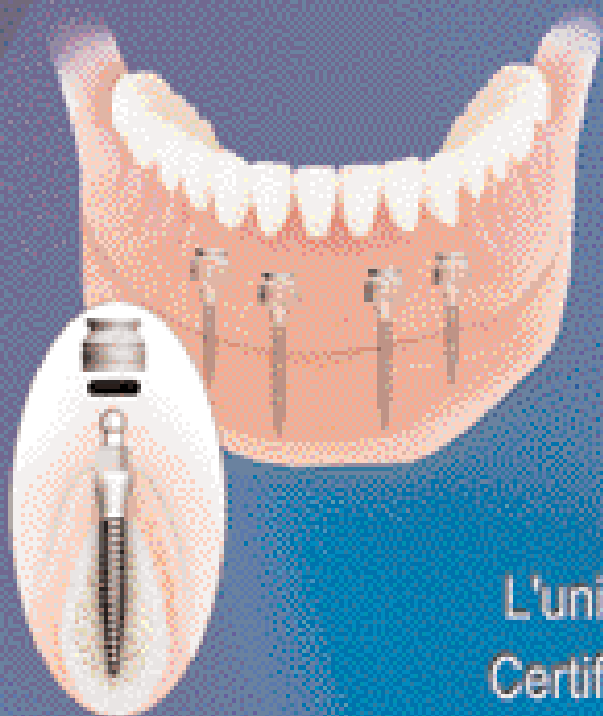


L'unico Mini Impianto  
Certificato dalla F.D.A.  
Per La Stabilizzazione  
Della Protesi  
a Lungo Termine

Per informazioni chiamate il numero verde gratuito:

**00800 - 468 - 33000**

IMTEC IL LEADER GLOBALE NEI MINI IMPIANTI DENTALI

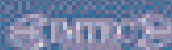


# Orisline: un salto di qualità




la linea di software più completa per lo Studio Odontoiatrico

**D** *OrisDent 9001<sup>®</sup>* Gestione studio odontoiatrico

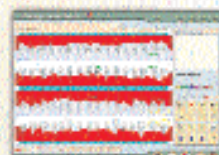

**E** *OrisEduco<sup>2</sup>* Comunicazione al paziente

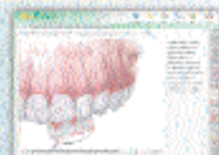

**C** *OrisCEPH* Analisi cefalometriche



**M** *OrisDENT Mobile* Gestione studio su palmare



## www.orisline.com

...per saperne di più e per ricevere materiale  
dimostrativo gratuito chiama il numero  
02-2590652 - info@orisline.com

**Elite**  
Computer  
Italia<sup>®</sup>